



Sistema Automatizado de Administración de Insulina Omnipod® 5

Guía del usuario

para el Controlador y los smartphones con tecnología Android proporcionados por Insulet

INDICACIONES DE USO

La **Bomba Omnipod® 5 ACE (Pod)** está diseñada para la administración subcutánea de insulina, a velocidades fijas y variables, para el control de la diabetes mellitus en personas que requieren insulina. La Bomba Omnipod 5 ACE puede comunicarse de manera confiable y segura con dispositivos compatibles conectados digitalmente, incluido el software de dosificación automatizada de insulina, para recibir, ejecutar y confirmar comandos de estos dispositivos. La Bomba Omnipod 5 ACE está diseñada para un solo paciente, uso doméstico y requiere receta médica.

El **algoritmo de Omnipod 5** está diseñado para usarse con monitores continuos integrados de glucosa (iCGM) compatibles y bombas con controlador alternativo activado (ACE) para aumentar, reducir y pausar automáticamente la administración de insulina en función de los valores de glucosa actuales y previstos. El algoritmo de Omnipod 5 está diseñado para el manejo de la diabetes mellitus tipo 1 en personas de 2 años y mayores y de la diabetes mellitus tipo 2 en personas de 18 años y mayores. El sistema Omnipod 5 está diseñado para usarse por un solo paciente y requiere receta médica.

La **Calculadora SmartBolus** es un software previsto para el manejo de la diabetes en personas de 2 años y mayores que requieren insulina U-100 de acción rápida. La Calculadora SmartBolus calcula una dosis de bolo sugerido en función de los carbohidratos ingresados por el usuario, la medida más reciente de glucosa del sensor (o la medida de glucosa en sangre si se realiza un pinchazo en los dedos), la velocidad de cambio del sensor de glucosa (si es correspondiente), la insulina activa (IOB) y el Factor de Corrección programable, la Proporción de Insulina a Carbohidratos y el valor de Glucosa Objetivo. La Calculadora SmartBolus está diseñada para un solo paciente, uso doméstico y requiere receta médica.

INSULINAS COMPATIBLES

El Sistema Automatizado de Administración de Insulina Omnipod 5 es compatible con las siguientes insulinas U-100: NovoLog®, Humalog®, Admelog® y Kirsty®.

Algunos productos de insulina están etiquetados para su uso en cualquier bomba que sea compatible con las insulinas mencionadas anteriormente. Para ver si se puede utilizar una insulina diferente de las enumeradas, consulte la sección 2.2 de la información de prescripción de ese producto de insulina.

CONTRAINDICACIONES

El sistema Omnipod 5 NO se recomienda para personas que:

- No pueden monitorear la glucosa como lo recomienda su proveedor de atención médica.
- No pueden mantener el contacto con su proveedor de atención médica.
- No puedan usar el sistema Omnipod 5 de acuerdo con las instrucciones.
- Están tomando hidroxiurea y usan un sensor Dexcom, ya que podría resultar en valores de glucosa del sensor falsamente elevados y causar la administración excesiva de insulina, lo que puede generar hipoglucemia severa.
- NO tienen audición o visión adecuadas para permitir el reconocimiento de todas las funciones del sistema Omnipod 5, incluidas alertas, alarmas y recordatorios.

El Pod debe quitarse antes de la obtención de Imágenes por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés), Tomografías computarizadas (CT, por sus siglas en inglés) o un tratamiento de diatermia. Además, el Controlador o el smartphone se deben colocar fuera de la sala de procedimientos. Exponerse a MRI, CT o al tratamiento de diatermia puede dañar los componentes.



¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A OMNIPOD® 5!

Nuevo usuario de Omnipod 5

Es necesario recibir capacitación y entender las instrucciones de uso ANTES de usar su nuevo sistema Omnipod 5. Siga estos pasos para empezar:

- 1. Para empezar**
Visite: omnipod.com/setup para crear su cuenta, conectar sus cuentas de administración de datos y conocer las opciones de capacitación.
- 2. Reciba capacitación**
Aprender cómo usar correctamente el sistema Omnipod 5 es importante para su uso seguro y eficaz. Los diferentes métodos de capacitación disponibles para aprender a usar el sistema se basan en sus preferencias y las de su proveedor de atención médica.
- 3. ¡Disfrute de su libertad!**
Entonces podrá disfrutar de los beneficios y flexibilidad de su nuevo sistema Omnipod 5.

Si tiene preguntas, comuníquese con el equipo de Atención al cliente llamando al 1-800-591-3455 y reciba asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Para acceder a la Guía técnica del usuario completa del sistema Omnipod 5

En cualquier momento mientras usa el Omnipod 5, puede consultar la *Guía técnica del usuario de Omnipod 5* o solicitar acceso a esta.

1. Descargue o imprima una copia digital:
 - Visite omnipod.com/guides
 - Escanee este código QR con su smartphone.



2. Solicite recibir una copia impresa gratuita:
 - Formulario de solicitud en línea en omnipod.com/guides
 - Llame para solicitar: 800-591-3455



omnipod.com/guides



ÍNDICE

Sección 1: Descripción general del sistema Omnipod 5	8
Sección 2: Configure su Aplicación Omnipod 5.	10
Sección 3: Conecte el sensor	12
Sensor Dexcom G6.	12
Sensor Dexcom G7.	14
Sensores Libre 2 Plus y Libre 3 Plus	17
Sección 4: Configure un nuevo Pod	24
Preparación	24
Llene el Pod	25
Active el Pod de Omnipod 5	26
Cómo cambiar el Pod	29
Sección 5: Modos del sistema Omnipod 5.	30
Modos del sistema.	30
Estados del sistema	31
Cambiar al Modo Automatizado	35
Consejos para tener éxito.	36
Sección 6: Conozca la Aplicación.	38
Pantalla de Inicio de la Aplicación Omnipod 5.	38
Tendencias e indicadores de glucosa	39
Ver el gráfico del sensor	39
Alarmas y notificaciones	40
Sección 7: Acciones clave de administración de insulina	44
Administrar un bolo.	44
Alimentos Personalizados.	46
Iniciar la función de Actividad.	48
Pausar la administración de insulina	50
Iniciar la administración de insulina	50
Editar un Programa Basal	51
Programas Basales adicionales	52
Establecer una tasa Basal Temporal	53
Sección 8: Información sobre mi Omnipod 5	54
Las siguientes 3 colocaciones de mis Pod	57
Mis Alimentos Personalizados	57
MIS AJUSTES INICIALES PARA LA TERAPIA CON INSULINA ...	58

Descripción general del sistema Omnipod 5

La Aplicación Omnipod 5

- En el Controlador proporcionado o en un smartphone compatible.
- Envía comandos al Pod.
- Muestra información sobre la glucosa y la insulina del Pod.
- Se utiliza para administrar bolos de comida y de corrección.

El Pod

- Administra insulina al organismo.
- Recibe comandos de la Aplicación Omnipod 5.
- Recibe los valores de glucosa del sensor.
- Envía valores de glucosa del sensor a la Aplicación Omnipod 5.
- Ajusta automáticamente la administración de insulina en Modo Automatizado.

El sensor Dexcom G6 o Dexcom G7

- Envía los valores de glucosa del sensor al Pod y al Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa Dexcom G6 o G7. El sensor Dexcom G7 de 15 días puede comunicarse con un dispositivo de visualización (ya sea un receptor Dexcom o un smartphone usando la Aplicación Dexcom G7) mientras está vinculado con un Pod. Los sensores Dexcom G6 y Dexcom G7 estándar no se pueden comunicar con un receptor Dexcom mientras están emparejados con un Pod.
- No se comunica directamente con la Aplicación Omnipod 5.

Puede configurar e iniciar el sensor Dexcom antes o después de configurar la Aplicación Omnipod 5. Para obtener más información, consulte las Instrucciones de uso de Dexcom.

El sensor FreeStyle Libre 2 Plus o FreeStyle Libre 3 Plus

- Envía valores de glucosa del sensor al Pod y a la Aplicación Omnipod 5.
- Hace sonar las alarmas en la Aplicación Omnipod 5.
- No se puede comunicar con otro dispositivo mientras se utiliza con Omnipod 5.

Debe escanear e iniciar los sensores de Libre Plus con la Aplicación Omnipod 5.

El sensor Libre 2 Plus es compatible únicamente con el Controlador proporcionado por Insulet cuando se usa Omnipod 5.

Sensor no incluido

Sensor no incluido. Para obtener información específica del sensor, consulte las Instrucciones de uso de su sensor compatible.



Configure su Aplicación Omnipod 5

Configuración de la Aplicación Omnipod 5

Antes de configurar el sistema Omnipod 5, elija si desea usar la Aplicación Omnipod 5 en el Controlador proporcionado o en un smartphone personal compatible. La conectividad con datos móviles o Wi-Fi es importante al utilizar el sistema Omnipod 5. Con uno u otro dispositivo, asegúrese de conectarse a la red Wi-Fi de su casa o trabajo. Consulte una lista de smartphones compatibles en omnipod.com/compatibility.

Los ajustes iniciales del tratamiento con una bomba de insulina, proporcionados por su proveedor de atención médica, son necesarios para configurar la Aplicación Omnipod 5.



Si usa el Controlador que se proporciona como su Controlador: **BIEN**

- Mantenga presionado el botón de prenderlo.

Si usa su smartphone Android personal compatible:

- Descargue la Aplicación Omnipod 5 en Google Play.
- Asegúrese de que el Bluetooth® esté PRENDIDO en su smartphone compatible.



Nota:

Si utiliza el sensor FreeStyle Libre 2 Plus con Omnipod 5, debe utilizar el Controlador proporcionado por Insulet y no un smartphone.

- Si piensa utilizar la Aplicación Omnipod 5 para iPhone, revise la *Guía del usuario de Omnipod 5 para iPhone*.



La Aplicación Omnipod 5 lo guiará durante el proceso de configuración. Asegúrese de leer cada pantalla e ingrese cuidadosamente la información.

Se necesita una ID de Omnipod para la configuración. Se le pedirá que inicie una sesión o que cree una nueva ID.

La configuración se acaba después de que ingrese los ajustes del tratamiento con una bomba de insulina personalizados (que le proporciona su proveedor de atención médica).




Conecte el sensor

Sensor Dexcom G6

Debe usar la Aplicación Dexcom G6 en un smartphone para iniciar y detener su sensor y Transmisor. Si ha estado usando el receptor Dexcom G6, apáguelo. Su Transmisor no se emparejará con el Pod si aún está conectado al receptor.


Ubique el Número de serie del Transmisor Dexcom G6. Lo puede encontrar en los ajustes de su Aplicación móvil Dexcom G6, en la parte posterior del Transmisor y en la caja del Transmisor.

Paso 1: Seleccione Dexcom G6 como sensor

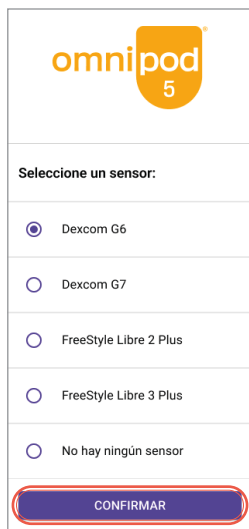

Desde la configuración inicial, seleccione su sensor.

O
BIEN

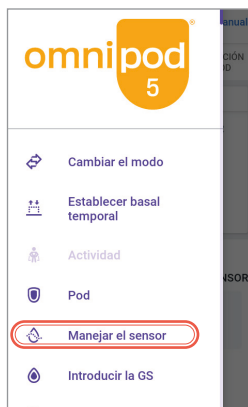

Desde la pantalla de inicio:

- Toque el botón de menú.
- Toque **Manejar el sensor**.
- Seleccione su sensor.


Paso 2: Ingrese y guarde el número de serie del Transmisor nuevo



- Toque **INGRESAR NUEVO**.



- Toque el primer recuadro para ingresar el número de serie del Transmisor.

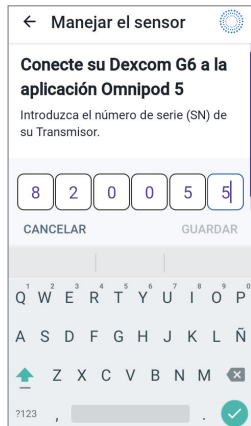

- Toque **Listo**.
- Toque **GUARDAR**.


Nota:

Su Pod usa el NS para conectarse con el Transmisor correcto. Deberá ingresar un nuevo NS cada vez que reemplace su Transmisor.

Sensor Dexcom G7


Debe usar el dispositivo de visualización Dexcom G7 en un dispositivo de pantalla para iniciar y detener su sensor.

Paso 1: Seleccione Dexcom G7 como su sensor

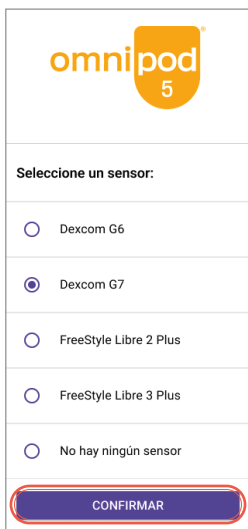

Desde la configuración inicial, seleccione su sensor.

O
BIEN

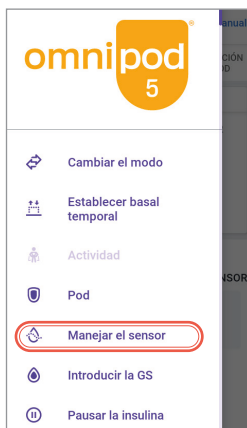

Desde la pantalla de inicio:

- Toque el botón de menú.
- Toque **Manejar el sensor**.
- Seleccione su sensor.

Paso 2: Ingrese el código de emparejamiento y el número de serie de su sensor



- Toque **AGREGAR NUEVO**.



- Para usar la opción Tomar foto para conectarse, toque **TOMAR FOTO**.
- Para ingresar los números, toque **INGRESAR CÓDIGO MANUALMENTE**.

Nota: Deberá conectar cada sensor Dexcom G7 nuevo tanto a la Aplicación Omnipod 5 como al dispositivo de pantalla Dexcom G7 para que el Pod y el sensor permanezcan conectados.

Nota:

Compruebe que la lente de la cámara no esté obstruida por el estuche del smartphone o la funda de gel del Controlador. También deberá tener activado el permiso de acceso a la cámara.



Alinee el código QR en el marco verde y mantenga el Controlador y el aplicador estables durante varios segundos. La foto se toma automáticamente. No se almacenará.

O BIEN

- Ingrese el código de emparejamiento de 4 dígitos impreso en su aplicador.
- Toque **GUARDAR**.

- Ingrese el número de serie de 12 dígitos impreso en su aplicador.
- Toque **GUARDAR**.




Sensores Libre 2 Plus y Libre 3 Plus

Puede conectar Omnipod 5 con los sensores Libre 2 Plus o Libre 3 Plus.


La administración de todos los sensores Libre Plus se realiza en la Aplicación Omnipod 5, lo que incluye el inicio de un sensor, la configuración y la respuesta a las alarmas.

El sensor Libre 2 Plus es compatible únicamente con el Controlador proporcionado por Insulet cuando se usa Omnipod 5.

Paso 1: Seleccione un Libre Plus como su sensor

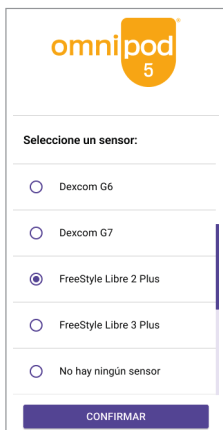

O BIEN

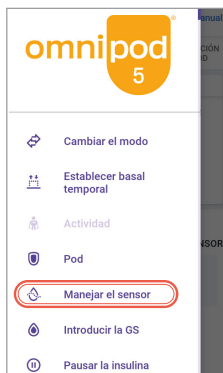

En la configuración inicial, seleccione:

- FreeStyle Libre 2 Plus o bien
- FreeStyle Libre 3 Plus

Desde la pantalla de inicio

- Toque el botón de menú.
- Toque **Manejar el sensor**.

Paso 2: Revise los ajustes del sensor

← Revisar ajustes

Glucosa baja
Prendido

Notificar cuando la glucosa esté por debajo de este nivel
(60 mg/dL a 100 mg/dL)

70 mg/dL

Anular ajustes de volumen
Prendido

Préndalo si quiere que siempre se emita un sonido con la correspondiente notificación en la pantalla de bloqueo, aun cuando su controlador esté en silencio.

CANCELAR SIGUIENTE

- Revise o ajuste su configuración de glucosa baja y sus preferencias de volumen.
- Toque **SIGUIENTE**.

← Revisar ajustes

Glucosa alta
Prendido

Notificar cuando la glucosa supere este nivel
(120 mg/dL a 400 mg/dL)

240 mg/dL

Anular ajustes de volumen
Prendido

Préndalo si quiere que siempre se emita un sonido con la correspondiente notificación en la pantalla de bloqueo, aun cuando su controlador esté en silencio.

CANCELAR SIGUIENTE

- Revise o ajuste su configuración de glucosa alta y sus preferencias de volumen.
- Toque **SIGUIENTE**.

← Revisar ajustes

Faltan valores del sensor
Prendido

Cuando haya pérdida de señal o un problema con su sensor, la aplicación Omnipod 5 no podrá mostrar los valores de glucosa del sensor ni notificarle cuando su glucosa esté alta o baja.

Esta alerta le notifica cuando no se han recibido valores de glucosa del sensor durante 20 minutos.

Anular ajustes de volumen
Prendido

Préndalo si quiere que siempre se emita un sonido con la correspondiente notificación en la pantalla de bloqueo, aun cuando su controlador esté en silencio.

CANCELAR SIGUIENTE

- Revise o ajuste su configuración de valores de sensor faltantes y sus preferencias de volumen.
- Toque **SIGUIENTE**.
- Toque **GUARDAR**.

Paso 3: Aplique su sensor Libre Plus

- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Toque **CÓMO APLICAR UN SENSOR** si necesita ayuda.


Libre 2 Plus



Libre 3 Plus



Colocación del sensor

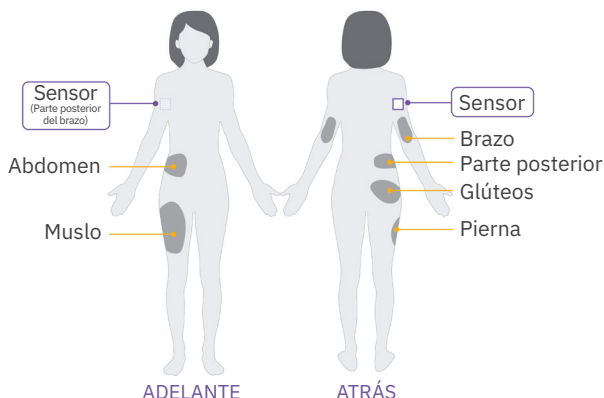

Considere estas colocaciones del Pod para encontrar las ubicaciones que funcionan mejor para su cuerpo, a fin de obtener una línea de visión óptima para su sensor:

- en el mismo brazo, a 1 pulgada (2.5 cm) de distancia;
- abdomen, del mismo lado;
- lados del abdomen, del mismo lado;
- parte posterior baja, del mismo lado;
- muslo, del mismo lado;
- glúteos superiores, del mismo lado;
- cara posterior del brazo opuesto.

Consulte las Instrucciones de uso del sensor para obtener más información sobre la colocación del sensor.

Paso 4: Escanee el sensor

Coloque la parte posterior del Controlador o el smartphone contra el sensor y escanéelo. El tercio inferior del dispositivo casi debe tocar el sensor.

Libre 2 Plus





Libre 3 Plus



Si el escaneo del sensor se completó correctamente, toque **OK**. Cuando se le solicite, puede cambiar a Modo Automatizado.

El Pod y el sensor se conectarán en 20 minutos.

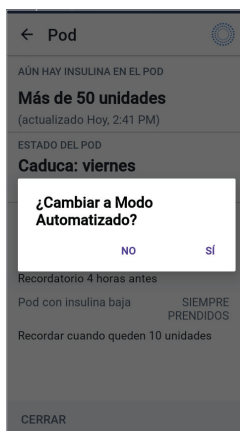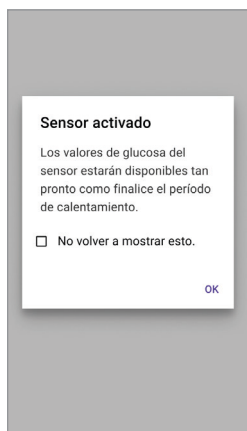


Cambio entre tipos de sensores

El sistema Omnipod 5 es compatible con más de una marca y modelo de sensor. Si inicia el sistema con un tipo de sensor y cambia a otro diferente en el futuro, puede cambiar su tipo de sensor desde la pantalla Manejar el sensor.

Nota: Los cambios regulares del sensor no requieren un cambio de Pod, pero si está cambiando de una marca o modelo de sensor a otro, debe cambiar entre los cambios de Pod. Cada Pod puede conectarse a solo un tipo de sensor.

Paso 1: Sin un Pod activo, toque **Cambiar >** desde la pantalla **Manejar el sensor**.

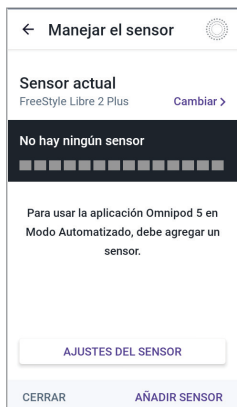

- Para cambiar de un sensor Libre Plus a otra marca o modelo de sensor, toque **Cambiar >**.



- Para cambiar de un sensor Dexcom a otra marca o modelo de sensor, toque **Cambiar >**.

Paso 2: Seleccione la marca y el modelo del sensor nuevo, confirme su nueva selección y siga las instrucciones de las páginas anteriores para la configuración inicial de un sensor. Compruebe el estado de la tapa de la bandeja del Pod para ver si el Pod y el sensor son compatibles.



Configure un nuevo Pod

Preparación

Reúna los siguientes suministros:

- Controlador del Omnipod 5 o smartphone;
- Pod de Omnipod 5 sin abrir;
- toallitas de alcohol;
- un vial de insulina U-100 de acción rápida a temperatura ambiente cuyo uso con Omnipod 5 esté aprobado.

Lávese las manos con agua y jabón.

Limpie la parte superior del vial de insulina usando una toallita de alcohol.

En la Aplicación Omnipod 5, localice la pantalla de activación de Pod



O BIEN



- Después de la configuración inicial, toque **CONFIGURAR NUEVO POD**.

- En la pestaña **INFORMACIÓN DEL POD** de la pantalla de inicio, toque **CONFIGURAR NUEVO POD**.


Llene el Pod

Prepare la jeringa de llenado

- Quite la aguja y jeringa de llenado de la bandeja del Pod. Mantenga el Pod en la bandeja durante la configuración. Gire la aguja hacia la derecha en la parte superior de la jeringa para fijarla de modo seguro. No use ningún otro tipo de aguja o dispositivo de llenado que no sea la jeringa proporcionada con cada Pod.
- Retire la tapa protectora para la aguja tirando cuidadosamente en línea recta para separarla de la aguja.


Llene la jeringa

- Tire del émbolo de la jeringa para llenarla con una cantidad de aire igual a la cantidad de insulina que usará. Debe llenar la jeringa al menos con 85 unidades de insulina (línea de llenado MÍN). Inserte la aguja en el vial y empuje el émbolo para poner el aire.
- Con la jeringa todavía en el vial, invierta el vial y la jeringa. Tire lentamente del émbolo para extraer la insulina. Dé unos golpecitos o sacuda la jeringa para quitar las burbujas que haya.

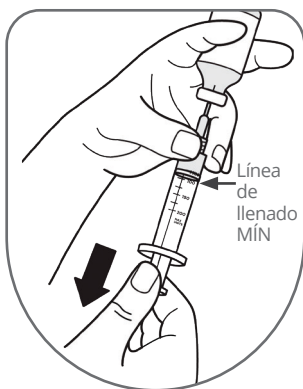


Llene el Pod

- Retire la aguja del vial e insértela directamente en el puerto de llenado. Una flecha en el respaldo de papel blanco apunta al puerto de llenado. Empuje lentamente el émbolo hacia abajo para llenar completamente el Pod.
- El Pod emitirá dos pitidos para indicar que el Pod de Omnipod 5 está listo para proceder.

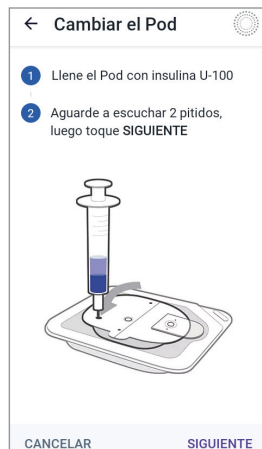


Active el Pod de Omnipod 5

- Con el Pod todavía en la bandeja, colóquelo de modo que esté en contacto con el Controlador para garantizar la comunicación adecuada. Toque **SIGUIENTE** en el Controlador. El sistema realizará una serie de controles de seguridad y preparará automáticamente el Pod.

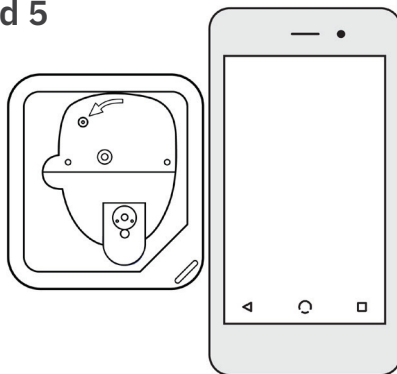


Colocación del Pod

Adultos y niños

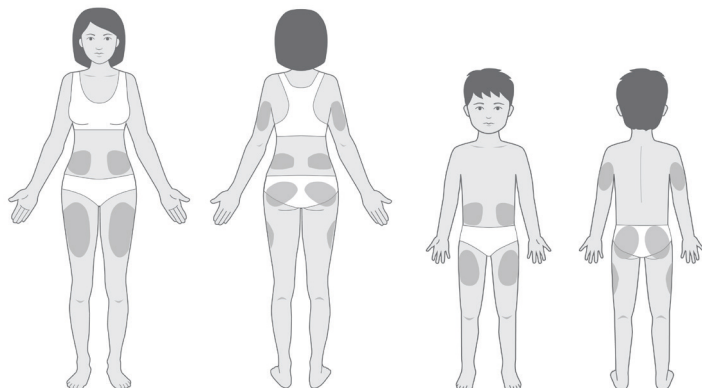

Colocación del sensor

El Pod y el sensor se deben usar en una línea de visión, es decir, en el mismo lado del cuerpo para que los dos dispositivos se puedan “ver” entre sí, sin que el cuerpo bloquee su comunicación. Se muestran ejemplos de varias ubicaciones de los sensores de abdomen y brazo.

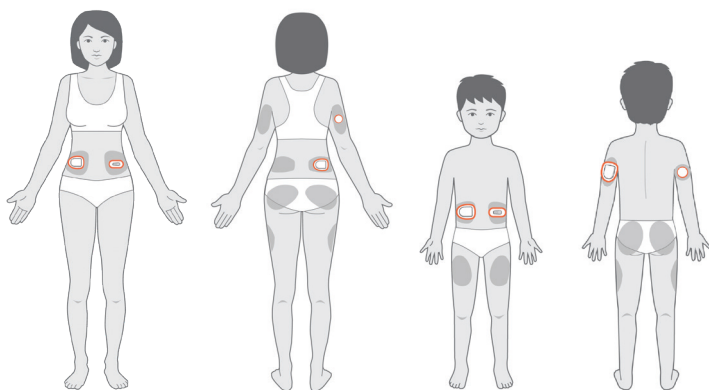

Pautas para la selección del sitio del Pod

Coloque el Pod y el sensor como se indica en las instrucciones de uso del sensor compatible:

- a al menos 3 pulgadas (8 cm) de distancia para su sensor Dexcom;
- a al menos 1 pulgada (2.5 cm) de distancia para su sensor Libre Plus.
- Colóquelo dentro de la línea de visión del sensor para obtener la mejor conectividad.

Nota: La línea de visión significa que el Pod y el sensor están desgastados en el lado del cuerpo de manera que los dos dispositivos puedan “verse” entre sí sin que su cuerpo bloquee su comunicación.

- Los sitios ideales tienen una capa de tejido graso.
- Los sitios ideales ofrecen fácil acceso y visualización.
- El sitio debe estar al menos a 1 pulgada (2.5 cm) del sitio usado con el Pod previo, para evitar la irritación de la piel.
- El sitio debe estar al menos a 2 pulgadas (5 cm) de distancia del ombligo.
- Evite los sitios donde el cinturón o la ropa ajustada puedan rozar contra el Pod o desprenderlo.
- Evite los sitios donde el Pod se vea afectado por los pliegues de la piel.
- Evite colocar el Pod sobre un lunar, tatuaje o cicatriz, donde podría reducir la absorción de insulina.
- Evite las áreas de la piel con infección activa.

Aplique el Pod

El Pod está ahora listo para su aplicación e inserción.

- Siga cuidadosamente las instrucciones mostradas en la pantalla.
- Compruebe el sitio de infusión después de la inserción, para asegurarse de que se insertó correctamente la cánula.




Cómo cambiar el Pod



- Toque **INFORMACIÓN DEL POD.**



- Toque **VER DETALLES DEL POD.**

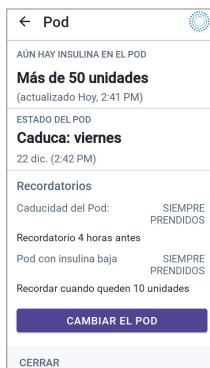

- Toque **CAMBIAR EL POD.**
- Toque **DESACTIVAR POD.**

Después de desactivar el Pod, levante suavemente los bordes de la pestaña adhesiva de la piel y quite el Pod.

Consejo: Quite el Pod lentamente para ayudar a evitar una posible irritación de la piel.

Después de haber desactivado y quitado el Pod anterior, siga las instrucciones sobre cómo Activar un Pod de esta guía.

NO aplique un nuevo Pod hasta que haya desactivado y quitado el Pod viejo.

Es posible que deba cambiar el Pod:

- cuando el Pod tiene poca insulina o está vacío, o si el Pod está a punto de caducar o ya caducó;
- en respuesta a una alarma;
- si el Pod o la cánula se han desprendido;
- si tiene un nivel de glucosa de 250 mg/dL o más y hay cetonas presentes;
- si tiene glucosa elevada;
- de acuerdo con las indicaciones de su proveedor de atención médica;
- si, durante la activación, el Pod no emite un pitido.

Modos del sistema Omnipod 5

Modos del sistema

El sistema Omnipod 5 tiene dos modos de funcionamiento: Modo Automatizado y Modo Manual.



Modo Automatizado

- Se ajusta cada 5 minutos.
- Se adapta actualizando su Insulina Diaria Total con cada cambio de Pod.



Modo Manual

- Usa su Programa Basal.

Estados del sistema



Modo Automatizado: Limitado

- El Pod no recibe los valores de glucosa del sensor.
- El sistema compara constantemente la tasa adaptativa automatizada y el Programa Basal manual, y usa el que sea más bajo.



No hay comunicación con el Pod

- Se desconoce el estado del Pod.
- Acerque el Controlador o el smartphone al Pod.

	Modo Manual	Modo Automatizado
Cómo funciona		
Administración de insulina basal	La insulina se administra de acuerdo con el Programa Basal activo.	La insulina se administra y ajusta automáticamente según los valores de glucosa del sensor y la predicción de 60 minutos. Cuando los valores de glucosa del sensor no están disponibles para ajustes, en Modo Automatizado: Limitado, el sistema compara constantemente la tasa adaptativa automatizada con el programa basal manual, y usa el que sea más bajo.
Administración de insulina en bolo	La insulina se administra mediante la Calculadora SmartBolus o se ingresa manualmente.	La insulina se administra mediante la Calculadora SmartBolus o se ingresa manualmente.
Sensor conectado	No se requiere. Si está conectado, se muestran los valores de glucosa del sensor, se almacenan en el historial y están disponibles para su uso en la Calculadora SmartBolus.	Se requiere. Se usan, muestran y almacenan en el historial los valores de glucosa del sensor para la administración de insulina automatizada y también están disponibles para usarlos en la Calculadora SmartBolus.

	Modo Manual	Modo Automatizado
Lo que puede hacer		
Programas basales	Edite, active y cree nuevos Programas Basales. No afecta al Modo Automatizado.	Edite la Glucosa Objetivo para modificar la administración de insulina automatizada. No es posible modificar los programas basales en el Modo Automatizado.
Administración de insulina basal	Inicie y cancele la tasa Basal Temporal.	Inicie y cancele la función de Actividad.
Ajustes de la calculadora de bolo	Edite los ajustes de bolo.	Edite los ajustes de bolo.
Administración de insulina en bolo	Administre y cancele bolos inmediatos y extendidos.	Administre y cancele bolos inmediatos.
Cambios de Pod	Activar y desactivar los Pod.	Desactivar los Pod. Cuando se desactiva un Pod, el sistema cambia al Modo Manual. Después de activar un nuevo Pod, se le pedirá que cambie al Modo Automatizado.
Manejar el sensor	Vea y modifique el número de serie del Transmisor Dexcom G6 o el código de emparejamiento y número de serie del Dexcom G7. Cambie entre las marcas y los modelos del sensor (entre cambios de Pod). Inicie o elimine un sensor Libre 2 Plus o Libre 3 Plus, vea la duración del desgaste y configure las alarmas.	Vea el número de serie del Transmisor Dexcom G6 o el código de emparejamiento y número de serie del Dexcom G7. Vea la duración del desgaste del sensor Libre 2 Plus o Libre 3 Plus y configure las alarmas.


	Modo Manual	Modo Automatizado
Lo que puede hacer		
Pausar e iniciar la insulina	Pausar manualmente la insulina por una duración específica de hasta 2 horas. Iniciar manualmente la insulina.	El sistema pausa automáticamente la administración de insulina automatizada en función del valor/la predicción de glucosa del sensor. Cambiar a Modo Manual para pausar manualmente la administración de insulina.
Detalles del Historial	Revisar Detalles del Historial.	Revisar Detalles del Historial. La pestaña Eventos automatizados muestra la administración de microbolos con el Modo Automatizado.
Ingresar GS	Ingresar las medidas de glucosa en sangre para guardar en los Detalles del Historial.	Ingresar las medidas de glucosa en sangre para guardar en los Detalles del Historial.
Cómo se le notificará	Consulte una lista detallada de alarmas y notificaciones en las secciones 2 y 5 de la <i>Guía técnica del usuario del sistema Omnipod 5</i> .	

Nota: En el Modo Automatizado, se actualizará la frecuencia adaptativa con cada cambio de pod. La tasa adaptativa es una línea de base continua que el sistema puede aumentar o reducir cada 5 minutos en respuesta a los valores de glucosa del sensor.


Con su primer Pod, dado que el sistema todavía no tiene el historial, la Insulina Diaria Total y la tasa adaptativa inicial se calculan a partir del programa basal que ingresó durante la configuración.

Cambiar al Modo Automatizado

En Modo Automatizado, la administración de insulina se ajusta en función de los valores de glucosa del sensor.

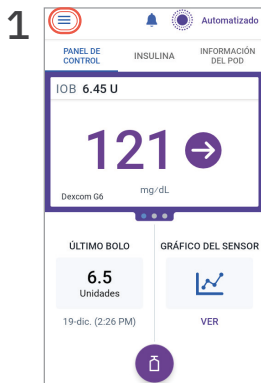


- Toque el botón de menú en la pantalla de inicio.

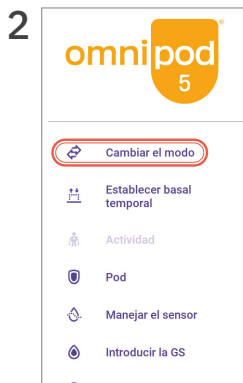

- Toque **Cambiar el modo**.




- Toque **CAMBIAR**.
- Se requiere un Pod activo y la información guardada del sensor en la Aplicación Omnipod 5.

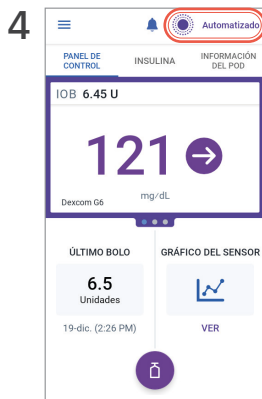

- Confirme que el modo cambió. Se debe indicar Automatizado en la parte superior derecha de la pantalla.

Nota: Antes de cambiar a Modo Automatizado, primero se debe cancelar el Basal Temporal activo, el Bolo Extendido o la opción pausar insulina.

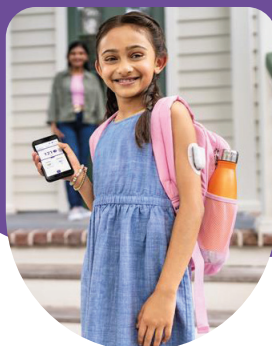

Consejos para tener éxito

Lo bueno toma tiempo

- Puede empezar a usar el Modo Automatizado con su primer Pod.
- Omnipod 5 ajusta la cantidad de insulina que su Pod administra cada 5 minutos.
- Con el tiempo y con cada cambio de Pod, Omnipod 5 se adapta para satisfacer mejor sus necesidades de insulina.
- La optimización de su administración de insulina podría llevar desde unos días hasta algunas semanas, según su tratamiento anterior, los ajustes iniciales y su Insulina Diaria Total administrada.

Explicación del Modo Automatizado

El algoritmo de Omnipod 5 predice cuál será su nivel de glucosa dentro de 60 minutos. Si se prevé que su glucosa estará por debajo o por encima de su ajuste de Glucosa Objetivo en los próximos 60 minutos, es posible que vea que el sistema pausa o aumenta la insulina. El sistema también podría pausar o reducir la insulina para proteger contra la hipoglucemia o corregir la hiperglucemia.

Para ver lo que está haciendo el sistema:

- Revise el gráfico del sensor: Una barra roja muestra cuando la insulina se ha pausado por completo. Aparece una barra naranja cuando el sistema ha alcanzado su administración máxima de insulina.
- Marque la pestaña de Eventos automatizados en Detalle del Historial: esta pestaña muestra toda la insulina automatizada, tanto su tasa adaptativa de línea de base como cualquier ajuste hacia arriba o hacia abajo debido al valor y tendencias del sensor o la predicción de 60 minutos.

Ayude a que su Pod y el sensor se mantengan conectados

Omnipod 5 está diseñado para funcionar en Modo Automatizado incluso si ocasionalmente el Pod no tiene valores de glucosa del sensor. Si observa que a Omnipod 5 le faltan los valores del sensor, pero aún está en el Modo Automatizado, significa que el Pod ha recibido los valores de glucosa del sensor en los últimos 20 minutos.

Sin embargo, si observa que Omnipod 5 está en Modo Automatizado: Limitado con frecuencia, esto podría significar que el sensor y el Pod tienen problemas de comunicación. La próxima vez que cambie el Pod o el sensor, intente colocarlos en el mismo lado del cuerpo, de forma tal que los dos dispositivos se puedan “ver” entre sí (en la línea de visión) sin que el cuerpo bloquee su comunicación.

Si utiliza un sensor Dexcom, también puede comprobar su dispositivo de pantalla Dexcom para ver si los valores de glucosa del sensor están disponibles. Confirme que el NS del Transmisor Dexcom G6 o el código de emparejamiento y número de serie del Dexcom G7 coincidan con la información guardada en su Aplicación Omnipod 5.

Cómo manejar los niveles de glucosa altos y bajos

Puede haber momentos en los que tenga la glucosa alta o baja.

- Póngase bolos de corrección para reducir la glucosa alta. De esta manera, ayudará a que el sistema entienda sus necesidades de Insulina Diaria Total. Trate de no anular las sugerencias del sistema.
- Utilice la Calculadora SmartBolus siempre que coma. Ingrese los gramos de carbohidratos y toque USAR SENSOR para calcular una dosis según el valor actual del sensor, la tendencia y la Insulina activa.

Hable con su proveedor de atención médica acerca de lo siguiente:

Tratamiento de los niveles bajos	Algunas personas descubren que necesitan usar menos carbohidratos para tratar los niveles bajos debido a que el sistema ha estado disminuyendo la insulina a medida que bajan los niveles de glucosa.
Cómo sincronizar los bolos de comida	La administración de insulina entre 15 y 20 minutos antes de comer podría ayudar si tiene la glucosa alta después de comer.
Cómo ajustar la Glucosa Objetivo	Disminuir la Glucosa Objetivo puede ayudar al sistema a administrar insulina de manera más automatizada. La Glucosa Objetivo es el único ajuste que puede modificar para afectar directamente en la administración de insulina automatizada. Hacer cambios en los ajustes basales (como su Programa Basal o Basal Máximo) solo afectará a la administración de insulina basal en el Modo Manual.
Cómo ajustar los ajustes de bolo	Si nota una glucosa alta después de comer, quizá necesite reforzar su Proporción de Insulina a Carbohidratos para poner más insulina para la comida que ingiere. Otros ajustes del bolo incluyen la Glucosa Objetivo, el Factor de Corrección, la Duración de la Acción de la Insulina y la Corrección Inversa. Los bolos afectan su Insulina Diaria Total. La administración de bolos para las comidas y reducir la glucosa alta ayudará a su sistema a aprender sus necesidades de insulina a medida que se adapta con el paso del tiempo.

Para obtener más información sobre el tratamiento de la glucosa alta y baja, y el manejo los días cuando está enfermo, consulte *Información de seguridad importante del Sistema Automatizado de Administración de Insulina Omnipod 5*.

Conozca la Aplicación

Pantalla de Inicio de la Aplicación Omnipod 5



Tendencias e indicadores de glucosa



Automatizado



Manual

CLAVE DE COLORES DEL VALOR DE GLUCOSA DEL SENSOR:

El valor de glucosa del sensor y la flecha de tendencia cambiarán de color según su Rango del Objetivo de Glucosa.

121 →

Tendencia continua

121 →

Tendencia continua

68 ↓

Reducción rápida

258 ↗

Incremento lento

Valor de glucosa del sensor dentro del Rango del Objetivo de Glucosa (Modo Manual)

Valor de glucosa del sensor dentro del Rango del Objetivo de Glucosa (Modo Automatizado)

Valor de glucosa del sensor por debajo del Rango del Objetivo de Glucosa (Modos Automatizado y Manual)


Valor de glucosa del sensor por encima del Rango del Objetivo de Glucosa (Modos Automatizado y Manual)

Nota: No se mostrará un valor de glucosa del sensor si se encuentra en el estado Limitado o No hay comunicación con el Pod.


Ver el gráfico del sensor



- Toque **VER** en el gráfico del sensor.

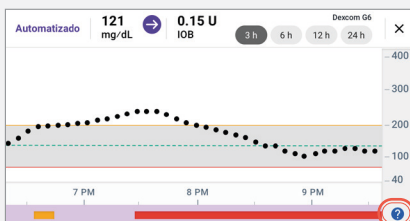

- Toque el icono del signo de interrogación para ver la leyenda del gráfico.

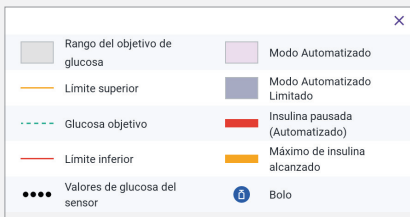

- Leyenda del gráfico del sensor.

Nota: El gráfico del sensor difiere ligeramente en apariencia según el modo.

Alarmas y notificaciones

El sistema Omnipod 5 genera diferentes tipos de alarmas y notificaciones. Las alarmas se repiten cada 15 minutos hasta que las reconozca. Debe reconocer las alarmas que suenan en el Pod en la Aplicación Omnipod 5.

Alarmas de Peligro

Las Alarmas de Peligro son alarmas de alta prioridad que indican que se ha producido un problema grave y es posible que deba quitar el Pod.

Alarmas de Peligro relacionadas con la Aplicación

Error de la Aplicación Omnipod 5	El sistema detectó un error con la Aplicación. El Controlador puede reiniciarse.
Corrupción de memoria de la Aplicación Omnipod 5	El sistema detectó un error con la Aplicación. El Controlador se reiniciará. Se eliminarán todos los ajustes. Quite el Pod.
Error del sistema	El sistema detectó un error con la Aplicación. Quite el Pod.

Alarmas de Peligro relacionadas con el Pod

Bloqueo detectado	El sistema detectó un bloqueo (oclusión) en la cánula del Pod. La administración de insulina se ha detenido. Quite el Pod.
Error del Pod	El sistema detectó un error del Pod. La administración de insulina se ha detenido. Quite el Pod.
Pod caducado	El Pod ha llegado al final de su vida útil. La administración de insulina se ha detenido. Quite el Pod.
Pod sin insulina	El Pod está vacío. La administración de insulina se ha detenido. Quite el Pod.
Apagado del Pod	El Pod dejó de administrar insulina porque usted configuró un tiempo de apagado del Pod y no respondió a la Alarma de Advertencia de apagado del Pod. La administración de insulina se ha detenido. Quite el Pod.

Alarmas de Advertencia

Las Alarmas de Advertencia son de prioridad baja, lo que indica que hay un problema y requiere su atención. Las Alarmas de Advertencia pueden escalar a una Alarma de Peligro.

Alarmas de Advertencia relacionadas con el Pod

Pod con insulina baja	La cantidad de insulina en el Pod esté por debajo del valor que usted especificó en Ajustes. Si la ignora, se convierte en Alarma de Peligro de Pod sin insulina. Cambie el Pod pronto.
Pod caducado	El Pod ha caducado y dejará de administrar insulina pronto. Sonará una vez por hora hasta convertirse en Alarma de Peligro de Pod caducado. Cambie el Pod pronto.
Apagado del Pod	El Pod dejará de administrar insulina pronto debido a la hora de apagado del Pod que usted especificó en Ajustes. Toque OK para reconocer y evitar que se convierta en Alarma de Peligro de apagado del Pod.
Iniciar la insulina	Finalizó el período que usted especificó para pausar la insulina. Toque INICIAR LA INSULINA para reiniciar la insulina y evitar la hiperglucemia.

Alarma de Advertencia relacionada con glucosa

Glucosa baja urgente	Su valor de glucosa del sensor es 55 mg/dL o por debajo de este. Considere comer carbohidratos de acción rápida para tratar la hipoglucemia.
----------------------	--

Alarmas de Advertencia relacionadas con el Modo Automatizado

Faltan los valores del sensor	En el Modo Automatizado, el Pod no ha recibido valores de glucosa del sensor durante una hora. El sistema funcionará en Automatizado: Limitado hasta que se reciban nuevos valores.
Revise la glucosa en sangre	En el Modo Automatizado, el sistema ha estado trabajando para llevar la glucosa al rango; pero no ha visto que su glucosa cambie de la manera esperada. Esta alarma puede hacerle saber que debe intervenir y comprobar su sensor, su Pod y su glucosa. Si la medida de la glucosa del sensor ha sido baja y el sistema ha pausado la insulina por demasiado tiempo, el sistema pasará al Modo Automatizado: Limitado hasta que acepte la alarma.
Restricción de entrega automatizada	En el Modo Automatizado, el sistema ha estado trabajando para llevar la glucosa al rango; pero no ha visto que su glucosa cambie de la manera esperada. Esta alarma puede hacerle saber que debe intervenir y comprobar su sensor, su Pod y su glucosa. Cambie a Modo Manual durante 5 minutos o más para reconocer esta alarma.

En función de la versión de software de su Pod, es posible que aparezca la alarma Revise la glucosa en sangre o la alarma Restricción de entrega automatizada.

Alarmas opcionales y ajustables relacionadas con los sensores Libre Plus

Glucosa alta	Su valor de glucosa del sensor está por encima de su ajuste de glucosa alta. La alarma opcional se repetirá cada 5 minutos hasta que la glucosa esté por debajo del ajuste o hasta que reconozca la notificación.
Glucosa baja	El valor de glucosa del sensor se encuentra por debajo del ajuste de glucosa baja. La alarma opcional se repetirá cada 5 minutos hasta que la glucosa esté por encima del ajuste o hasta que reconozca la notificación.
Faltan los valores del sensor	No se han recibido los valores de glucosa del sensor por 20 minutos. La alarma opcional se repetirá cada 5 minutos, hasta 5 veces, hasta que los valores de glucosa del sensor vuelvan o hasta que reconozca la notificación.

Mensajes de problemas relacionados con los sensores Libre Plus

Sensor demasiado frío	Su sensor está demasiado frío como para proporcionar un valor de glucosa. Muévase a una ubicación más cálida.
Sensor demasiado caliente	Su sensor está demasiado caliente como para proporcionar un valor de glucosa. Muévase a una ubicación más fría.
Problema temporal del sensor	Su sensor no puede enviar temporalmente los valores de glucosa del sensor al Pod o a la Aplicación Omnipod 5. Vuelva a comprobarlos en 10 minutos.
Error del sensor	El sensor de glucosa no está disponible. Se produce al principio del uso del sensor cuando los valores no se pueden confirmar como precisos. Toque Ayuda .
Sensor finalizado	Su sensor ha finalizado. Reemplace su sensor.
No hay ningún sensor.	No se detecta ningún sensor. Para utilizar el sistema Omnipod 5 en el Modo Automatizado, debe agregar un sensor y tener un Pod activo prendido.
Reemplazar sensor	El sistema ha detectado un problema con el sensor que no se puede solucionar. Reemplace su sensor.
No se pudo conectar	El sensor no se conectó al Pod. Vuelva a intentarlo.

Notificaciones

Las notificaciones del punto de acción son para actividades técnicas del sistema que requieren su atención, como los ajustes o actualizaciones de la Aplicación. Las notificaciones de Recordatorio se relacionan con las acciones de manejo de la diabetes que quizá desee realizar.

Acciones clave de administración de insulina

Administrar un bolo




Automatizado




Manual

Nota: El botón USAR SENSOR está activo solo cuando el Omnipod 5 está recibiendo valores y tendencia de glucosa del sensor


Nota: El Bolo Extendido está disponible solo en el Modo Manual.

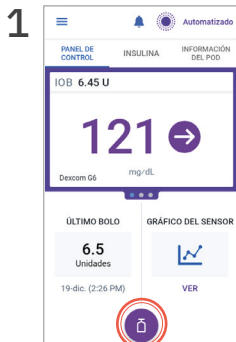


- Toque el botón Bolo en la pantalla de inicio.

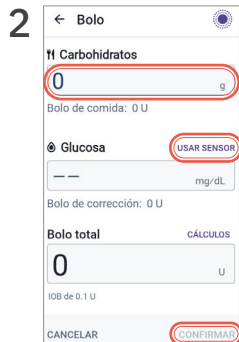

- Toque el campo Carbohidratos para ingresar los carbohidratos en forma manual.
- Toque **USAR SENSOR** para usar el valor de glucosa del sensor y la tendencia o agregue una medida de glucosa en sangre tocando el campo Glucosa.
- Toque **CONFIRMAR**.

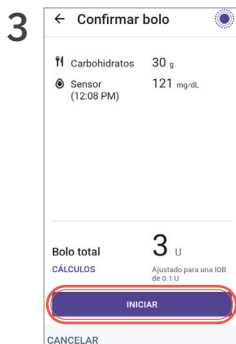

- Revise que ingresó la información correctamente.
- Toque **INICIAR** para comenzar la administración de insulina en bolo.

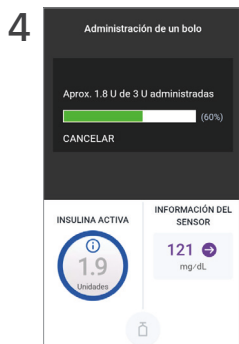

- La pantalla de inicio mostrará el progreso de la administración del bolo.
- Para cancelar un bolo en curso, toque **CANCELAR**.

Las pantallas de la Aplicación Omnipod 5 son solo para fines educativos. Consulte con su proveedor de atención médica antes de usar estas funciones y para obtener recomendaciones personalizadas.



Nota:


Administre siempre el bolo para las comidas como indique su proveedor de atención médica. En el Modo Automatizado, las dosis en bolo siguen requiriendo que las programe y las administre. La falta de administración de un bolo para las comidas podría provocar hiperglucemia.

Alimentos Personalizados

Omnipod 5 permite guardar la información de carbohidratos sobre ciertos alimentos sobre ciertos aperitivos, comidas o alimentos favoritos (Alimentos Personalizados) que consume con frecuencia.


Para crear o editar un Alimento Personalizado, toque Alimentos Personalizados en el menú.

1

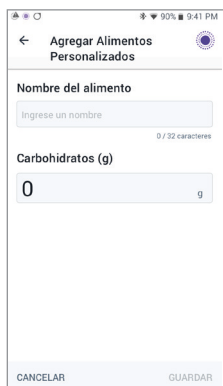


- Toque **AGREGAR**.
- Ingrese un nombre y toque **Listo**.
- Ingrese un conteo de carbohidratos y toque **Listo**.
- Toque **GUARDAR**.

2

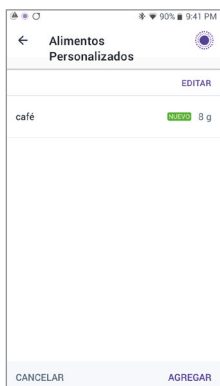

- Aparecerá una insignia verde que dice **NUEVO** junto al nuevo elemento ingresado.

3

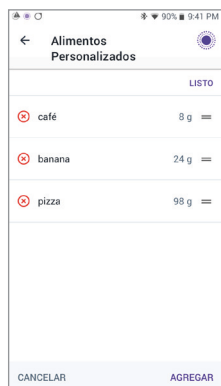

- Toque **EDITAR** para editar la lista. Puede arrastrar los elementos para reordenarlos, eliminarlos o tocarlos para editarlos.

Para utilizar Alimentos Personalizados para un bolo, toque Alimentos Personalizados en la pantalla de la Calculadora SmartBolus.

Durante un bolo, puede ordenar los alimentos utilizando los botones de flecha hacia arriba y flecha hacia abajo y agregarlos a su bolo.

← Bolo

Carbohidratos

0 g

Bolo de comida: 0 U

Glucosa USAR SENSOR

— mg/dL

Bolo de corrección: 0 U

Bolo total CÁLCULOS

0 U

IOB de 3 U

CANCELAR CONFIRMAR

← Alimentos Personalizados

Seleccione alimentos personalizados para agregar

☒	café	9 g
☒	banana	24 g
☐	pizza	98 g

Total: 32 g
2 elementos seleccionados

CANCELAR AGREGAR

- Puede elegir qué alimentos agregar a su cálculo. Toque **AGREGAR**.

Iniciar la función de Actividad




Automatizado


Nota: La función de Actividad está disponible solo en Modo Automatizado.

La función de Actividad del sistema Omnipod 5 se puede activar para momentos en los que puede haber una reducción en las necesidades de insulina, como el ejercicio. Establecerá la Glucosa Objetivo del Modo Automatizado en 150 mg/dL y reducirá la administración de insulina.

Nota: La función de Actividad no cambia la Glucosa Objetivo utilizada en los cálculos del bolo.

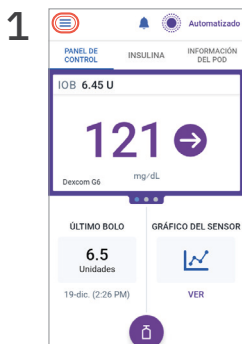


- Toque el botón de menú en la pantalla de inicio.

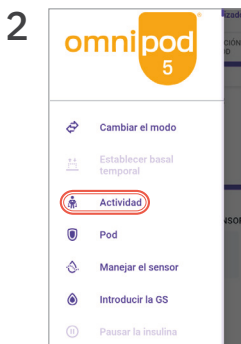

- Toque **Actividad**.




- Establezca la duración (1 a 24 horas).
- Toque **CONFIRMAR**.

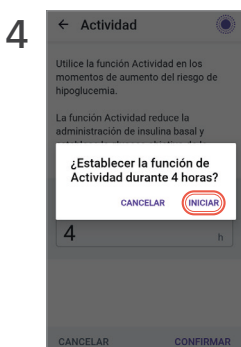

- Toque **INICIAR**.

Las pantallas de la Aplicación Omnipod 5 son solo para fines educativos. Consulte con su proveedor de atención médica antes de usar estas funciones y para obtener recomendaciones personalizadas.

5

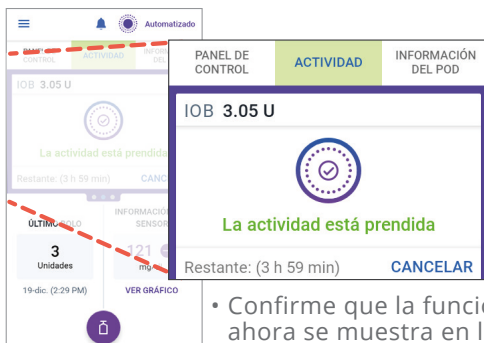

- Confirme que la función de Actividad ahora se muestra en la pantalla de inicio.


Cancelar la función de Actividad



Automatizado


Usted puede cancelar en cualquier momento la función de Actividad. Tras la cancelación o la caducidad del período definido, la administración basal totalmente automatizada empieza por sí sola y el sistema Omnipod 5 vuelve a utilizar la Glucosa Objetivo definida por el usuario.

1

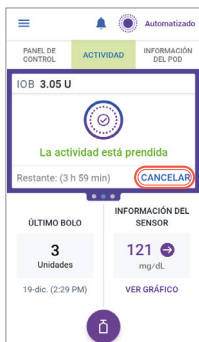

- Toque **CANCELAR** en la pestaña ACTIVIDAD.

2

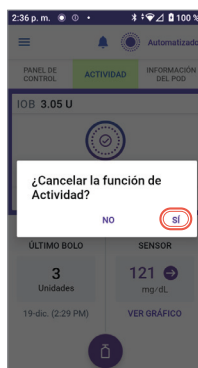


- Toque **SÍ**.


Pausar la administración de insulina



- Toque el botón de menú en la pantalla de inicio.

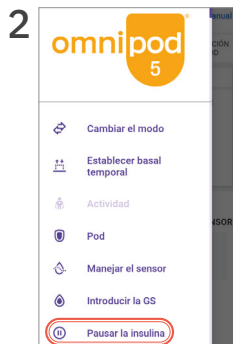


- Toque **Pausar la insulina**.

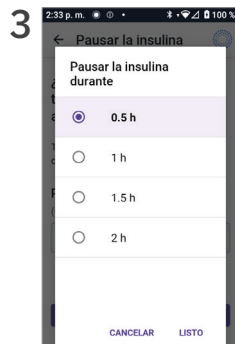


- Use la rueda de desplazamiento para decirle al sistema por cuánto tiempo desea pausar la insulina.


Iniciar la administración de insulina

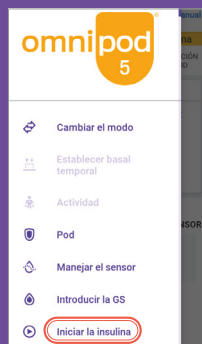

- Toque **Iniciar la insulina**.
- Siga las instrucciones del menú para iniciar la insulina.

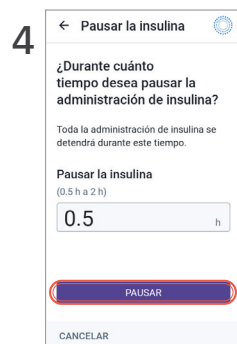

- Toque **Pausar**.

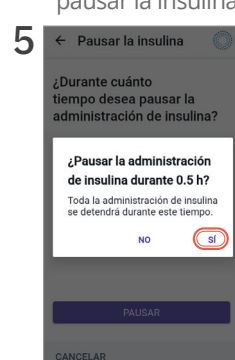

- Toque **SÍ** para confirmar la pausa de insulina.


La administración de insulina no se reanuda automáticamente al final del periodo de pausa. Debe tocar **INICIAR LA INSULINA** para iniciar la administración de insulina.

Las pantallas de la Aplicación Omnipod 5 son solo para fines educativos. Consulte con su proveedor de atención médica antes de usar estas funciones y para obtener recomendaciones personalizadas.

Editar un Programa Basal


En ocasiones, usted y su proveedor de atención médica quizá quieran actualizar su Programa Basal para reflejar mejor sus necesidades actuales de insulina.

Nota: Editar un Programa Basal NO afectará la administración de insulina en Modo Automatizado. Para editar un Programa Basal, debe estar en el Modo Manual, y los cambios tendrán efecto solo en el Modo Manual.

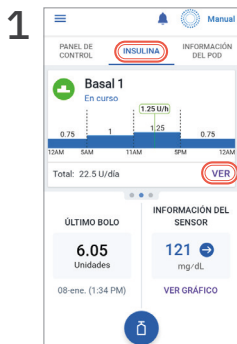


- Toque la pestaña **INSULINA** en la pantalla de inicio.


- Toque **VER**.

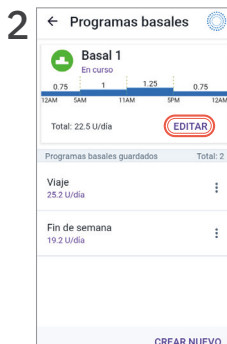

- Toque **EDITAR**.

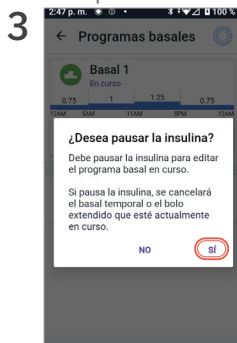


- Toque **SÍ**.

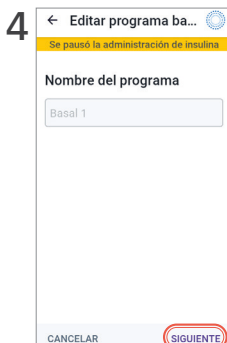

- Toque para editar el nombre del programa o toque **SIGUIENTE** para editar las tasas y los segmentos temporales basales.


Las pantallas de la Aplicación Omnipod 5 son solo para fines educativos. Consulte con su proveedor de atención médica antes de usar estas funciones y para obtener recomendaciones personalizadas.

5

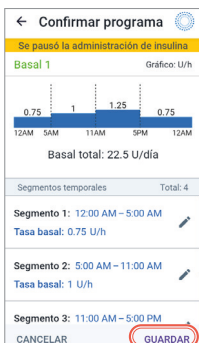

- Toque el segmento temporal para editarlo.
- Toque **GUARDAR** después de confirmar los cambios en el Programa Basal.

6

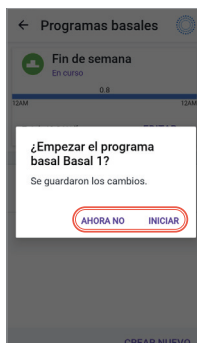

- Ahora, toque **INICIAR** para iniciar el Programa Basal. De lo contrario, toque **AHORA NO** para guardar y usar más tarde.



Programas Basales adicionales


Algunas personas tienen Programas Basales adicionales que les ayudan con las rutinas variables, como los fines de semana o los días laborables. Estos solo se pueden usar en el Modo Manual.

- Se pueden crear Programas Basales adicionales si se desplaza hasta el botón de Menú > Programas Basales y tocar **CREAR NUEVO**.
- Toque el campo de Nombre del programa para ingresar un nombre descriptivo de su nuevo Programa Basal.
- Toque **SIGUIENTE** y defina los segmentos basales uno por uno.


Establecer una tasa Basal Temporal

En ocasiones, quizá quiera cambiar temporalmente su tasa basal por enfermedad o actividad.


Nota: El Basal Temporal solo está disponible en Modo Manual.

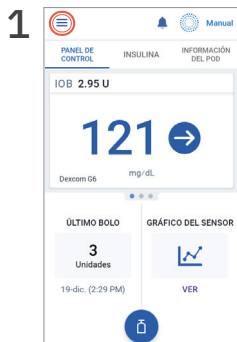


- Toque el botón de menú en la pantalla de inicio.

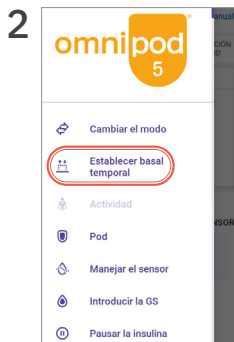

- Toque **Establecer Basal Temporal**.

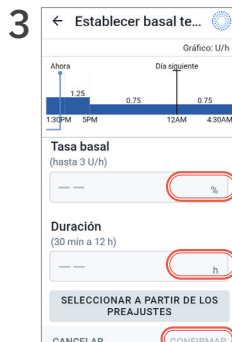

- Toque el cuadro de entrada Tasa basal y seleccione el % de cambio.

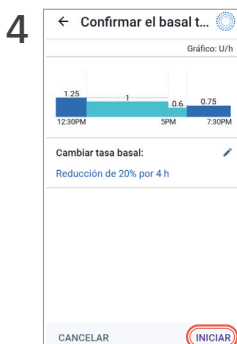

- Revise que las selecciones sean correctas y toque **INICIAR**.



- Toque **INICIAR**.

Nota: La flecha hacia arriba indica un aumento. La flecha hacia abajo indica reducción.

- Toque el cuadro de entrada **DURACIÓN** y seleccione la duración.
- Toque **CONFIRMAR**.

8 Información sobre mi Omnipod 5

[illegible]

[illegible]

Información sobre mi Omnipod 5

[illegible]

Las siguientes 3 colocaciones de mis Pod

Planifique dónde colocará sus próximos Pod. (Ejemplo: parte izquierda del abdomen, parte inferior derecha de la parte posterior)

Pod 2: _____

Pod 3: _____

Pod 4: _____

Mis Alimentos Personalizados

Registre el valor de carbohidratos para algunas de sus comidas más frecuentes. (Ejemplo: snack a la hora de acostarse: 20 gramos)

Alimentos Personalizados: _____ = _____ gramos

Alimentos Personalizados: _____ = _____ gramos

Alimentos Personalizados: _____ = _____ gramos

Alimentos Personalizados: _____ = _____ gramos


Alimentos Personalizados: _____ = _____ gramos

MIS AJUSTES INICIALES PARA LA TERAPIA CON INSULINA

Ajustes basales				
Tasa basal máxima	_____ U/h			
Programas basales	Hora de inicio	Hora de finalización	Tasa basal	
	12:00 AM	_____	_____ U/h	
	_____	_____	_____ U/h	
	_____	_____	_____ U/h	
Basal Temporal	PRENDIDO o APAGADO (rodee uno con un círculo)			
Ajustes de bolo				
Opciones de Glucosa Objetivo y Corregir Sobre	Hora de inicio	Hora de finalización	Glucosa Objetivo	Corregir sobre
	12:00 AM	_____	_____ mg/dL	_____ mg/dL
	_____	_____	_____ mg/dL	_____ mg/dL
	_____	_____	_____ mg/dL	_____ mg/dL
Proporción de Insulina a Carbohidratos (IC)	Hora de inicio	Hora de finalización	1 unidad de insulina cubre	
	12:00 AM	_____	_____ g de carb.	
	_____	_____	_____ g de carb.	
	_____	_____	_____ g de carb.	
Factor de Corrección	Hora de inicio	Hora de finalización	1 unidad de insulina reduce la glucosa en	
	12:00 AM	_____	_____ mg/dL	
	_____	_____	_____ mg/dL	
	_____	_____	_____ mg/dL	
Duración de la Acción de la Insulina		_____ horas		
Bolo Máximo	_____ Unidad			
Bolo Extendido	PRENDIDO o APAGADO (rodee uno con un círculo)			

La corrección inversa no forma parte de la configuración inicial.
(Vaya a Menú > Ajustes > Bolo)

Corrección inversa	PRENDIDA o APAGADA (rodee uno con un círculo)
--------------------	---

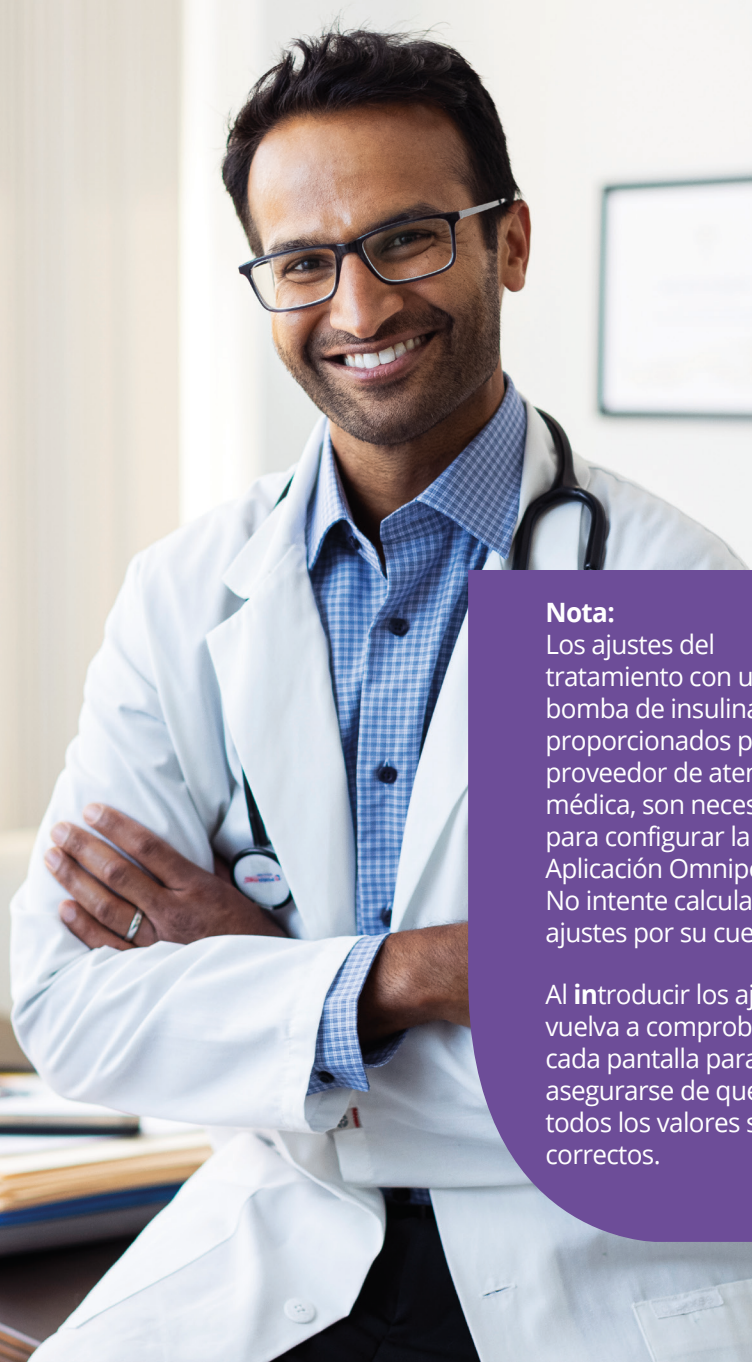

Nota:

Los ajustes del tratamiento con una bomba de insulina, proporcionados por su proveedor de atención médica, son necesarios para configurar la Aplicación Omnipod 5. No intente calcular los ajustes por su cuenta.

Al **introducir** los ajustes, vuelva a comprobar cada pantalla para asegurarse de que todos los valores sean correctos.

omnipod

5

Para obtener más información

Consulte la Guía técnica del usuario del Sistema Automatizado de Administración de Insulina Omnipod® 5



Visítenos en línea en
omnipod.com/guides



Insulet Corporation
100 Nagog Park
Acton, MA 01720
1-800-591-3455
omnipod.com

ID de la FCC del Controlador: 2ADINN5004L
ID de la FCC del Controlador: 2ADINN5004LR1

ID de la FCC del Pod: RBV-029
ID de la FCC del Pod: RBV-029C
ID de la FCC del Pod: RBV-029D
ID de la FCC del Pod: RBV-029E

© 2025-2026 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod y el logotipo de Omnipod son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Insulet Corporation. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por Insulet Corporation se efectúa con licencia. Dexcom, Dexcom G6 y Dexcom G7 son marcas comerciales registradas de Dexcom, Inc., y se utilizan con autorización. La carcasa del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott y se utilizan con permiso. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de marcas comerciales de terceros no constituye una recomendación ni implica una relación u otra afiliación.

Patent: www.insulet.com/patents

PT-003138-AW Rev. 01 01/26

REF

PDM-H001-G-XX



PT-003138