

YPSOMED YPSOPUMP MYLIFE GUIA DEL USUARIO Descargar en PDF



Tabla de contenidos

[Tabla de contenido](#)

[Nota sobre la guía del usuario](#)

[Régimen de garantía](#)

[Términos y condiciones de garantía](#)

[Indicación](#)

[Instrucciones de seguridad](#)

[Contraindicación](#) El sistema mylife TM YpsoPump [®] no es adecuado para personas

[Eliminación](#)

Vista general del sistema

Navegación

Pantalla táctil

Botón de función

Iconos

Iconos activos e inactivos

Confirmación y cancelación

Función "Atrás"

Interfaz de usuario

Desbloquear pantalla

Vista general del menú principal

Cambio de cartucho

Configuración

Modo de de infusión parada/operativo

Modos operativo y de parada

Modo operativo

Modo de parada

Pantalla de estado en modo operativo

Pantalla de estado en modo de parada

Puesta en marcha

Insertar una batería

Autocomprobación

Ajustar la hora

Ajustar la fecha

Programar el perfil de tasa basal A

Programar el perfil de tasa basal B

Alternar entre perfiles de tasa basal

Cambiar un perfil de tasa basal

Función de tasa basal temporal

Activar la función de tasa basal temporal

Cancelar la función de tasa basal temporal

Ajustar el incremento del bolo

Activar el bolo ciego

Desactivar el bolo ciego

Tipos de bolos

Bolo estándar

Bolo extendido

Bolo combinado

Bolo ciego

Programación del bolo ciego de un vistazo

Indicación del último bolo

mylife™ YpsoPump® Reservoir

Cargar el mylife™ YpsoPump® Reservoir

Desconectar el kit de infusión

Cambiar el kit de infusión

Cambiar el cartucho

Extraer el cartucho

Insertar el cartucho

Cebiar el kit de infusión

Fijar el kit de infusión al cuerpo

Cebiar la cánula

Datos de terapia

Ejemplo: bolo combinado

Posibles incidencias en los datos de terapia

Historial de alarmas

Posibles sucesos en el historial de alarmas

Cambiar la hora

Cambiar la fecha

Bloqueo de acceso

Activar el bloqueo de acceso

Desactivar el bloqueo de acceso

Girar la pantalla 180

Bluetooth

Activar Bluetooth

Desactivar Bluetooth

Emparejamiento Bluetooth

Preparativos para el almacenamiento

Batería interna recargable

Cambiar la batería

Incidencias

Agua en el compartimento del cartucho

Incidentes

Insulina en el compartimento del cartucho

Kit de infusión bloqueado (oclusión)

Suciedad en el compartimento del cartucho

Suciedad en la superficie

Advertencias mostradas

Nivel de cartucho bajo

Queda poca batería

Retracción de la varilla roscada no finalizada

Cebado no finalizado

Bolo cancelado

Función de tasa basal temporal finalizada o cancelada

Bomba de insulina parada

Error de la conexión Bluetooth

Alarmas

No hay batería

Batería vacía

Batería no apta

Cargar batería interna recargable

Oclusión

No hay insulina

Cartucho vacío

Parada automática

Error electrónico

Generalidades

Estanqueidad al agua

Viajes

Fuentes de interferencia

Deportes

Especificaciones del producto

Distancias de seguridad CEM de acuerdo con la tabla 6 de la norma EN 60601-1

Potencia nominal del transmisor en vatios

Teléfonos móviles

Precisión de administración de acuerdo con la norma EN 60601-2

Curva de arranque

Curva de trompeta

Mapa de menús

Vista general de los iconos

Ayudas de navegación/Iconos generales

Iconos del menú principal y los submenús

Iconos de alarma

Iconos de advertencia

Explicación de los símbolos

Símbolos de mylife YpsoPump

Símbolos de mylife TM YpsoPump ® Orbit ® y del mylife TM YpsoPump ®

Reservoir

Glosario

[Adaptador](#)

[Autocomprobación](#)

[Mis ajustes de bomba](#)

[Otros proyectos de ManualsLib](#)



YpsoPump®



Guía del usuario

Bomba de insulina

swissmade 



Más libertad. Más confianza. Con mylife™.

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS

Contenido

1 Introducción	7	2.5 Puesta en marcha	31
1.1 Nota sobre la guía del usuario	8	Insertar una batería	31
1.2 Régimen de garantía	8	Autocomprobación	32
1.3 Indicación	11	Ajustar la hora	35
1.4 Eliminación	11	Ajustar la fecha	36
2 Funcionamiento	12	3 Tasa basal	37
2.1 Vista general del sistema	14	3.1 Programar el perfil de tasa basal A	38
2.2 Navegación	15	3.2 Programar el perfil de tasa basal B	42
Pantalla táctil	15	3.3 Alternar entre perfiles de tasa basal	46
Botón de función	17	3.4 Cambiar un perfil de tasa basal	48
Iconos	18	3.5 Función de tasa basal temporal	50
Iconos activos e inactivos	19	Activar la función de tasa basal temporal	50
Confirmación y cancelación	20	Cancelar la función de tasa basal temporal	53
Función "Atrás"	21	4 Bolo	55
2.3 Interfaz de usuario	22	4.1 Ajustar el incremento del bolo	57
Desbloquear pantalla	22	4.2 Activar el bolo ciego	60
Vista general del menú principal	24		
2.4 Modos operativo y de parada	25		
Modo operativo	25		
Modo de parada	27		
Pantalla de estado en modo operativo	29		
Pantalla de estado en modo de parada	30		

4.3 Desactivar el bolo ciego	62	6 Datos/Historial	108
4.4 Tipos de bolos	64	6.1 Datos de terapia	108
Bolo estándar	65	Ejemplo: bolo combinado	110
Bolo extendido	67	Posibles incidencias en los datos de terapia	112
Bolo combinado	69	6.2 Historial de alarmas	114
Bolo ciego	72	Posibles sucesos en el historial de alarmas	115
Programación del bolo ciego de un vistazo	77		
4.5 Indicación del último bolo	78	7 Funciones y ajustes	116
5. Cambiar el kit de infusión y el cartucho	80	7.1 Cambiar la hora	117
5.1 mylife™ YpsoPump® Reservoir	83	7.2 Cambiar la fecha	118
Cargar el mylife™ YpsoPump® Reservoir	84	7.3 Bloqueo de acceso	119
5.2 Desconectar el kit de infusión	89	Activar el bloqueo de acceso	120
5.3 Cambiar el kit de infusión	90	Desactivar el bloqueo de acceso	122
5.4 Cambiar el cartucho	91	7.4 Girar la pantalla 180°	124
Extraer el cartucho	91	7.5 Bluetooth®	126
Insertar el cartucho	94	Activar Bluetooth®	126
5.5 Cebiar el kit de infusión	95	Desactivar Bluetooth®	128
5.6 Fijar el kit de infusión al cuerpo	99	Emparejamiento Bluetooth®	130
5.7 Cebiar la cánula	106	7.6 Preparativos para el almacenamiento	133
		7.7 Batería interna recargable	135
		7.8 Cambiar la batería	136

8 Localización y resolución de errores 140

8.1 Incidentes 142

8.2 Advertencias mostradas 147

Nivel de cartucho bajo	148
Queda poca batería	149
Retracción de la varilla roscada no finalizada	150
Cebado no finalizado	151
Bolo cancelado	152
Función de tasa basal temporal finalizada o cancelada	153
Bomba de insulina parada	154
Error de la conexión Bluetooth®	155

8.3 Alarmas 156

No hay batería	158
Batería vacía	159
Batería no apta	160
Cargar batería interna recargable	161
Oclusión	162
No hay insulina	164
Cartucho vacío	165
Parada automática	166
Error electrónico	167

9 Situaciones cotidianas 168

9.1 Generalidades 169

9.2 Estanqueidad al agua 170

9.3 Viajes 171

9.4 Fuentes de interferencia 172

9.5 Deportes 173

10 Anexo	174
10.1 Especificaciones del producto	174
10.2 Distancias de seguridad CEM de acuerdo con la tabla 6 de la norma EN 60601-1-2	176
10.3 Precisión de administración de acuerdo con la norma EN 60601-2-24	178
Curva de arranque	178
Curva de trompeta	179
10.4 Mapa de menús	180
10.5 Vista general de los iconos	182
Ayudas de navegación/Iconos generales	182
Iconos del menú principal y los submenús	183
Iconos de alarma	185
Iconos de advertencia	186
10.6 Explicación de los símbolos	187
Símbolos de mylife™ YpsoPump®	187
Símbolos de mylife™ YpsoPump® Orbit® y del mylife™ YpsoPump® Reservoir	188
10.7 Glosario	189
10.8 Mis ajustes de bomba	195



Deslice el dedo hacia arriba o abajo o toque el valor superior/inferior



Toque un campo de acción o icono



Referencia al elemento descrito en el texto



Nota o información adicional



Advertencia y precaución



Lea la guía del usuario



Ypsomed AG, 3401 Burgdorf, Switzerland
www.ypsomed.com

CE 1250

RxOnly

1 Introducción

Advertencias

- ⚠ La inobservancia de las instrucciones de la guía del usuario de la bomba mylife™ YpsoPump® o de las advertencias indicadas en esta guía del usuario puede provocar hipoglucemia e hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro inferior).
- ⚠ La bomba de insulina mylife™ YpsoPump® solo se dispensa con receta. No utilice la bomba mylife™ YpsoPump® sin haber recibido una formación previa de su médico o asesor de diabetes. La utilización de la bomba mylife™ YpsoPump® sin instrucción profesional puede llevar a una dosificación incorrecta de la insulina. Como usuario de una bomba de insulina, tiene la responsabilidad de asegurarse el acceso a medios alternativos para la inyección de insulina en todo momento (p. ej., en caso de fallar el sistema de la bomba de insulina). Para más información, consulte a su médico o asesor de diabetes.
- ⚠ Con el sistema mylife™ YpsoPump®, utilice solo insulina de acción rápida a una concentración de 100 U/ml (análogo de insulina). El uso de otra insulina puede llevar a dosificaciones incorrectas de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de abajo). Si utiliza otra insulina, cambie el cartucho y el kit de infusión cebado y prosiga el tratamiento con el tipo correcto de insulina.



Si cree que podría tener hipoglucemia o hiperglucemia, compruebe su glucemia con más frecuencia durante las próximas horas, según lo recomendado por su médico o asesor de diabetes. Adapte los ajustes de administración de insulina a las nuevas condiciones. Ante cualquier duda, póngase inmediatamente en contacto con su médico o asesor de diabetes. Compruebe su glucemia tantas veces como lo recomiende su médico o asesor de diabetes. Si no comprueba su glucemia periódicamente, no se detectarán las variaciones de la glucemia y no podrá adaptar la dosis de insulina de la bomba (p. ej., la cantidad del bolo).

1.1 Nota sobre la guía del usuario

La presente guía del usuario contiene toda la información necesaria para realizar un tratamiento seguro y correcto con la bomba de insulina mylife™ YpsoPump®. Lea detenidamente la guía del usuario completa.

Si durante el tratamiento con la bomba de insulina surgieran problemas o preguntas sobre funciones y procedimientos de control, consulte primero la guía del usuario. Si el problema persiste o no encuentra respuesta a sus preguntas después de consultar la guía del usuario, no dude en llamar al Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.

Con la forma masculina o femenina, usada por motivos de legibilidad, se hace referencia a ambos sexos.

1.2 Términos y condiciones de garantía

Garantía

Ypsomed AG le concede una garantía para la bomba mylife™ YpsoPump® que cubre defectos de fabricación y de materiales durante un período de 4 años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita de dispositivos posiblemente defectuosos, según el criterio de Ypsomed. Si la bomba mylife™ YpsoPump® se ha reparado o sustituido, el plazo de vigencia de la garantía no se amplía.

Esta garantía solo es válida si la bomba mylife™ YpsoPump® se ha utilizado de la forma prevista. Esta garantía no se aplica a defectos derivados de la utilización, el manejo o la limpieza incorrectos o descuidados, por una utilización en contra de lo especificado en esta guía del usuario o si la bomba mylife™ YpsoPump® se utiliza con accesorios o suministros distintos a los recomendados por Ypsomed.



Las instrucciones de uso de esta guía del usuario solo son válidas para el siguiente artículo de mylife™ YpsoPump® REF: 700012540.

Encontrará el número de referencia de su mylife™ YpsoPump® en la bomba o en la etiqueta del kit de inicio.

Está garantía no es válida si la bomba mylife™ YpsoPump®:

- ha sido objeto de alteraciones o modificaciones por personas ajenas a Ypsomed,
- ha sido objeto de revisiones o reparaciones por personas ajenas a Ypsomed o
- se ha dañado por desgaste natural, uso inadecuado u otros motivos ajenos a defectos de fábrica o material.

Los derechos de garantía se invalidarán si la bomba de insulina se ha dañado por una caída, golpes, aplicación de fuerza, contacto con los líquidos indicados en el capítulo 9.1, página 169, daños por agua debido a la caída de la bomba, ver capítulo 9.2, página 170, una limpieza inadecuada u otras exposiciones y desgastes derivados del uso contrario a las indicaciones de esta guía del usuario.

Esta garantía solo es válida para el primer usuario y no se puede transferir a otra persona ni entidad mediante venta, arrendamiento ni ningún otro tipo de transferencia de la bomba mylife™ YpsoPump®.

Siempre que la legislación lo permita, esta garantía y los recursos legales descritos son exclusivos y sustituyen el resto de garantías orales, escritas, jurídicas y acordadas de forma explícita o implícita, así como los recursos y condiciones jurídicos, incluida en especial la garantía de comerciabilidad y posibilidad de uso para un determinado propósito.

Procedimiento en caso de reclamación de garantía

Cualquier defecto en la bomba mylife™ YpsoPump® se deberá notificar a Ypsomed o a un centro de servicio técnico autorizado por la empresa, por escrito o por teléfono, dentro del plazo de la garantía.

La reclamación debe incluir la fecha de compra y el número de serie de la bomba mylife™ YpsoPump®, así como una descripción del defecto que ha originado la reclamación. La bomba mylife™ YpsoPump® solo se deberá devolver a Ypsomed o a un centro de servicio técnico autorizado por la empresa si Ypsomed ha dado su consentimiento previo y si la bomba está debidamente embalada. Si la reclamación está justificada, Ypsomed pagará los gastos de devolución de la bomba mylife™ YpsoPump® sujeta a esta garantía.

Oficina central:

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf
info@ypsomed.com

Centros de servicio técnico autorizados:

Ypsomed Diabetes, S.L.
Avda Madrid 95, 5º 1ª
ES-08.028 Barcelona

Atención al Cliente: 900373955
e-mail: info@ypsomed.es



Consulte las instrucciones de uso del NovoRapid® PumpCart® de Novo Nordisk para utilizarlo con el sistema mylife™ YpsoPump®.

1.3 Indicación

La bomba mylife™ YpsoPump® está destinada a la administración de insulina por vía subcutánea en el tratamiento de la diabetes mellitus. Con el sistema mylife™ YpsoPump®, utilice solo insulina de acción rápida a una concentración de 100 U/ml (análogo de insulina). El sistema mylife™ YpsoPump® está diseñado para un uso continuo durante toda su vida útil. La bomba mylife™ YpsoPump® se puede utilizar según el criterio del profesional sanitario supervisor, tras una formación apropiada y eficaz por parte de una persona cualificada (médico u otra persona cualificada). No hay límite de edad para el paciente.

Contraindicación

El sistema mylife™ YpsoPump® no es adecuado para personas:

- que no puedan realizar al menos cuatro análisis de glucemia al día.
- que no puedan mantener un contacto regular con su médico supervisor.
- que no vean u oigan lo suficiente como para poder utilizar el sistema mylife™ YpsoPump® de acuerdo con la guía del usuario.

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente todas las instrucciones de esta guía del usuario. Utilice la bomba mylife™ YpsoPump® solo después de que su profesional sanitario le haya formado en su manejo. Si no utiliza la bomba mylife™ YpsoPump® de acuerdo con esta guía del usuario, podría estar poniendo en riesgo su salud y seguridad. En caso de duda, consulte a su médico, asesor de diabetes o al Servicio de atención al cliente. Si surgieran problemas técnicos o preguntas, consulte primero la guía del usuario. Si el problema persiste o no encuentra respuesta a sus preguntas después de consultar la guía del usuario, no dude en llamar al Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.

1.4 Eliminación

Al eliminar todos los materiales, cumpla siempre la normativa de protección medioambiental aplicable en el país en cuestión. Elimine siempre las agujas y los objetos punzocortantes, como la base de la cánula, el tubo con el adaptador y la aguja inductora del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit en un contenedor para residuos con riesgo biológico.

2 Funcionamiento


El manejo del sistema mylife™ YpsoPump® persigue la máxima comodidad posible para el usuario. Todos los procedimientos operativos son sencillos y directos. Las funciones de uso frecuente como bolo, cambio del kit de infusión o cambio del cartucho se pueden realizar de forma rápida y sencilla.

Advertencias

- ⚠ Si se confunden los iconos o se utiliza por error un icono equivocado, la insulina podría dosificarse incorrectamente. Si ha confundido un icono o ha utilizado por error el icono equivocado, consulte la función correcta en esta guía del usuario y compruebe los ajustes especificados por el médico o asesor de diabetes. Si accidentalmente ha activado la función equivocada o modificado un ajuste de la bomba de insulina, deshaga la acción como se describe en esta guía del usuario. En caso de duda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10. Si, debido a la confusión o el error, la administración de insulina se interrumpe o cambia, compruebe su glucemia con más frecuencia durante las próximas horas, según lo recomendado por su médico o asesor de diabetes. Adapte la administración de insulina a las nuevas condiciones. Ante cualquier duda, póngase inmediatamente en contacto con su médico o asesor de diabetes.
- ⚠ No exponga nunca la bomba mylife™ YpsoPump® a radiación o calor (p. ej., radiadores, llamas abiertas, luz solar directa). Lo mismo es aplicable a la insulina que utilice. Para información sobre las condiciones correctas de almacenamiento de la insulina y de funcionamiento, consulte las instrucciones de uso de la insulina que utilice.
- ⚠ Evite caídas de la bomba mylife™ YpsoPump®, no golpee nunca la bomba de insulina contra una superficie sólida (mesa, encimera, lavabo, etc.) y no utilice nunca objetos afilados (cuchillo, destornillador, lana de acero, etc.), productos químicos, disolventes o detergentes agresivos para limpiar la bomba. Si la bomba mylife™ YpsoPump® se cae, se golpea o se limpia con objetos afilados, las microgrietas o los daños visibles pueden alterar la funcionalidad y la estanqueidad al agua de la bomba de insulina. Si la bomba de insulina está dañada, no garantizará la administración correcta de insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). A fin de proteger la bomba de insulina, lleve la bomba mylife™ YpsoPump® en el bolsillo de los pantalones o en un sistema de transporte de Ypsomed.

- ⚠ No utilice nunca objetos para manejar la bomba mylife™ YpsoPump®. Podrían dañar la pantalla o el botón de función y comprometer la capacidad funcional de la bomba mylife™ YpsoPump®. Si la bomba de insulina está dañada, no se puede garantizar la administración correcta de insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Asegúrese de administrarse la insulina recomendada por su médico o asesor de diabetes y, en caso contrario, consulte al Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.
- ⚠ Con la bomba mylife™ YpsoPump® utilice solo baterías alcalinas AAA (LR03). Asegúrese de que la batería no esté dañada. Una batería dañada podría provocar un cortocircuito. Si se inserta otro tipo de batería (p. ej., de litio o recargable NiMH) o una batería dañada, no se garantizan la activación ni el funcionamiento correcto de la bomba de insulina; el tiempo anticipado de advertencia previo a la alarma “Batería vacía” (página 159) no se puede mantener con la batería descargada. Podría perjudicar la administración preajustada de insulina, con el consiguiente riesgo de hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Lleve siempre consigo una batería de repuesto.
- ⚠ Esté siempre muy atento a la autocomprobación. Si no está seguro de que la autocomprobación se haya realizado correctamente, repítala. Si hay errores durante la autocomprobación (indicación incompleta, ausencia de señal vibratoria o acústica), no utilice la bomba mylife™ YpsoPump®: las posibles advertencias o alarmas de la bomba de insulina ya no se mostrarán ni indicarán correctamente. En ese caso, póngase inmediatamente en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.
- ⚠ Tenga especial cuidado al ajustar la hora. Si se ajusta una hora incorrecta, podrían alterarse las horas del perfil de tasa basal. No cambie los ajustes sin antes consultarlo a su médico o asesor de diabetes. La programación incorrecta de la bomba de insulina podría provocar una dosificación incorrecta de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Peligro de asfixia: mantenga las tapas del compartimento de la batería fuera del alcance de los niños.



2.1 Vista general del sistema

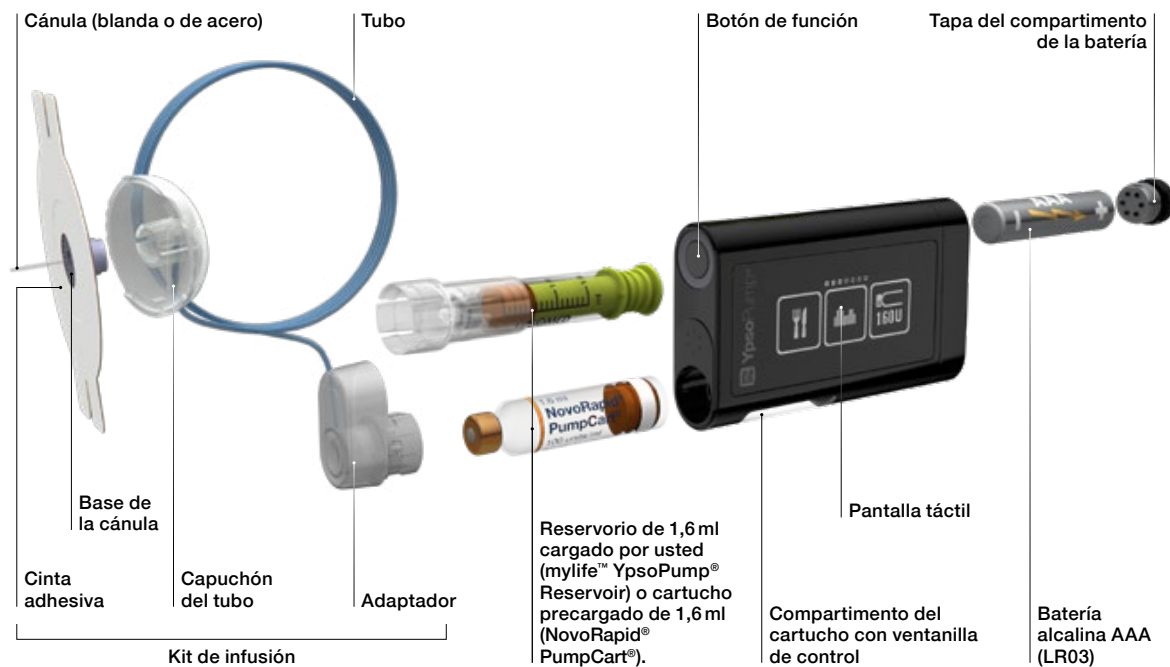


2.2 Navegación

Pantalla táctil

La bomba mylife™ YpsoPump® tiene una pantalla táctil (denominada en lo sucesivo “la pantalla”). La pantalla se controla tocando con el dedo iconos o valores, o deslizando por los menús y valores. La pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® se puede controlar con un solo dedo. No utilice objetos para manejar la pantalla.

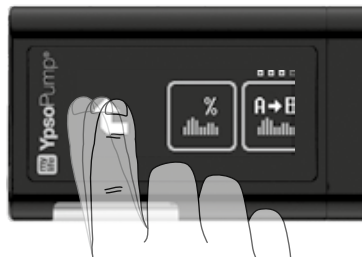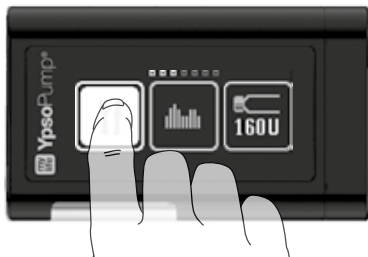

Deslícese con el dedo hacia arriba o abajo por los valores indicados. Así podrá aumentar o reducir un valor. También puede tocar directamente el valor superior o inferior para aumentarlo o reducirlo en una unidad. El valor seleccionado siempre se muestra en el centro de los valores visibles y tiene un fondo gris. No utilice el dispositivo si muestra signos visibles de daños. Deje de usar el dispositivo si ya no responde al tacto. En este caso, póngase inmediatamente en contacto con el Servicio de atención al cliente.

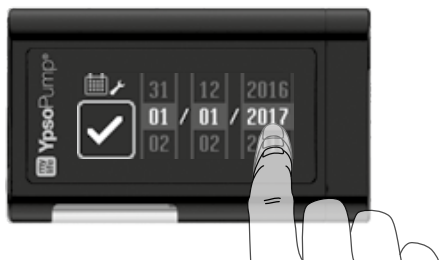

Botón de función

La bomba mylife™ YpsoPump® dispone de un botón de función. Está al lado del orificio del compartimento del cartucho, en un lateral.

El botón de función tiene dos funcionalidades distintas:

- Pulsación breve (un máximo de 0,8 segundos)
- Pulsación prolongada (al menos 2 segundos, hasta que la bomba mylife™ YpsoPump® vibre)


El botón de función le permite:

- Encender y apagar la pantalla
- Programar un bolo ciego
- Volver a la pantalla de estado




Botón de función

Iconos

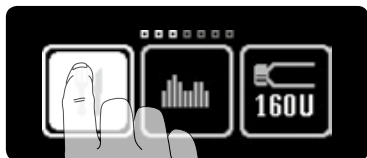

Los mandos de la pantalla se denominan “iconos”. Toque un icono con el dedo para seleccionarlo. Cuando los toque con el dedo, el brillo de los iconos se invertirá.

Iconos activos e inactivos

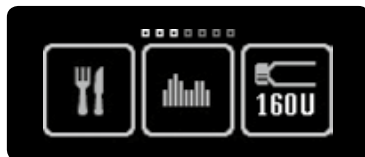

Los iconos activos brillan. Esto significa que la función está disponible y se puede seleccionar con el dedo.



Los iconos inactivos se representan en un color gris más oscuro. Significa que la función no está disponible y no se puede seleccionar con el dedo.

Confirmación y cancelación



Para confirmar un valor o seleccionar una función, toque .



Para cancelar un procedimiento o una función, toque . Además, la cancelación de un bolo siempre se debe confirmar con .

Función “Atrás”



Si ha seleccionado una función o un valor por error o ha realizado un ajuste incorrecto, puede retroceder en cualquier momento deslizando el dedo hacia la derecha hasta que aparezca  o . Si aparece , retrocederá un paso. No saldrá de la función ni se perderán los valores ajustados. Si aparece , subirá un nivel de menú.

2.3 Interfaz de usuario


Desbloquear pantalla



1/6: Al pulsar el botón de función (pulsación breve del botón), la pantalla de estado de la bomba mylife™ YpsoPump® se encenderá y se apagará.



2/6: La bomba mylife™ YpsoPump® dispone de un bloqueo de pantalla. Se indica por medio de un icono de candado situado en la parte superior de la pantalla, al lado del indicador de carga de la batería.

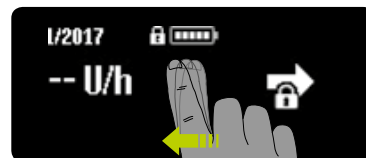


3/6: Deslice el dedo hacia la izquierda para desbloquear la pantalla de estado y el menú principal. Aparecerán tres iconos numerados del 1 al 3 (desbloquear pantalla).



Si no se realizan acciones en la pantalla de estado de la bomba mylife™ YpsoPump®, la pantalla se apagará al cabo de 20 segundos y se activará el bloqueo de pantalla. Si no se realizan acciones en el menú principal o en un submenú de la bomba mylife™ YpsoPump®, la pantalla se apagará al cabo de dos minutos y se activará el bloqueo de pantalla. Se perderán todos los cambios que no se hayan guardado.



4/6: Toque sucesivamente el número actualmente activo para desbloquear la pantalla de estado. Si en 10 segundos no ha introducido en la pantalla de desbloqueo los tres números en la secuencia correcta, volverá a la pantalla de estado bloqueada. Deslice el dedo hacia la derecha para volver a la pantalla de estado bloqueada.

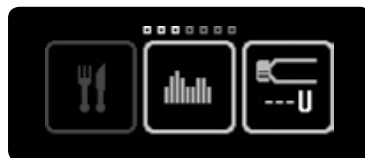

5/6: Si ha desbloqueado correctamente la bomba mylife™ YpsoPump®, se encontrará en el menú principal. Deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a todas las opciones de menú disponibles.



6/6: Deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de estado desbloqueada (no se muestra el icono de candado).




Asegúrese de apagar la pantalla antes de introducirse la bomba mylife™ YpsoPump® en el bolsillo de los pantalones o en un sistema de transporte. Así evitará que la bomba se ponga en marcha accidentalmente.

Vista general del menú principal

En la pantalla verá simultáneamente tres iconos de menú. Para ver otros iconos de menú, deslice el dedo hacia la izquierda por la pantalla.


La barra de navegación que hay sobre los iconos muestra el número de iconos de menú disponibles. Los pequeños cuadrados resaltados en blanco indican en qué punto del menú principal se encuentra actualmente. Al manejar la bomba mylife™ YpsoPump®, asegúrese siempre de utilizar correctamente las distintas funciones.

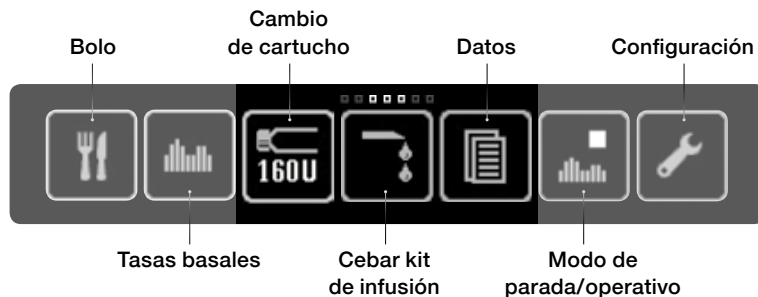

2.4 Modos operativo y de parada

Modo operativo

La bomba mylife™ YpsoPump® dispone de dos modos de funcionamiento diferentes: el “modo operativo” y el “modo de parada”. Los iconos del “modo de parada” y del “modo operativo” indican el estado operativo actual de la bomba de insulina en cada caso. Solo se puede administrar insulina (p. ej., tasa basal) en el modo operativo.

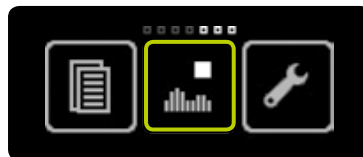

1/3: Abra el menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Modo de parada/pasar al modo operativo”.




2/3: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.



3/3: Aparece la pantalla de estado.
Se inicia la administración de la
tasa basal de acuerdo con el perfil
programado.

Modo de parada


Para pasar la bomba mylife™ YpsoPump® del modo operativo al modo de parada, abra el menú principal. En el modo de parada no se puede administrar insulina.

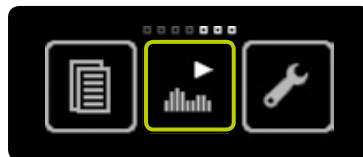

1/3: Abra el menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono "Modo operativo/pasar al modo de parada".



2/3: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.

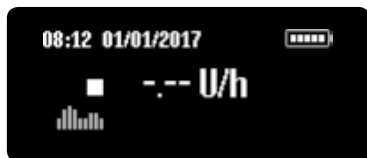

3/3: Aparece la pantalla de estado. Las administraciones de insulina se interrumpirán inmediatamente. Se indica en la pantalla.



La pantalla de la bomba mylife™ Ypsopump® mostrará una advertencia si la bomba de insulina lleva más de una hora en modo de parada. La advertencia de interrupción se puede activar de forma prematura, directamente después de que la bomba de insulina haya pasado al modo de parada. Para ello, pulse prolongadamente el botón de función y luego confirme la advertencia.




Pantalla de estado en modo operativo

La pantalla de estado es el elemento principal de visualización de información e indica el estado operativo actual de la bomba mylife™ YpsoPump®. Puede acceder a la pantalla de estado en todo momento pulsando brevemente una vez el botón de función. Si no la utiliza, la pantalla de estado de la bomba mylife™ YpsoPump® se apagará automáticamente al cabo de 20 segundos. La bomba mylife™ YpsoPump® seguirá activa y en modo operativo y administrará de forma continua insulina de acuerdo con los ajustes programados.


Si la bomba de insulina está en modo operativo, la pantalla de estado indica el perfil actual de tasa basal y la administración actual de insulina.

Si se encuentra en el menú principal o en un submenú y no realiza ninguna acción en la bomba de insulina durante dos minutos, la pantalla se apagará automáticamente.

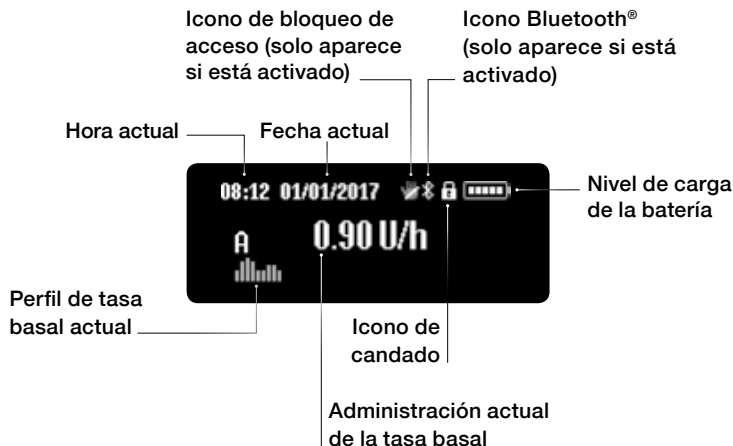

Pantalla de estado en modo de parada

Si la bomba de insulina se encuentra en el modo de parada, se cancelará toda administración de insulina.

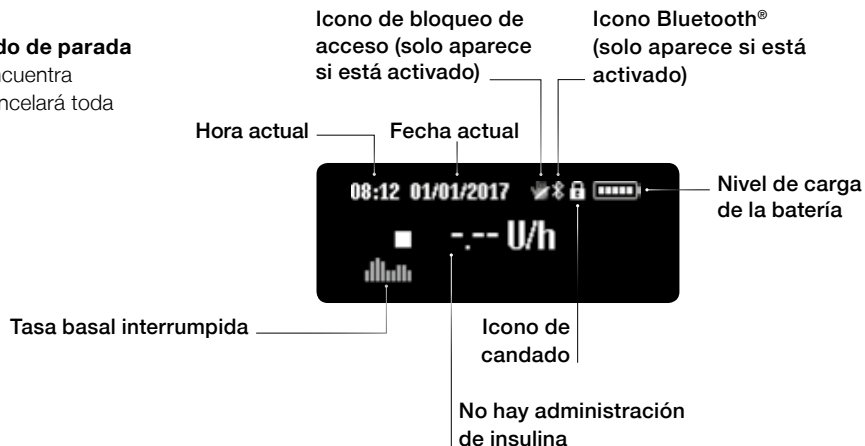

El nivel de carga de la batería se indica por medio de rectángulos en el icono de batería de la pantalla de estado de la bomba. El número de rectángulos es proporcional a la carga de la batería.



Nivel de carga de la batería bajo



Batería completamente cargada

2.5 Puesta en marcha

Insertar una batería



1/11: Inserte una nueva batería alcalina AAA (LR03). Asegúrese de insertar primero el polo negativo de la batería. En la parte posterior de la bomba de insulina verá una imagen que muestra cómo se inserta la batería.



2/11: Bloquee el compartimento de la batería girando con el canto de una moneda la ranura de la tapa del compartimento de la batería, en sentido de las agujas del reloj, hasta que esté completamente cerrado.




La tapa del compartimento de la batería debe cambiarse cada tres meses. La junta que une la tapa y el compartimento de la batería puede haberse desgastado.

Autocomprobación

Mediante la autocomprobación, se examina la capacidad funcional de la bomba mylife™ YpsoPump® y se proporciona al usuario retroinformación visual, táctil y acústica. Se realizará una autocomprobación al poner la bomba en marcha por primera vez, tras iniciar la bomba de insulina desde el estado de almacenamiento y una vez retraída la varilla roscada.



3/11: En cuanto haya insertado la batería, aparecerá la pantalla de bienvenida, visible hasta que la bomba de insulina inicie la autocomprobación.

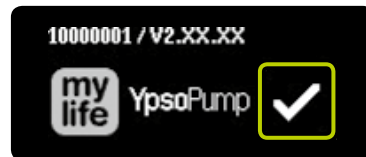

4/11: Además del logotipo de mylife™ YpsoPump®, en la parte superior izquierda se muestran el número de serie de la bomba de insulina y la versión del software. Confirme el inicio de la autocomprobación tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® realizará una autocomprobación.



5/11: En la pantalla aparecerán sucesivamente tres patrones de prueba. Los 3×3 rectángulos de prueba deberán verse por entero y con un brillo uniforme.



6/11: A continuación, la bomba mylife™ YpsoPump® emite dos señales vibratorias (señales táctiles).



7/11: Las señales táctiles van seguidas de dos señales acústicas.



8/11: La autocomprobación ha finalizado. Puede repetir la autocomprobación deslizando el dedo hacia la derecha. Confirme la finalización correcta de la autocomprobación tocando .


Si no se confirma la autocomprobación 5 minutos después de iniciar la bomba de insulina en estado de almacenamiento o tras retraer la varilla roscada, la bomba de insulina lo indicará con advertencias acústicas y táctiles. Si se enciende ahora la pantalla con el botón de función, volverá a aparecer la pantalla de autocomprobación inicial (Fig. 4/11). Finalice la autocomprobación y confirme.

Ajustar la hora




9/11: Aparece la pantalla de ajuste de la hora. Ajuste la hora actual (horas, minutos) seleccionando el valor deseado. Confirme los valores ajustados tocando .

Ajustar la fecha

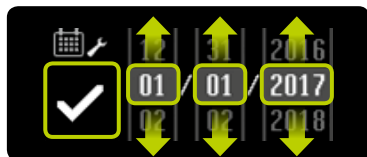

10/11: Tras ajustar la hora, ajuste la fecha actual (día, mes, año). Confirme el ajuste tocando

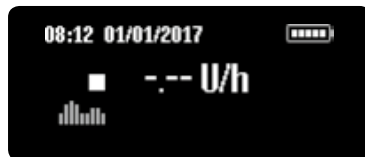

11/11: Aparece la pantalla de estado. La bomba de insulina está en el modo de parada.

Para completar la puesta en marcha de la bomba de insulina, programe los perfiles de la tasa basal según los pasos indicados en la página 38. Inserte un cartucho según los pasos indicados en la página 91. Cebe el kit de infusión según los pasos indicados en la página 95. Conéctese el kit de infusión al cuerpo según los pasos indicados en la página 99. Cebe la cánula según los pasos indicados en la página 106. Por último, ajuste la bomba de insulina al modo operativo según los pasos indicados en la página 25.



Puede ajustar la hora y la fecha en cualquier momento en el menú de configuración. Si selecciona una fecha imposible (p. ej., 30/02/2017), el icono de confirmación estará inactivo (gris) y no podrá confirmar la fecha.




3 Tasa basal

Advertencias

- ⚠ Utilice sus propios ajustes de terapia. Los valores mostrados en las páginas siguientes solo son ejemplos. Haga siempre el primer ajuste o las modificaciones de la tasa basal de acuerdo con las recomendaciones de su médico o asesor de diabetes y nunca por cuenta propia. Asegúrese de no distraerse al ajustar la tasa basal – programe un perfil de tasa basal completo en un solo paso. Introduzca con cuidado los valores horarios y, antes de cada entrada, asegúrese de que el ajuste corresponda a sus recomendaciones de terapia.
- ⚠ Todo cambio del perfil de la tasa basal actual a uno nuevo, así como cualquier modificación del perfil de la tasa, debe ser conforme a las recomendaciones de su médico o asesor de diabetes. Toda modificación del perfil de tasa basal no adaptada a una situación concreta puede producir hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Tenga siempre mucho cuidado al ajustar la función de tasa basal temporal. Si no se ajusta la función de tasa basal temporal correctamente, la insulina dosificada por la bomba de insulina no corresponderá a las recomendaciones terapéuticas, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).

3.1 Programar el perfil de tasa basal A

La tasa basal es una cantidad básica de insulina que se administra continuamente a fin de mantener la glucemia dentro del intervalo deseado. Tiene la opción de programar dos perfiles de tasa basal (A y B).

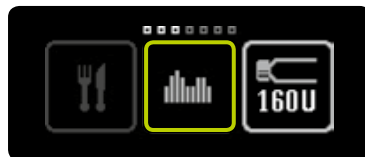

1/8: Abra el menú principal y toque el icono “Tasas basales”.



2/8: Toque el icono “Perfil de tasa basal A”.



Los valores siguientes se muestran en la pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump®. En esta guía del usuario, corresponden a las abreviaturas siguientes:


U = unidades de insulina

h = horas

d = día




3/8: Aparece la pantalla de ajuste de la tasa basal de la primera hora, a partir de medianoche (00–01 h). Cuando ponga en marcha la bomba por primera vez (cuando programe por primera vez un perfil de tasa basal), un valor horario ajustado y confirmado se aplicará a la hora siguiente como valor de inicio.

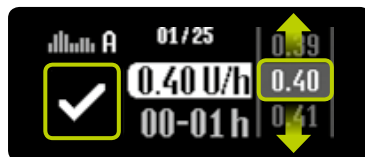

4/8: Seleccione el valor especificado por el médico, entre 0,00 U/h y 40,0 U/h, y confirme tocando . Tras cada confirmación de un valor horario, se desplazará automáticamente a la hora siguiente. Los valores de tasa basal de entre 0,02 U/h y 1,00 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,01 U/h. Los valores de tasa basal de entre 1,00 U/h y 2,00 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,02 U/h. Los valores de tasa basal de entre 2,00 U/h y 15,0 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,1 U/h. Los valores de tasa basal de entre 15,0 U/h y 40,0 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,5 U/h.



5/8: Deslizando el dedo hacia la derecha puede retroceder en cualquier momento una hora y ajustar la entrada anterior.

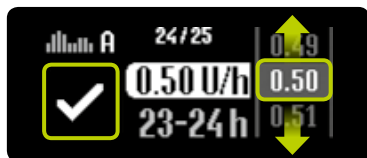

6/8: Repita el paso 4/8 con cada segmento horario individual hasta haber introducido los 24 valores de la tasa basal.



7/8: Una vez introducidos todos los valores, la bomba mylife™ Ypsopump® le mostrará la dosis diaria de la tasa basal en un gráfico y en forma de valor. Puede cambiar los valores de la tasa basal deslizando el dedo hacia la derecha hasta alcanzar el segmento que desee corregir. Confirme tocando . La bomba mylife™ Ypsopump® vibra un instante. Los valores se guardan y en los datos de terapia se registra un acontecimiento por cada valor de la tasa basal.



8/8: Aparece la pantalla de estado. La bomba mylife™ Ypsopump® está en modo de parada. Para iniciar la administración de insulina, ajuste la bomba de insulina al modo operativo. La diferencia entre el modo operativo y el modo de parada se explica en la página 25.




La dosis diaria total del perfil de tasa basal programado se muestra en el submenú de tasa basal, en el icono de tasa basal correspondiente.



3.2 Programar el perfil de tasa basal B

Además del perfil de tasa basal A, puede programar un segundo perfil de tasa basal B. Podrá alternar entre los perfiles de tasa basal A y B en cualquier momento.

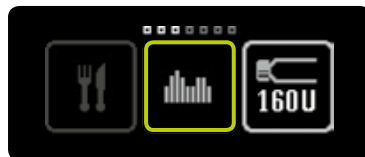


1/8: Abra el menú principal y toque el icono “Tasas basales”.




2/8: Toque el icono “Perfil de tasa basal B”.




3/8: Aparece la pantalla de ajuste de la tasa basal de la primera hora, a partir de medianoche (00–01 h). Cuando ponga en marcha la bomba por primera vez (cuando programe por primera vez un perfil de tasa basal), un valor horario ajustado y confirmado se aplicará a la hora siguiente como valor de inicio.

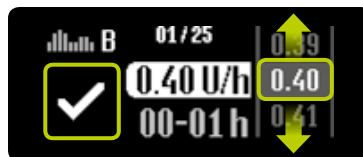

4/8: Seleccione el valor especificado por el médico, entre 0,00 U/h y 40,0 U/h, y confirme tocando . Tras cada confirmación de un valor horario, se desplazará automáticamente a la hora siguiente. Los valores de tasa basal de entre 0,02 U/h y 1,00 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,01 U/h. Los valores de tasa basal de entre 1,00 U/h y 2,00 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,02 U/h. Los valores de tasa basal de entre 2,00 U/h y 15,0 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,1 U/h. Los valores de tasa basal de entre 15,0 U/h y 40,0 U/h se pueden ajustar en incrementos de 0,5 U/h.

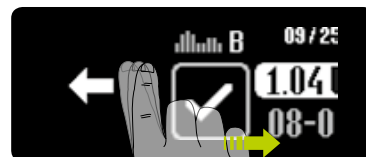


5/8: Deslizando el dedo hacia la derecha puede retroceder en cualquier momento una hora y ajustar la entrada anterior.

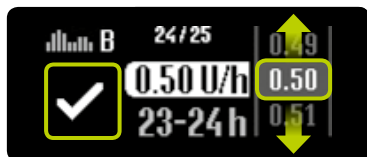

6/8: Repita el paso 4/8 con cada segmento horario individual hasta haber introducido los 24 valores de la tasa basal.



7/8: Una vez introducidos todos los valores, la bomba mylife™ YpsoPump® le mostrará la dosis diaria de la tasa basal en un gráfico y en forma de valor. Puede cambiar los valores de la tasa basal deslizando el dedo hacia la derecha hasta alcanzar el segmento que desee corregir. Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante. Los valores se guardan y en los datos de terapia se registra un acontecimiento por cada valor de la tasa basal.

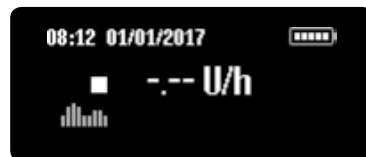


8/8: Aparece la pantalla de estado. La bomba mylife™ YpsoPump® está en modo de parada. Para iniciar la administración de insulina, ajuste la bomba de insulina al modo operativo. La diferencia entre el modo operativo y el modo de parada se explica en la página 25.



La dosis diaria total del perfil de tasa basal programado se muestra en el submenú de tasa basal, en el icono de tasa basal correspondiente.



3.3 Alternar entre perfiles de tasa basal

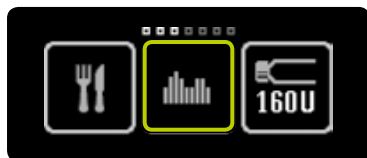


1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Tasas basales”.



2/4: Si está activo el perfil de tasa basal A, toque el icono “Pasar a perfil de tasa basal B”.



3/4: Si está activo el perfil de tasa basal B, toque el icono “Pasar a perfil de tasa basal A”.

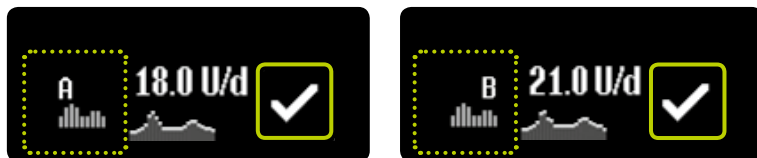


4/4: Una vez haya realizado su selección, la bomba mylife™ YpsoPump® indica el perfil de tasa basal correspondiente (A o B) con la dosis diaria de la tasa basal. Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.




Al pasar de un perfil de tasa basal a otro cambia la administración de insulina basal. Asegúrese de que dicho cambio sea conforme a la recomendación terapéutica. Si está activada la función de tasa basal temporal, no está disponible la función de alternancia de perfiles de tasa basal (el icono correspondiente está inactivo).

3.4 Cambiar un perfil de tasa basal

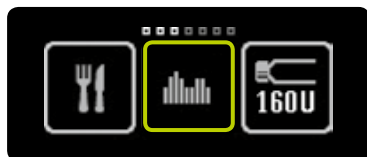

1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Tasas basales”. La pantalla indica el submenú de tasa basal. Si está activada la “Función de tasa basal temporal”, no están disponibles las funciones de perfiles de tasa basal A y B.

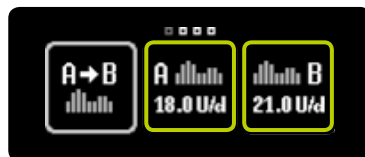

2/4: Toque el icono de perfil de tasa basal que desee cambiar.



3/4: Aparece la pantalla de ajuste de la tasa basal para la primera hora, a partir de la medianoche (00–01 h), con el último valor que haya ajustado. Puede confirmar este valor o seleccionar uno nuevo de entre 0,00 U/h y 40,0 U/h y también confirmar tocando ☒. Repita ahora el paso 3/4 con cada segmento horario individual de los 24 valores de la tasa basal.



4/4: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante. La bomba mylife™ YpsoPump® guarda los valores, registra un acontecimiento en los datos de terapia por cada valor modificado e indica la dosis diaria de la tasa basal.


3.5 Función de tasa basal temporal

Activar la función de tasa basal temporal

La función de tasa basal temporal le permite reducir o aumentar la tasa basal durante un tiempo limitado. Cuando haya ajustado la tasa basal temporal, seguirá administrándose el perfil de tasa basal programado (A o B). Para poder utilizar la función de tasa basal temporal, la bomba mylife™ YpsoPump® debe estar en modo operativo.




1/7: Abra el menú principal y toque el icono “Tasas basales”.

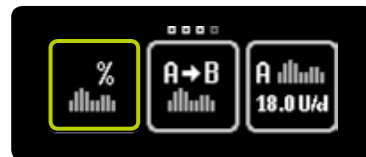


2/7: Toque el icono “Función de tasa basal temporal”.




En el modo de parada no está disponible la función de tasa basal temporal. Para poder utilizar esta función, la bomba de insulina debe estar en modo operativo.

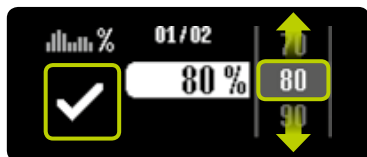

3/7: Si desea reducir la tasa basal actual, seleccione un valor entre 0 % y 90 %. Si desea aumentar la tasa basal actual, seleccione un valor entre 110 % y 200 %. P. ej., si selecciona una tasa basal temporal del 80 %, la tasa basal actual se reducirá en un 20 %. 100 % significa que no hay ningún aumento ni ninguna reducción. A continuación, confirme tocando

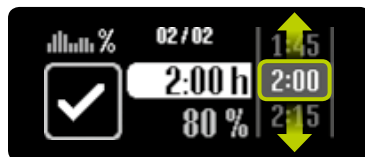

4/7: Seleccione el período temporal en el que desee reducir o aumentar la tasa basal actual. El período se puede ajustar de 15 minutos a 24 horas en pasos de 15 minutos.

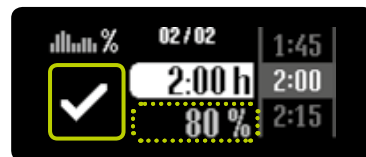

5/7: El porcentaje de la tasa basal actual se muestra en gris como información debajo del período temporal seleccionado. La bomba mylife™ YpsoPump® inicia la función de tasa basal temporal tras la confirmación tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.



Si está activada la función de tasa basal temporal, no se puede cambiar un perfil de tasa basal, alternar entre perfiles de tasa basal, reponer un cartucho ni cebar el kit de infusión.




6/7: Aparece la pantalla de estado con la tasa basal real. Un signo de % al lado del perfil de tasa basal ajustado indica que hay activa una función de tasa basal temporal.




7/7: Además, debajo del valor de tasa basal, se mostrarán alternativamente el tiempo restante y el porcentaje seleccionado de la tasa basal.




Quando haya finalizado la tasa basal temporal ajustada, aparecerá una advertencia en la pantalla. Confirme la advertencia. La tasa basal programada (A o B) también continuará aunque no confirme la advertencia.

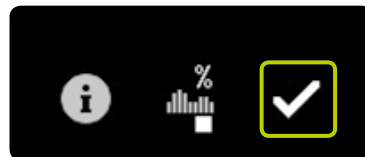

Cancelar la función de tasa basal temporal

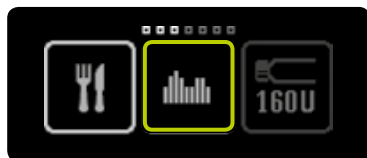

1/4: Abra el menú principal y toque el icono "Tasas basales".

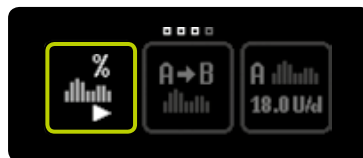

2/4: Toque el icono "Función de tasa basal temporal activada/cancelar".



3/4: Confirme la cancelación de la función de tasa basal temporal tocando ☒. La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.



4/4: Aparece la pantalla de estado con la tasa basal original programada.

4 Bolo

Advertencias

- ⚠ No cambie el incremento del bolo especificado sin antes consultarlo a su médico o asesor de diabetes. El cambio del incremento del bolo puede provocar hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Si el bolo se cancela antes de tiempo, aparecerá la advertencia “Bolo cancelado”. La cancelación prematura ocurre si hay una alarma o al poner la bomba de insulina en modo de parada. Si el bolo en curso se ha cancelado antes de tiempo, la duración real y la cantidad de insulina administrada constarán en los datos de terapia. Si desea continuar el bolo, deberá reprogramarlo según el procedimiento descrito en esta guía del usuario. La administración incorrecta del bolo puede provocar hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Tenga especial cuidado al ajustar un bolo. Verifique cada entrada antes de confirmar la administración del bolo. Si el bolo no se ajusta correctamente, puede producirse hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Cuando utilice la función de bolo ciego, asegúrese de antemano de que el ajuste del incremento del bolo sea correcto. Cuando introduzca un bolo ciego, no se distraiga. Cuando lleve puesta la bomba de insulina, asegúrese de que no se active la función de bolo ciego pulsando accidentalmente el botón de función (p. ej., en el bolsillo de los pantalones). La función de bolo ciego se puede desactivar en el menú de configuración. Si no está seguro de haber administrado el bolo ciego, revise la cantidad del bolo en los datos de terapia y actúe en función de la cantidad administrada. La administración incorrecta del bolo puede provocar hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).

Un bolo es una dosis de insulina que se administra de forma complementaria a la tasa basal. Para poder administrar un bolo, la bomba mylife™ YpsoPump® debe estar en modo operativo.

Se administra un bolo en las situaciones siguientes:

- Compensación de los hidratos de carbono provenientes de las comidas (un bolo de comida).
- Reducción de la glucemia para corregir una concentración alta de glucosa en sangre.



Utilice sus propios ajustes de terapia. Los valores mostrados en las páginas siguientes solo son ejemplos.

4.1 Ajustar el incremento del bolo

El incremento del bolo indica el aumento o la reducción de la cantidad de bolo por gesto en la pantalla táctil. También indica el incremento de la cantidad de bolo por cada pulsación del botón de función al introducir un bolo ciego.



1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.



2/4: Toque el icono “Ajustar incremento bolo”.



3/4: Seleccione uno de los siguientes incrementos de bolo: 0,1 U, 0,5 U, 1,0 U, 2,0 U. Ajuste el valor de incremento del bolo especificado por el médico. Confirme el ajuste tocando ☒. La bomba de insulina vibra un instante.



4/4: Aparece la pantalla de estado.




Tenga en cuenta que el incremento del bolo influye directamente en la función de bolo ciego. El incremento del bolo ajustado equivale al aumento de la cantidad de insulina para cada pulsación del botón de función.

4.2 Activar el bolo ciego

Cuando ponga por primera vez en marcha la bomba mylife™ YpsoPump®, la función de bolo ciego siempre estará inactiva. Para poder usar la función de bolo ciego, deberá activarla primero.




1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.

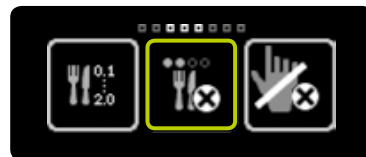

2/4: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Bolo ciego inactivo/activar”.



3/4: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante y se puede utilizar la función de bolo ciego. Siga el procedimiento indicado en la página 72.

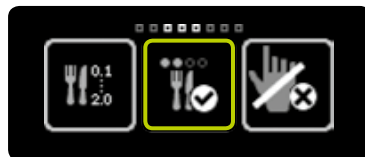


4/4: Vuelva a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración” y deslice el dedo hacia la izquierda; aparecerá el icono “Bolo ciego activo/desactivar”.

4.3 Desactivar el bolo ciego

Con la bomba mylife™ YpsoPump® tiene la opción de desactivar la función de bolo ciego.




1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.

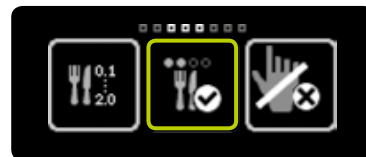

2/4: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Bolo ciego activo/desactivar”.



3/4: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPumpR vibra un instante y se desactiva la función de bolo ciego.

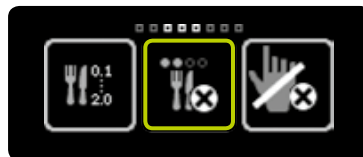

4/4: Vuelva a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración” y deslice el dedo hacia la izquierda; aparecerá el icono “Bolo ciego inactivo/activar”.

4.4 Tipos de bolos

La bomba mylife™ YpsoPump® dispone de 4 tipos de bolos:

Bolo estándar

La cantidad de bolo introducida se administra inmediatamente.

Bolo extendido

La cantidad de bolo se administra durante un tiempo de extensión ajustable, distribuido uniformemente.

Bolo combinado


La cantidad de bolo total introducida se divide en un bolo estándar y un bolo extendido. Dicha división es regulable.

Bolo ciego

El bolo ciego es un método de administración de bolo estándar que solo se puede programar pulsando el botón de función.

Se puede administrar un bolo estándar o un bolo ciego si está en curso una porción ampliada de un bolo. Un bolo estándar o ciego siempre tiene prioridad sobre una porción ampliada de un bolo. Si administra un bolo estándar o un bolo ciego cuando esté en curso una porción ampliada de un bolo, se mostrará el bolo estándar o ciego en la pantalla de estado. Tras la administración, la pantalla de estado volverá a la cantidad restante de la porción ampliada de un bolo.


Bolo estándar

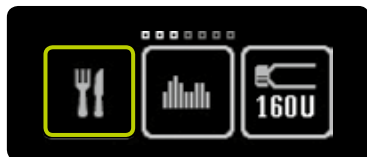

1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Bolo”.



2/4: Toque el icono “Bolo estándar”.

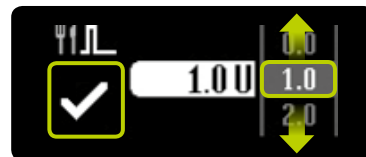

3/4: Seleccione una cantidad de bolo de entre 0,1 U y 30,0 U. La administración del bolo comenzará inmediatamente, una vez confirmada con . Si se confirma el valor predeterminado de 0,0 U, se cancelará el bolo estándar. La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.




Las funciones de los distintos tipos de bolo no estarán disponibles si la bomba de insulina se encuentra en el modo de parada o si el cartucho está vacío. Tenga en cuenta que la introducción de una cantidad de bolo mínima depende directamente del ajuste de incremento del bolo. Si el incremento del bolo se ajusta, p. ej., a 1,0 U, la cantidad mínima del bolo ajustable para un bolo estándar también será de 1,0 U.




4/4: La bomba mylife™ YpsoPump® irá restando en la pantalla de estado las unidades que quedan. Puede cancelar en cualquier momento un bolo en curso si toca . La cancelación siempre se debe confirmar con .


Bolo extendido

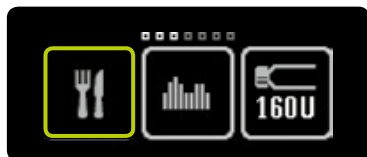


1/6: Abra el menú principal y toque el icono “Bolo”.

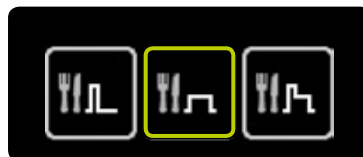


2/6: Toque el icono “Bolo extendido”.

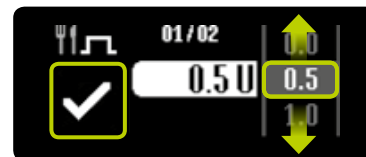

3/6: Seleccione una cantidad de bolo de entre 0,1 U y 30,0 U y confirme con ☒. Si se confirma el valor predeterminado de 0,0 U, se cancelará el bolo extendido.

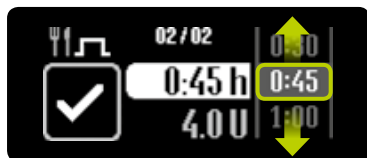

4/6: Seleccione el tiempo de extensión durante el que desee administrar la cantidad de bolo seleccionada. El tiempo de extensión se puede ajustar de 15 minutos a 12 horas en pasos de 15 minutos.

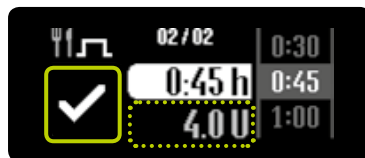


5/6: La cantidad de bolo ajustada se muestra en gris debajo del tiempo de extensión seleccionado. La bomba mylife™ YpsoPump® inicia la administración del bolo después de tocar ☒ para confirmar. La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.




6/6: La bomba mylife™ YpsoPump® irá restando en la pantalla de estado las unidades que quedan. Además, se mostrará el tiempo de extensión restante del bolo extendido. Puede cancelar en cualquier momento un bolo en curso si toca ☒. La cancelación siempre se debe confirmar con ☒.


Bolo combinado

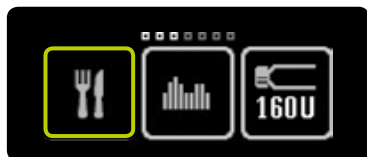


1/8: Abra el menú principal y toque el icono “Bolo”.

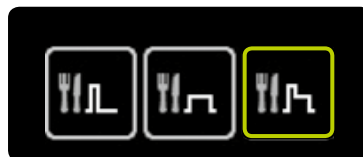


2/8: Toque el icono “Bolo combinado”.

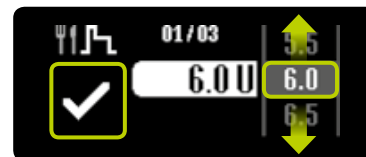

3/8: Seleccione una cantidad de bolo total de entre 0,2U y 30,0U y confirme con ☒. Si se confirma el valor predeterminado de 0,0U, se cancelará el bolo combinado.

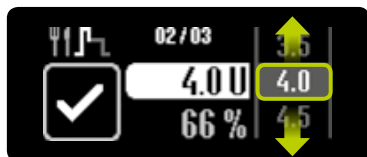


4/8: Seleccione la cantidad de bolo que desee administrar directamente (porción inmediata).

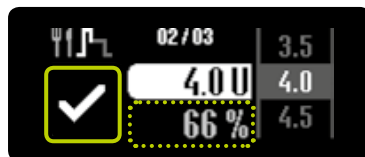

5/8: El porcentaje de la porción inmediata se muestra en gris debajo de la cantidad de bolo seleccionada. Esta cantidad de bolo se debe confirmar tocando .



6/8: Seleccione el tiempo de extensión durante el que desee administrar la porción restante de la cantidad de bolo (porción ampliada). El tiempo de extensión se puede ajustar de 15 minutos a 12 horas en pasos de 15 minutos.

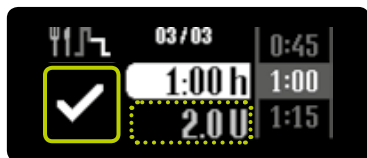

7/8: La cantidad de bolo de la porción ampliada se muestra en gris debajo del tiempo de extensión seleccionado. La bomba mylife™ YpsoPump® inicia la administración del bolo después de tocar  para confirmar. La bomba de insulina vibra un instante.



8/8: La bomba mylife™ YpsoPump® irá restando en la pantalla de estado las unidades que quedan. En primer lugar se administrará la porción inmediata del bolo. Después se administrará la porción ampliada. Además, se mostrará el tiempo de extensión restante del bolo extendido. Puede cancelar en cualquier momento un bolo en curso si toca . La cancelación siempre se debe confirmar con .

Bolo ciego

Tiene la opción de programar un bolo pulsando únicamente el botón de función, sin utilizar la pantalla táctil. Esto significa que puede administrar un bolo discretamente, si lleva la bomba mylife™ YpsoPump® en el bolsillo de los pantalones, por ejemplo. Asegúrese de haber activado la función de bolo ciego de acuerdo con el procedimiento descrito en la página 60.



1/7: Pulse de forma prolongada el botón de función hasta que la bomba mylife™ YpsoPump® emita una señal vibratoria prolongada.



En el modo de parada no está disponible la función de bolo ciego. Asegúrese de que la bomba de insulina esté en modo operativo. La función de bolo ciego no está disponible si el cartucho está vacío o si la bomba de insulina muestra una alarma o una advertencia. Para activar la función de bolo ciego siga el procedimiento de la página 60. Para desactivar la función, siga el procedimiento de la página 62.



2/7: Ahora se encuentra en el menú de bolo ciego. Aquí puede ajustar la cantidad de bolo deseada. Comience introduciendo una cantidad en 4 segundos. El tiempo transcurrido se indica por medio de unos puntos que se vuelven grises.

Si no ajusta una cantidad de bolo en 4 segundos, el menú de bolo ciego desaparecerá automáticamente y se cancelará la programación. Se indica por medio de tres vibraciones breves.



3/7: Ajuste la cantidad de bolo deseada pulsando brevemente el botón de función a cada paso del incremento. La bomba de insulina confirmará cada pulsación del botón de función con una vibración breve. Con cada pulsación del botón de función, la cantidad de bolo aumentará en función del incremento de bolo que haya ajustado. La cantidad de bolo máxima es 30,0 U.



Si en la configuración previa se ha activado la función de bolo ciego, una pulsación prolongada del botón de función podría abrir accidentalmente el menú de bolo ciego. Si no reacciona en 4 segundos, el menú de bolo ciego desaparecerá. El bolo ciego no puede programarse en el menú principal ni en un submenú.



4/7: Cada cantidad de bolo ajustada se le indicará en la pantalla. Una vez introducida la cantidad de bolo deseada, deberá esperar 4 segundos. El tiempo transcurrido se indica por medio de unos puntos que se vuelven grises.



5/7: La bomba mylife™ YpsoPump® confirma cada paso de incremento con una señal vibratoria breve.



Al introducir un bolo que supera la cantidad máxima ajustable, la programación del bolo ciego se cancela con tres vibraciones breves.



6/7: Al cabo de 4 segundos se emite una señal vibratoria prolongada. Confirme la administración del bolo pulsando prolongadamente el botón de función. Después de la señal vibratoria prolongada, el botón de función debe pulsarse prolongadamente en un lapso de 4 segundos. Para salir del menú de bolo ciego sin que se administre un bolo, pulse un instante el botón de función o no reaccione a la señal vibratoria. Se indica por medio de tres vibraciones breves.



7/7: Puede cancelar en cualquier momento un bolo en curso con . La cancelación siempre se debe confirmar con .



Si la pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® se enciende durante la programación del bolo ciego: en la pantalla se muestra la administración del bolo ciego en curso.


Si la pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® se apaga durante la programación del bolo ciego: en la pantalla no se muestra la administración del bolo ciego en curso.

Pulse un instante el botón de función para encender la pantalla y ver el bolo ciego en curso.

Programación del bolo ciego de un vistazo

Inicio de la programación

Administración del bolo ciego

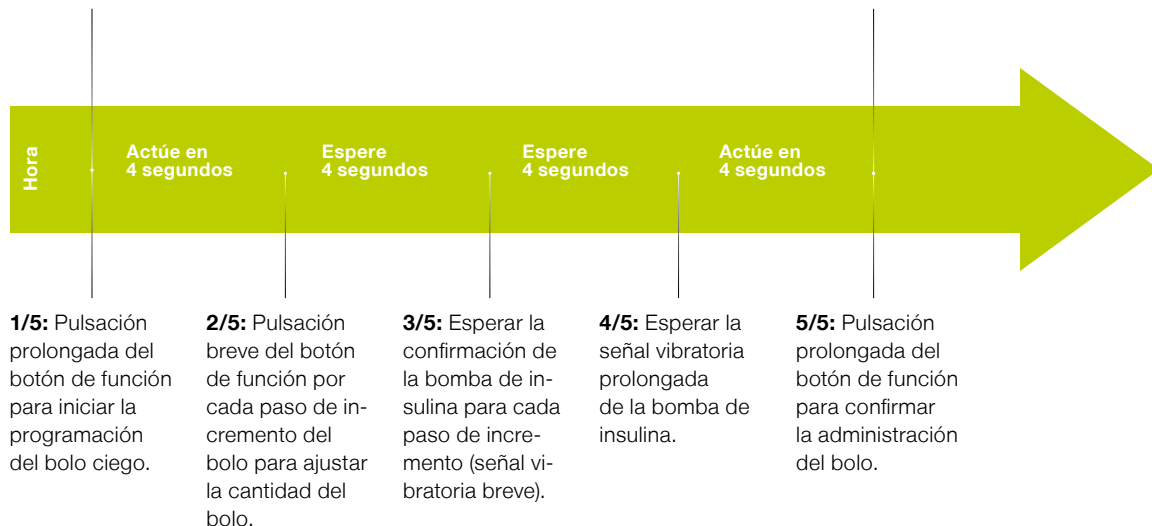

4.5 Indicación del último bolo



1/4: Para ver el último bolo administrado, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla de estado. El último bolo administrado solo se puede ver si no hay ningún bolo activo.



2/4: El icono del tipo de bolo aparece en el lado izquierdo de la pantalla; el valor correspondiente, aparece en el centro. La hora y la fecha de administración se muestran en la parte superior sobre un fondo blanco. Para salir en cualquier momento de la vista del último bolo y volver a la pantalla de estado, deslice el dedo hacia la izquierda.



3/4: Ejemplo de un bolo extendido: si un bolo en la pantalla del último bolo dispone de varios elementos informativos, estos se muestran uno debajo del otro.



Si está activa una función de bolo, no podrá mostrarse el último bolo administrado.



4/4: Ejemplo de un bolo combinado: la indicación del valor porcentual de la porción inmediata se alterna con la indicación del tiempo de extensión de la porción ampliada en intervalos de 2 segundos.

5 Cambiar el kit de infusión y el cartucho

Advertencias

- ⚠ Con el sistema mylife™ YpsoPump®, utilice solo insulina de acción rápida a una concentración de 100 U/ml (análogo de insulina). El uso de otra insulina puede provocar una dosificación incorrecta de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Si utiliza otra insulina, cambie el cartucho y el kit de infusión cebado y prosiga el tratamiento con el tipo correcto de insulina.
- ⚠ Con la bomba mylife™ YpsoPump®, utilice solo el reservorio de 1,6 ml cargado por usted (reservorio mylife™ YpsoPump®) o los cartuchos precargados de 1,6 ml (NovoRapid® PumpCart®) compatibles con la bomba mylife™ YpsoPump®. Si utiliza otro cartucho cuya compatibilidad con la bomba mylife™ YpsoPump® no esté corroborada por el fabricante, la insulina podría dosificarse incorrectamente, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). En ese caso, cambie el cartucho.
- ⚠ No utilice nunca herramientas ni instrumentos para extraer el cartucho o el kit de infusión. Podrían dañar el accionamiento o la carcasa de la bomba mylife™ YpsoPump® y comprometer su capacidad de funcionamiento. Si la bomba de insulina está dañada, no se puede garantizar la administración correcta de insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Asegúrese de administrarse la insulina recomendada por su médico o asesor de diabetes y consulte al Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.


- ⚠ Asegúrese de utilizar la solución de fármaco correcta y compruebe la etiqueta del vial antes de cargar el reservorio de la bomba mylife™ YpsoPump®.
- ⚠ Elimine las burbujas de aire del reservorio de la bomba mylife™ YpsoPump® antes de insertarlo en la bomba mylife™ YpsoPump®.
- ⚠ No lleve nunca el émbolo del reservorio de la bomba mylife™ YpsoPump® más allá de la marca de 1,6 ml. Si lo lleva más allá de la marca de 1,6 ml, el émbolo podría caerse o podría penetrar aire en el reservorio, lo que impediría un cebado correcto. Además, el reservorio podría perder la esterilidad. Si ha llevado el émbolo más allá de la marca de 1,6 ml, cancele el cebado, elimine el reservorio y llene un nuevo reservorio.
- ⚠ Peligro de asfixia: mantenga el cartucho fuera del alcance de los niños.
- ⚠ Si utiliza otro kit de infusión cuya compatibilidad con la bomba mylife™ YpsoPump® no esté corroborada por el fabricante, la insulina podría dosificarse incorrectamente, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Si utiliza un kit de infusión no compatible, cambie el kit de infusión.

- ⚠ Al cambiar el cartucho y cebar el tubo, asegúrese siempre de tener el tubo desconectado del cuerpo. El cebado con el tubo conectado puede descontrolar la dosificación de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Si durante el cebado tiene el tubo conectado al cuerpo, interrumpa inmediatamente el cebado y desconéctese el tubo del cuerpo antes de proseguir el cebado.
- ⚠ Esté continuamente atento a todo el procedimiento de cebado, hasta que el tubo del kit de infusión se haya cargado sin burbujas de aire y salga insulina por el extremo del tubo. Si todavía quedan burbujas en el tubo o el adaptador, repita el cebado. Las burbujas de aire pueden provocar una dosificación incorrecta de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Las funciones “Cebiar tubo” y “Cebiar cánula” nunca se deben utilizar para administrar el bolo; su único propósito es cebar el tubo y la cánula sin burbujas. El uso indebido de estas funciones puede provocar una dosificación incorrecta de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).

5.1 mylife™ YpsoPump® Reservoir

El mylife™ YpsoPump® Reservoir está concebido para llenarse con insulina de acción rápida a una concentración de 100 U/ml, así como para usarse con la bomba de insulina mylife™ YpsoPump®.

Para utilizar el mylife™ YpsoPump® Reservoir son necesarios los componentes siguientes:

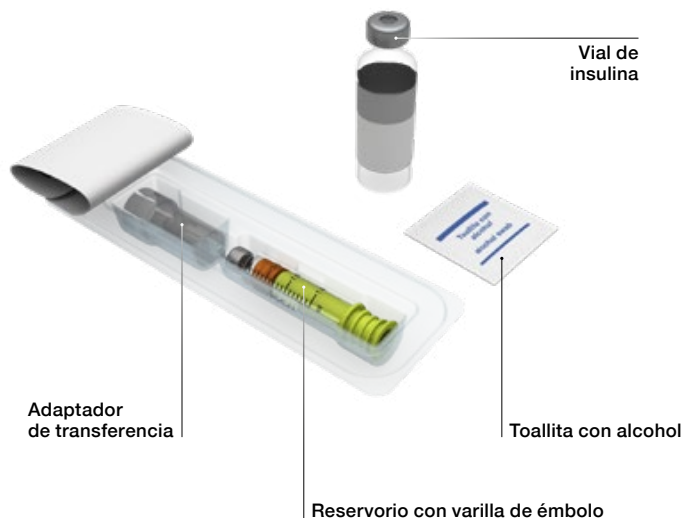

Cargar el mylife™ YpsoPump® Reservoir


El mylife™ YpsoPump® Reservoir es estéril siempre que el envase no se haya abierto ni dañado. Si hay daños visibles en el envase, utilice otro reservorio. El reservorio es de un solo uso.



Para evitar el riesgo de infección, no lleve nunca el émbolo más allá de la marca de 1,6 ml ni reutilice el adaptador de transferencia o el reservorio.




Siga las instrucciones de uso del mylife™ YpsoPump® Reservoir y de los kits de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®, sobre todo la información del apartado “Advertencia” y las explicaciones de los símbolos del envase.

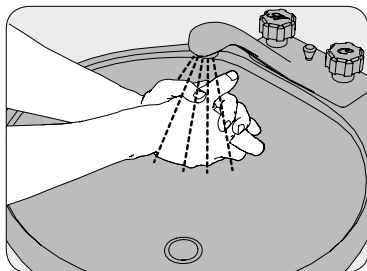


1/12: Lávese bien las manos con agua y jabón.




2/12: Limpie el tapón perforable del vial de insulina con una toallita empapada en alcohol.

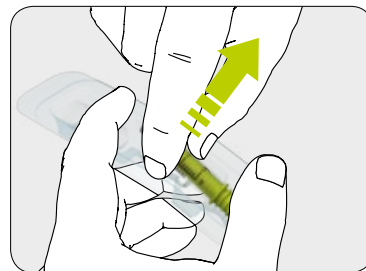


3/12: Extraiga el reservorio y el adaptador de transferencia del envase (ver página 83) sin tocar el tapón perforable.

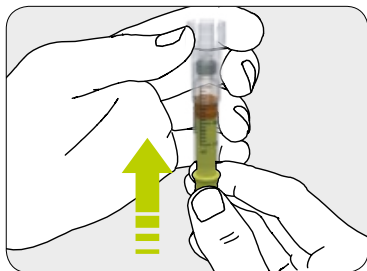


4/12: Conecte el adaptador de transferencia al reservorio y avance el émbolo al máximo.

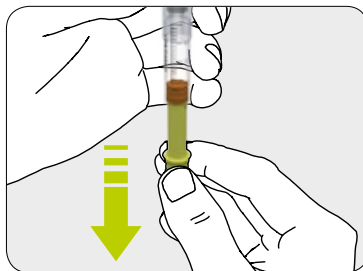


5/12 A continuación, retire la varilla del émbolo hasta que todo el reservorio se llene de aire.

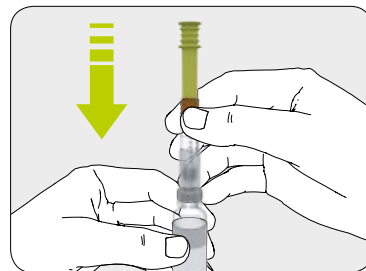

6/12: Conecte el otro extremo del adaptador de transferencia al vial de insulina.

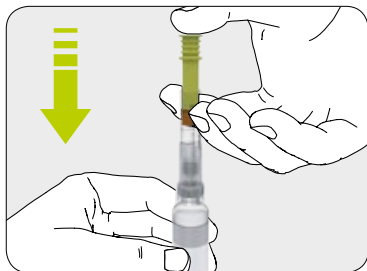

7/12 Inyecte todo el aire en el vial de insulina. Así le será más fácil extraer la insulina del vial.

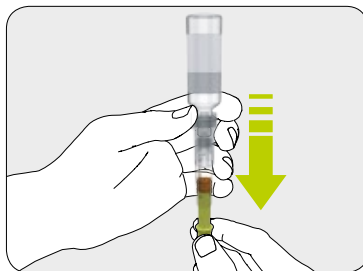


8/12: Invierta el reservorio, incluido el vial de insulina. Aspire con sumo cuidado la insulina al reservorio.



9/12: Compruebe si hay burbujas de aire en el reservorio. Si hay burbujas de aire en el reservorio, dele unos golpecitos en el lateral. Luego, presione la varilla de émbolo para expulsar las burbujas de aire del reservorio. En caso necesario, repita el procedimiento.



10/12: Retire el adaptador de transferencia del vial. Elimine el adaptador de transferencia de acuerdo con la legislación local.

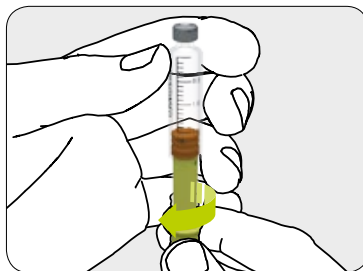


11/12 Desenrosque la varilla de émbolo y elimínela.



12/12: Siga las instrucciones de la página 94 para insertar el reservorio en la bomba mylife™ YpsoPump®.

5.2 Desconectar el kit de infusión

Los kits de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®soft y mylife™ YpsoPump® Orbit®micro se pueden desconectar y reconectar fácilmente, con la posibilidad de retirar la bomba de insulina y el tubo para bañarse, ducharse o hacer deporte.

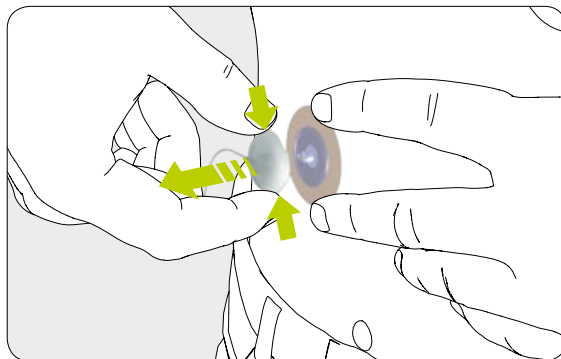

Presione ligeramente los dos lados marcados del capuchón y el capuchón del tubo se desconectará del lugar de infusión.

5.3 Cambiar el kit de infusión

El kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®soft no se debe usar durante más de 72 horas.

El kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®micro no se debe usar durante más de 48 horas.


- Al cambiar el kit de infusión, la bomba de insulina puede estar en modo de parada u operativo.
- Desconecte el kit de infusión como se describe en las instrucciones de la página 89 y retírese con cuidado la cinta adhesiva del cuerpo.
- Siga después los pasos indicados en la página 91.
- Antes de conectarse el tubo al cuerpo, asegúrese de que el tubo esté lleno de insulina y no presente burbujas de aire.
- Elimine la aguja introductora (mylife™ YpsoPump® Orbit®soft), la base de la cánula usada y el tubo usado con el adaptador según las instrucciones del médico o asesor de diabetes y conforme a la normativa local para la eliminación de agujas y de objetos punzocortantes.




Para el tratamiento con la bomba mylife™ YpsoPump®, utilice únicamente los kits de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®soft y mylife™ YpsoPump® Orbit®micro. Las longitudes de todos los tubos y cánulas de estos productos son compatibles con la bomba mylife™ YpsoPump®.

5.4 Cambiar el cartucho


Extraer el cartucho

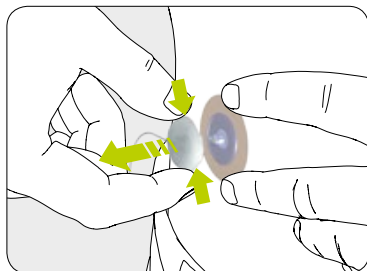

1/7: Primero desconéctese siempre el kit de infusión del cuerpo de acuerdo con las instrucciones de la página 89.

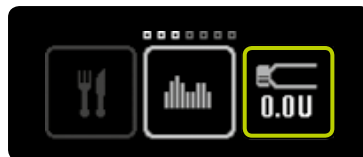

2/7: Abra el menú principal y toque el icono "Cambio de cartucho y nivel actual del cartucho".

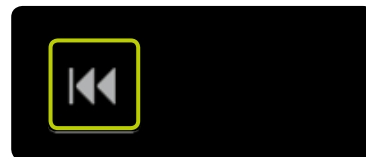

3/7: Toque el icono "Retraer varilla roscada".



La bomba mylife™ YpsoPump® le ahorra cambiar de kit de infusión cada vez que reponga el cartucho. Se pueden cambiar independientemente.



4/7: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante.




5/7: La varilla roscada se retrae y el porcentaje se reduce al 0 %. A continuación se realiza la autocomprobación (como se describe en la página 32).



No inserte el nuevo cartucho hasta que la varilla roscada se haya retraído del todo y la bomba mylife™ YpsoPump® haya realizado correctamente la autocomprobación. Si inserta el cartucho mientras la varilla roscada todavía se está retrayendo, la bomba de insulina puede mostrar el mensaje “Retracción varilla roscada no finalizada”. En ese caso, repita el proceso de cambio del cartucho.



6/7: Desconecte el kit de infusión girando el adaptador de la bomba mylife™ YpsoPump® en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

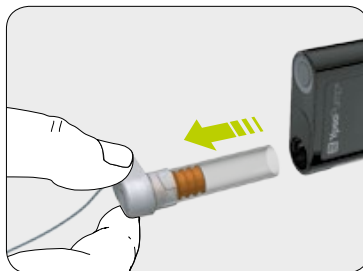

7/7: Extraiga el cartucho vacío de la bomba mylife™ YpsoPump® y elimínelo de acuerdo con las normas de protección medioambiental nacionales.

Insertar el cartucho

Utilice solo el reservorio de 1,6 ml cargado por usted (mylife™ YpsoPump® Reservoir) o el cartucho precargado de 1,6 ml (NovoRapid® PumpCart®) compatible con la bomba mylife™ YpsoPump®.



1/2: Sujete la bomba mylife™ YpsoPump® en posición vertical, con el orificio del compartimento del cartucho dirigido hacia arriba. Inserte un reservorio de 1,6 ml cargado por usted o un cartucho precargado de 1,6 ml.




2/2: Coloque el adaptador en posición vertical sobre el cartucho insertado. Gire el adaptador en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo. Oirá un ligero clic o notará un tope mecánico definido.




Al poner por primera vez en marcha la bomba mylife™ YpsoPump® o al poner la bomba de insulina en marcha tras modo almacenamiento, deberá retraer la varilla roscada antes de insertar el cartucho. Siga el procedimiento indicado en la página 91.

5.5 Cebear el kit de infusión

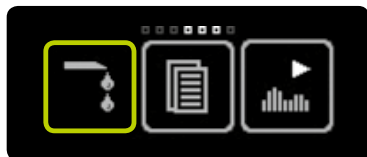


1/6: Abra el menú principal y toque el icono “Cebear kit de infusión”.

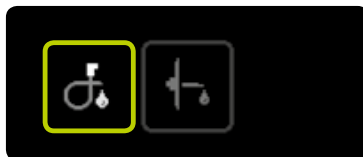

2/6: Toque el icono “Cebear tubo”.



Consulte el volumen de cebado correcto en las instrucciones de uso del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®. El volumen de cebado solo se indica a modo de referencia. Es importante que el sistema se cebe sin aire y que salga insulina por el extremo del tubo. Puede que haya que administrar más insulina que la ajustada inicialmente en el volumen de cebado.

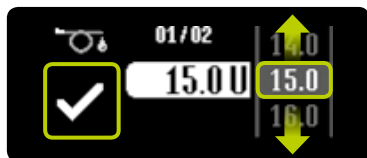

3/6: Aparece la pantalla de ajuste del volumen de cebado. Para el volumen cebado, seleccione un valor adecuado para su kit de infusión, de entre 1,0 U y 30,0 U. Confirme tocando .

Volumen de cebado si solo se

cambia el cartucho: Compruebe si hay burbujas de aire en el cartucho. Si hay burbujas de aire en el cartucho, seleccione el volumen de cebado adecuado de acuerdo con las instrucciones de uso del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®, hasta que ya no queden burbujas de aire en el cartucho, el adaptador y el tubo. Si no hay burbujas de aire en el cartucho, cebe con el volumen de cebado mínimo de 1,0 U.

Volumen de cebado al cambiar el

kit de infusión: Seleccione como volumen de cebado un valor adecuado para su kit de infusión, de acuerdo con las instrucciones de uso del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®.



La bomba mylife™ YpsoPump® le ahorra cambiar de kit de infusión cada vez que reponga el cartucho. Se pueden cambiar independientemente.




4/6: Confirme que se ha desconectado el kit de infusión del cuerpo retirando el capuchón del tubo de la base de la cánula y confirme con . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante, la varilla roscada avanza hasta el émbolo del cartucho y el kit de infusión se ceba con la cantidad de insulina seleccionada.



5/6: Durante el cebado, mantenga la bomba de insulina en posición vertical, con el adaptador dirigido hacia arriba, y golpee la bomba de insulina suavemente contra la palma de la mano para eliminar las burbujas de aire del kit de infusión. La pantalla realizará una cuenta ascendente del volumen de cebado administrado, hasta alcanzar el valor ajustado. Puede cancelar en cualquier momento el cebado tocando .




Si está activada la función de tasa basal temporal o si está activo un bolo, no estará disponible la función de cebado de kit de infusión. La función de cebado de kit de infusión tampoco se puede ejecutar si el cartucho está vacío.

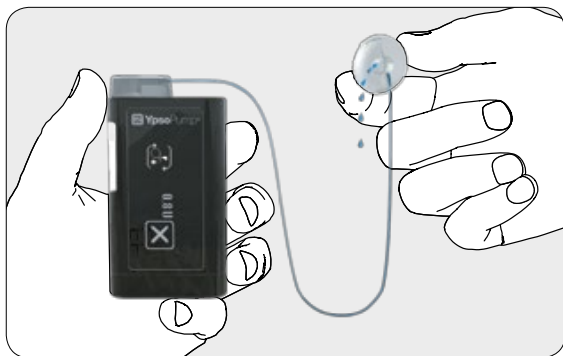

6/6: Repita el cebado con el volumen de cebado apropiado, hasta que no queden burbujas de aire en el cartucho, en el adaptador ni en el tubo, y hasta que salga insulina por el extremo del tubo del kit de infusión.

5.6 Fijar el kit de infusión al cuerpo


Si ha salido insulina por el extremo del tubo y ya no hay burbujas de aire en el cartucho, en el adaptador ni en el tubo, conéctese el kit de infusión al cuerpo.

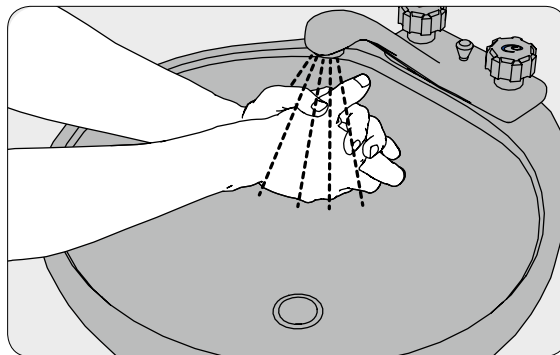


1/12: Lávese bien las manos.



Estas instrucciones resumidas son solo una recomendación. Para información detallada, notas y advertencias, consulte las instrucciones de uso del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit® correspondiente (mylife™ YpsoPump® Orbit®soft y mylife™ YpsoPump® Orbit®micro).

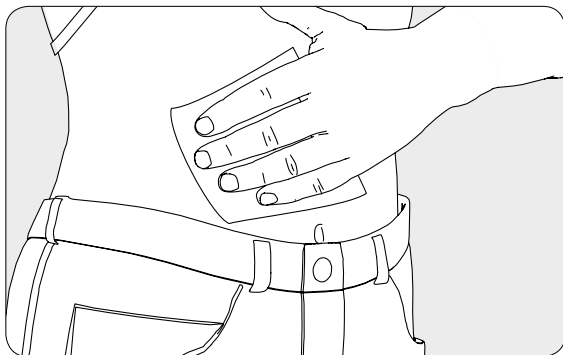


2/12: Limpie y desinfecte la zona de infusión con una toallita empapada en alcohol isopropílico (70 %). Antes de continuar, asegúrese de que no haya vello en el lugar de infusión y de que la piel esté seca.

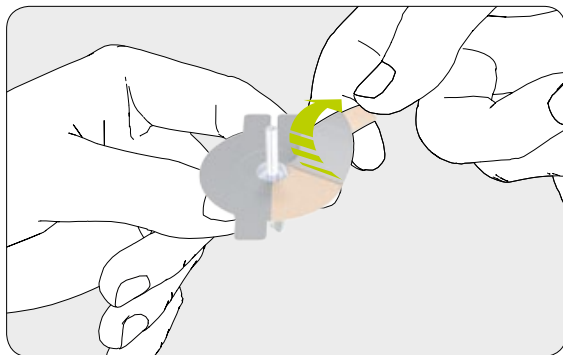


3/12: Desprenda con cuidado la lámina protectora de la cinta adhesiva. No toque la película adhesiva.



Le recomendamos que utilice una toallita empapada en alcohol isopropílico al 70 %. La utilización de alcohol isopropílico al 70 % favorece la adhesión óptima de la cinta adhesiva. No se ha comprobado la utilización de otras toallitas con alcohol; estas podrían provocar el desprendimiento de la cinta adhesiva antes de tiempo e interrumpir la administración de insulina.

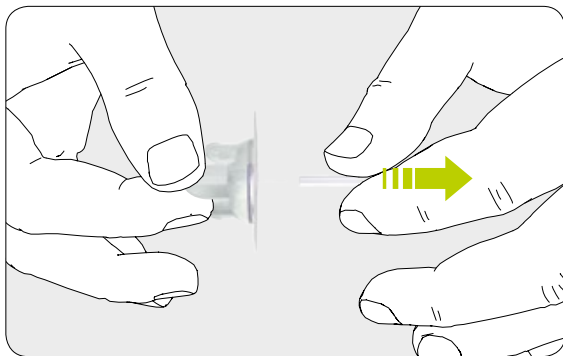


4/12: Retire con cuidado el protector de la cánula de la cánula.

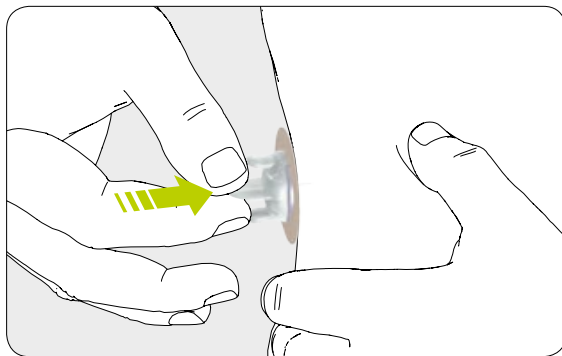


5/12: Establezca el lugar de infusión e inserte la cánula con un ángulo de 90°. También puede utilizar el insertador adecuado para el kit de infusión.




El kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®micro lleva una cánula de acero aplicable al cuerpo sin necesidad de otra aguja introductora. Para facilitar la penetración cutánea con los kits de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®soft y mylife™ YpsoPump® Orbit®micro, utilice el insertador mylife™ Orbit®.

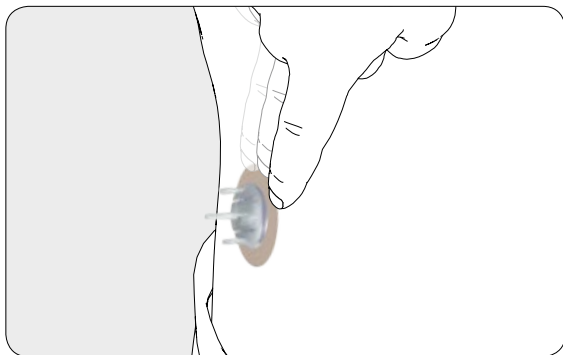


6/12: Presione la cinta sobre la piel y recorra la cinta con los dedos unos segundos, para optimizar la adhesión.

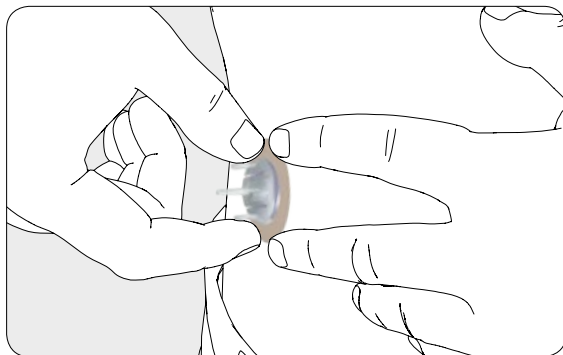


7/12: Presione la cinta adhesiva con una mano sobre la piel, sujetando el capuchón del introductor con dos dedos de la otra mano.

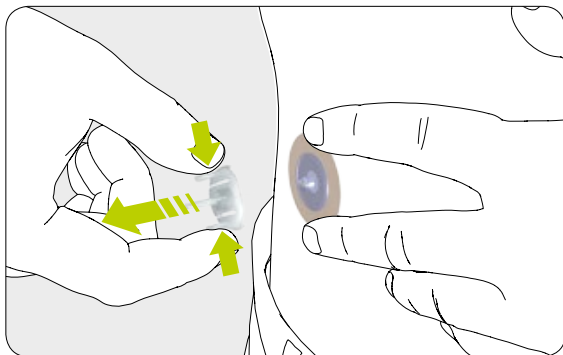


8/12: Extraiga con cuidado la aguja introductora (mylife™ YpsoPump® Orbit®soft) o el capuchón introductor (mylife™ YpsoPump® Orbit®micro) presionando las dos aletas exteriores del capuchón introductor y retírelo del lugar de infusión.

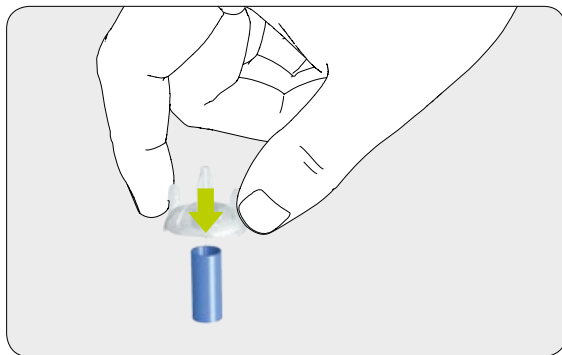


9/12: Cubra la aguja introductora extraída con el capuchón protector azul y elimínala en un contenedor para residuos con riesgo biológico.

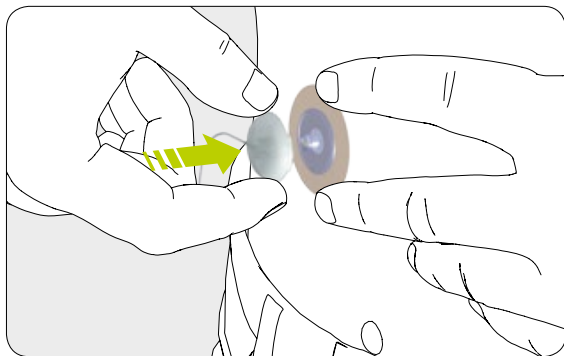

10/12: Conecte el capuchón del tubo, sin ladearlo a la base de la cánula del kit de infusión.

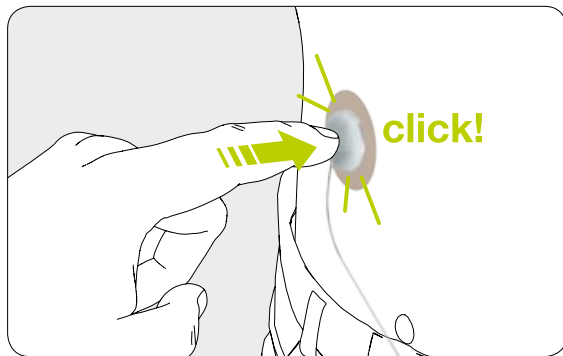


11/12: Asegúrese de oírlo encajar.

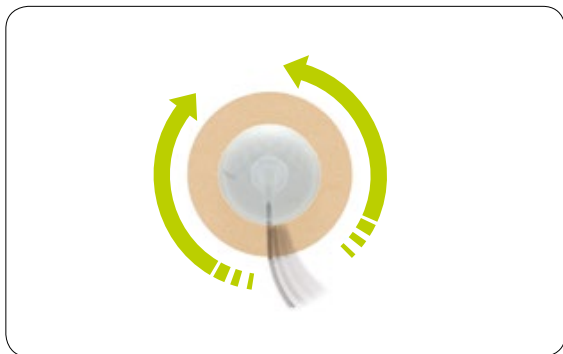


12/12: Gire el tubo a izquierda y derecha, al menos una vuelta completa en cada dirección, mientras tira del capuchón hacia arriba, para asegurarse de que el capuchón del tubo esté completamente encajado y se haya abierto la vía para el líquido.

5.7 Cebiar la cánula

Una vez conectado el kit de infusión al cuerpo, se debe cebiar la cánula con insulina.

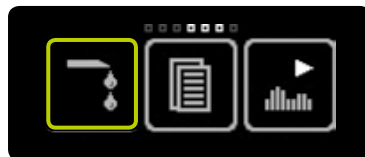


1/4: Abra el menú principal y toque el icono “Cebiar kit de infusión”.

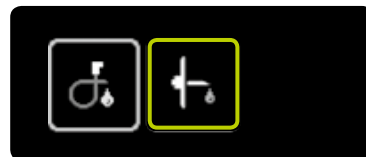

2/4: Toque el icono “Cebiar cánula”.



3/4: Aparece la pantalla de ajuste del volumen de cebado. Seleccione para el volumen de cebado un valor adecuado para la cánula, de entre 0,1 U y 1,0 U, de acuerdo con las instrucciones de uso del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®. Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante y la cánula se ceba con la cantidad de insulina seleccionada.

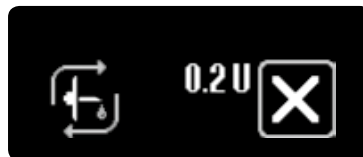

4/4: Durante el cebado, la pantalla muestra una cuenta ascendente del volumen de cebado administrado hasta alcanzar el valor ajustado. Puede cancelar en cualquier momento el cebado tocando .


6 Datos/Historial

Puede visualizar los acontecimientos guardados en el menú de datos.

La bomba mylife™ YpsoPump® dispone de una copia de seguridad de los datos, que normalmente abarca al menos 6 meses. Se distingue entre “Datos de terapia” e “Historial de alarmas”. Los datos de terapia incluyen registros de todos los acontecimientos relevantes para el tratamiento, como administración del bolo, procedimiento de cebado o modificación de las tasas basales.

El historial de alarmas muestra todas las alarmas que se han activado. Si el número de acontecimientos supera el número máximo, se sobrescribirán los acontecimientos más antiguos.

6.1 Datos de terapia

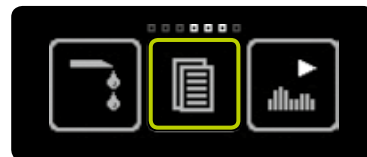


1/6: Abra el menú principal y toque el icono “Datos”.



Datos de terapia: se muestran 500 incidencias (en la bomba de insulina hay un total de 3000 incidencias almacenadas).

Historial de alarmas: se muestran 100 incidencias (en la bomba de insulina hay un total de 200 incidencias almacenadas).

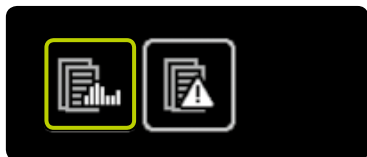

2/6: Toque el icono “Datos de terapia”.




3/6: Para cada acontecimiento, se muestran la hora y la fecha intercambiadas. Así podrá distinguir el acontecimiento de una indicación actual.

El icono del acontecimiento aparece en el lado izquierdo de la pantalla y el valor relevante en el centro. Para salir en cualquier momento de los datos de terapia, deslice el dedo hacia la derecha. Todos los acontecimientos posibles se indican en la tabla de la página 112.


En los datos de terapia, las funciones todavía en curso están marcadas con un símbolo triangular debajo del icono.

Ejemplo: bolo combinado

Se muestran sucesivamente tres pantallas, cada una con una información, en intervalos de 2 segundos:

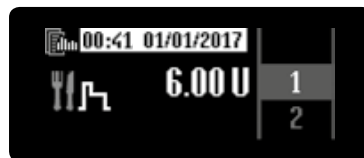

4/6: Indicación del bolo total.

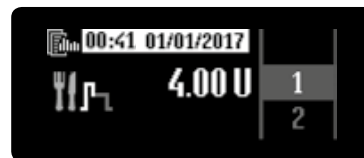

5/6: Indicación de la porción inmediata.



6/6: Indicación de la porción ampliada y tiempo de extensión.



Acuérdese de realizar periódicamente una copia de seguridad de los datos de terapia, para evitar la pérdida de acontecimientos.

Posibles incidencias en los datos de terapia



Batería extraída



Incremento del bolo modificado



Bolo combinado



Fecha modificada



Bolo extendido



Valor horario del perfil de tasa basal A modificado
(1 acontecimiento por cada valor horario modificado)



Valor horario del perfil de tasa basal B modificado
(1 acontecimiento por cada valor horario modificado)



Cánula cebada



Tubo cebado



Bolo estándar o bolo ciego



Se ha pasado del perfil de tasa basal A al perfil de tasa basal B



Se ha pasado del perfil de tasa basal B al perfil de tasa basal A



Se ha pasado al modo operativo



Se ha pasado al modo de parada



Función de tasa basal temporal



Varilla roscada retraída




Hora modificada



Cantidad total de insulina diaria (basal y bolo)

6.2 Historial de alarmas

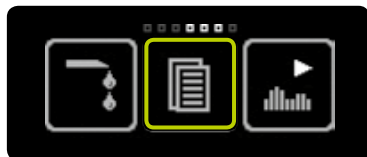

1/3: Abra el menú principal y toque el icono “Datos”.



2/3: Toque el icono “Historial de alarmas”.



3/3: Para cada acontecimiento, se muestran la hora y la fecha intercambiada. Así podrá distinguir el acontecimiento de una indicación actual.

El icono del acontecimiento aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Para salir en cualquier momento del historial de alarmas, deslice el dedo hacia la derecha. Todos los acontecimientos posibles se indican en la tabla de la página 115.

Posibles sucesos en el historial de alarmas



Parada automática



Batería vacía



Batería no apta



Cartucho vacío



Cargar batería interna recargable



Error electrónico



No hay batería



No hay insulina



Oclusión

7 Funciones y ajustes


Advertencias

- ⚠ Tenga especial cuidado al ajustar la hora. Si se ajusta una hora incorrecta, podrían alterarse las horas del perfil de tasa basal. No cambie los ajustes sin antes consultarlo a su médico o asesor de diabetes. La programación incorrecta de la bomba de insulina podría provocar una dosificación incorrecta de la insulina, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Con la bomba mylife™ YpsoPump® utilice solo baterías alcalinas AAA (LR03). Asegúrese de que la batería no esté dañada. Una batería dañada podría provocar un cortocircuito. Si se inserta otro tipo de batería (p. ej., de litio o recargable NiMH) o una batería dañada, no se garantizan la activación ni el funcionamiento correcto de la bomba de insulina; el tiempo anticipado de advertencia previo a la alarma “Batería vacía” (página 159) no se puede mantener con la batería descargada. Podría perjudicar la administración preajustada de insulina, con el consiguiente riesgo de hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Lleve siempre consigo una batería de repuesto.
- ⚠ Peligro de asfixia: mantenga la batería y la tapa del compartimento de la batería fuera del alcance de los niños.

7.1 Cambiar la hora



1/3: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.

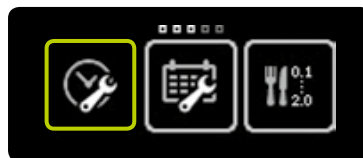

2/3: Toque el icono “Hora”.




3/3: Ajuste la hora actual, confirme con ☒ y la bomba mylife™ YpsoPump® vibrará un instante. La hora ajustada se introduce en los ajustes de terapia.

7.2 Cambiar la fecha



1/3: Abra el menú principal y toque el icono "Configuración".

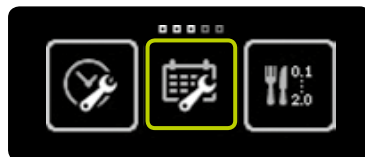


2/3: Toque el icono "Fecha".



3/3: Ajuste la fecha actual (día, mes, año). Confirme el ajuste tocando .



Los valores mostrados solo son ejemplos. Utilice siempre sus propios ajustes. Puede ajustar la hora y la fecha en cualquier momento en el menú de configuración. Si selecciona una fecha imposible (p. ej., 30/02/2017), el icono de confirmación estará inactivo (gris) y no podrá confirmar la fecha.

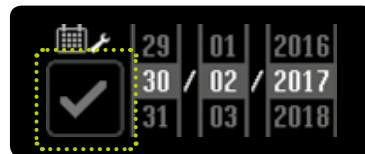

7.3 Bloqueo de acceso

La función de bloqueo de acceso permite controlar el acceso (p. ej., de niños).

Cuando está activada la función de bloqueo de acceso, solo se pueden utilizar las siguientes funciones de la bomba mylife™ YpsoPump®:

- Datos: Ver datos de terapia e historial de alarmas
- Configuración: Girar pantalla
- Configuración: Desactivar la función de bloqueo de acceso

Cuando está activada la función de bloqueo de acceso, no se pueden utilizar las siguientes funciones de la bomba mylife™ YpsoPump®:

- Todos los tipos de administración de bolo
- Función de tasa basal temporal
- Programar y alternar entre perfiles de tasa basal
- Retraer la varilla roscada para el cambio de cartucho
- Cebiar el kit de infusión y la cánula
- Cambiar al modo operativo o de parada
- Ajuste de hora y fecha
- Ajustes de incremento del bolo
- Activar/desactivar el bolo ciego
- Activar/desactivar Bluetooth®

Los iconos de estas funciones aparecen sombreados en el menú.



Si está activado el bloqueo de acceso, prosigue la administración de la tasa basal.

Activar el bloqueo de acceso



1/5: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.



2/5: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Bloqueo de acceso inactivo/activar”.



3/5: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante y se activa la función de bloqueo de acceso.



4/5: Aparece la pantalla de estado. Un icono de bloqueo de acceso en la parte superior de la pantalla indica que la función de bloqueo de acceso está activada.



5/5: Si vuelve a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración” y deslice el dedo hacia la izquierda; aparecerá el icono “Bloqueo de acceso activo/desactivar”.



Si está activada la función de bloqueo de acceso, todos los iconos inactivos se muestran en un color gris más oscuro. Significa que la función no está disponible y no se puede seleccionar.



Desactivar el bloqueo de acceso



1/5: Abra el menú principal y toque el icono "Configuración".



2/5: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono "Bloqueo de acceso activo/desactivar".



3/5: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante y se desactiva la función de bloqueo de acceso.




4/5: Aparece la pantalla de estado. El icono de bloqueo de acceso de la parte superior de la pantalla desaparece. Ahora todos los iconos están activos y se pueden volver a activar las funciones.




5/5: Vuelva a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración” y deslice el dedo hacia la izquierda; aparecerá el icono “Bloqueo de acceso inactivo/activar”.

7.4 Girar la pantalla 180°

Tiene la opción de girar la pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® 180°.

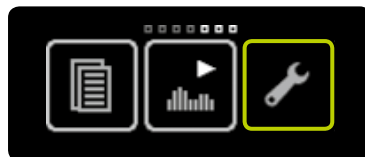

1/3: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.

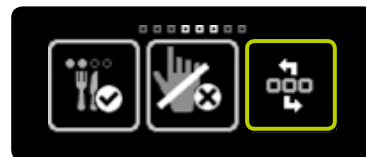

2/3: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Girar pantalla”.




3/3: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibrará un instante y la orientación de la pantalla girará 180°.


7.5 Bluetooth®

Activar Bluetooth®

Utilice la función Bluetooth® para transferir sus datos de terapia desde la bomba mylife™ YpsoPump® a otro dispositivo compatible con capacidad Bluetooth®. Si desea usar la conexión Bluetooth® con un dispositivo Bluetooth®, deberá activar primero la interfaz Bluetooth® en mylife™ YpsoPump®.

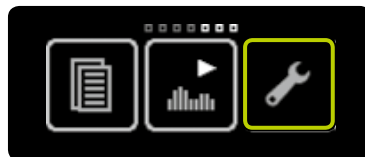

1/5: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.

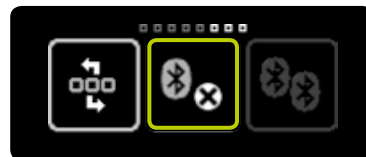

2/5: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Bluetooth® inactivo/activar”.



3/5: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante y la función Bluetooth® se activa.




4/5: Aparece la pantalla de estado. La función Bluetooth® activada se indica por medio de un icono Bluetooth® en la parte superior de la pantalla.




5/5: Vuelva a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración” y deslice el dedo hacia la izquierda; aparecerá el icono “Bluetooth® activo/desactivar”.

Desactivar Bluetooth®

Si no desea utilizar dispositivos Bluetooth® con la bomba mylife™ YpsoPump®, puede desactivar la interfaz Bluetooth®.

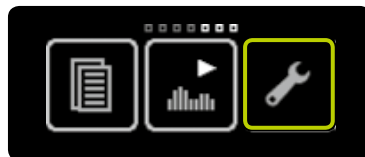

1/5: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.

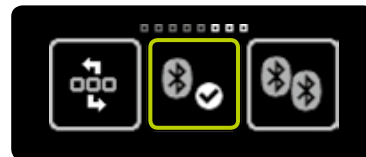

2/5: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Bluetooth® activo/desactivar”.



3/5: Confirme tocando . La bomba mylife™ YpsoPump® vibra un instante y la función Bluetooth® se apaga.




4/5: Aparece la pantalla de estado. El icono de Bluetooth® de la parte superior de la pantalla desaparece.



5/5: Vuelva a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración” y deslice el dedo hacia la izquierda; aparecerá el icono “Bluetooth® inactivo/activar”.

Emparejamiento Bluetooth®

La primera vez que establezca la conexión Bluetooth® entre la bomba mylife™ YpsoPump® y otro dispositivo Bluetooth®, deberá introducir un código de identificación para permitir la conexión Bluetooth® entre los dos dispositivos. Para utilizar la función “Emparejamiento Bluetooth®”, se debe activar la función Bluetooth®. Se puede emparejar un máximo de 5 dispositivos Bluetooth® con la bomba mylife™ YpsoPump®.

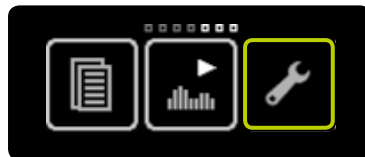

1/6: Abra el menú principal y toque el icono “Configuración”.



2/6: Deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Emparejamiento Bluetooth®”.



3/6: La bomba mylife™ YpsoPump® está lista para el emparejamiento Bluetooth® y espera la solicitud de emparejamiento procedente del dispositivo con Bluetooth®.

Si esta no llega en 2 minutos, se activará el bloqueo de la pantalla y se deberá reiniciar la función de emparejamiento Bluetooth®.



4/6: En la pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® aparece un código de seis cifras y las flechas y las flechas giran. Introduzca este código en el dispositivo Bluetooth®.

El código de identificación se debe introducir en un lapso de 30 segundos. Si se supera este tiempo o se introduce un código de identificación incorrecto, aparecerá la advertencia "Error de la conexión Bluetooth®". Confirme la advertencia y repita el procedimiento descrito en la página 130.



5/6: Si el emparejamiento Bluetooth® se ha realizado correctamente, volverá automáticamente a mostrarse la pantalla de estado.



6/6: Vuelva a abrir el menú principal, toque el icono “Configuración”, deslice el dedo hacia la izquierda y toque el icono “Emparejamiento Bluetooth®”. Las flechas giratorias indican la conexión activa.



Las flechas giratorias indican que hay una conexión Bluetooth® activa a un dispositivo con Bluetooth®. La bomba mylife™ YpsoPump® no puede tener conexión activa con más de un dispositivo Bluetooth® a la vez.



7.6 Preparativos para el almacenamiento

Si no va a utilizar la bomba mylife™ YpsoPump® durante un período prolongado, ajuste la bomba de insulina al modo de parada y extraiga la batería de la bomba de insulina, para evitar cualquier daño por fugas de la batería. La bomba de insulina quedará ajustada al estado de almacenamiento. En el estado de almacenamiento, los ajustes se mantienen (tasa basal, incremento del bolo, etc.).

Tras un reinicio, basta con ejecutar la autocomprobación y reajustar la hora y la fecha. La bomba de insulina se quedará en el modo de parada. Para volver a poner en marcha la bomba de insulina, después del cebado deberá retraer la varilla roscada. Siga el procedimiento indicado en la página 31.



Antes de guardar la bomba mylife™ YpsoPump®, retire el cartucho y el kit de infusión y tire el tubo y la base de la cánula a un contenedor para residuos con riesgo biológico.




1/2: Ajuste la bomba mylife™ YpsoPump® al modo de parada (ver página 27). Extraiga el cartucho y el kit de infusión como se describe en la página 91.



2/2: Abra la tapa del compartimento de la batería y extraiga la batería. Cierre la tapa del compartimento de la batería y guarde la bomba mylife™ YpsoPump® en un lugar seguro.

7.7 Batería interna recargable


La bomba mylife™ YpsoPump® lleva una batería interna recargable que se carga por medio de la batería alcalina insertada. Aunque se extraiga la batería alcalina, las funciones siguen activas. Si la bomba de insulina está en modo operativo y no se inserta una batería nueva en 5 minutos, aparecerá la alarma “No hay batería”. En el modo de parada, a los 5 minutos de haber extraído la batería la bomba de insulina pasará al estado de almacenamiento. Si se extrae la batería alcalina, aparecerá la pantalla de orientación de la batería:

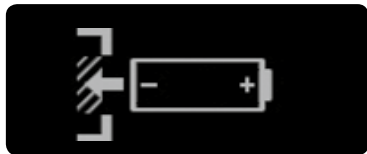

Para cambiar la batería alcalina, siga las instrucciones de la página 136.



Si se hace un uso intenso de la batería recargable interna, esta puede descargarse. En esta situación aparecerá la alarma “Cargar batería interna recargable”. La batería interna recargable se carga ahora por medio de la pila alcalina insertada. Se indica mediante unas flechas que giran alrededor del reloj de arena. La carga puede tardar unos 20 minutos. Una alarma cancela todos los bolos en curso y cualquier función de tasa basal temporal activa.

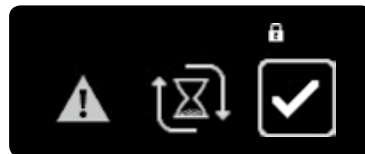

7.8 Cambiar la batería



1/5: Si aparece la advertencia “Queda poca batería”, la bomba de insulina aún se puede seguir utilizando durante al menos dos días. Sustituya la batería lo antes posible.




2/5: Abra el compartimento de la batería insertando una moneda en la ranura de la tapa del compartimento de la batería y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj. Extraiga la batería del compartimento de la batería y elimínela de acuerdo con las normas de protección medioambiental nacionales.



Si el compartimento de la batería lleva abierto más de 5 minutos y la bomba mylife™ YpsoPump® está en modo operativo, se emitirá una alarma. Tras insertar una batería nueva, todos los ajustes de la bomba de insulina se guardarán y ya no habrá que introducirlos de nuevo.

Si el compartimento de la batería lleva abierto más de 5 minutos y la bomba mylife™ YpsoPump® está en modo de parada, la bomba de insulina se ajustará automáticamente al modo de almacenamiento. Cuando cambie la batería alcalina, asegúrese de no perder la tapa del compartimento de la batería.

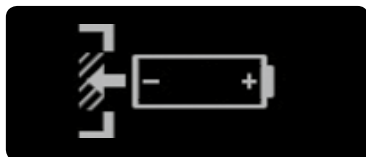

3/5: La pantalla de orientación de la batería muestra la orientación correcta para la inserción de la batería AAA. Aparece en la pantalla de estado. Si la bomba de insulina está en modo operativo y no se inserta la batería transcurridos 5 minutos, se activará una alarma.



4/5: Inserte una nueva batería alcalina AAA (LR03). Asegúrese de insertar primero el polo negativo de la batería. En la parte posterior de la bomba de insulina verá una imagen que muestra cómo se inserta la batería. Puede adquirir baterías de repuesto en cualquier punto de venta de baterías.



Al cambiar la batería alcalina, compruebe si hay daños en el compartimento de la batería, en la propia batería y en la tapa del compartimento de la batería. Si detecta cualquier daño (p. ej., una fuga de la batería), póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente.



5/5: Bloquee el compartimento de la batería insertando una moneda en la ranura de la tapa del compartimento de la batería y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope. Cuando haya insertado la batería, aparecerá primero el icono mylife™, seguido de la pantalla de estado o la pantalla de bienvenida. Esta última aparecerá si la batería se ha retirado durante una retracción de la varilla roscada o una autocomprobación tras un arranque desde el estado de almacenamiento. Cambie la tapa del compartimento de la batería cada tres meses, para minimizar los signos de desgaste.



Si extrae la batería estando en el menú principal o en un submenú, todos los ajustes actuales por confirmar se eliminarán y aparecerá la pantalla de orientación de la batería.

Tras extraer la batería, se finalizarán las funciones siguientes antes de que aparezca la pantalla de orientación de la batería:

- Retracción de la varilla roscada
- Cebado en curso
- Bolo estándar en curso
- Porción inmediata del bolo combinado en curso
- Bolo ciego en curso

Si extrae la batería con cualquiera de las funciones siguientes en curso, aparecerá la pantalla de orientación de la batería y la función continuará en un segundo plano durante 5 minutos, hasta que se active la alarma (la alarma interrumpe la administración de insulina):

- Administración de la tasa basal
- Función de tasa basal temporal en curso
- Bolo extendido en curso
- Porción ampliada del bolo combinado en curso

8 Localización y resolución de errores

Advertencias

- ⚠ Utilice solo el reservorio de 1,6 ml cargado por usted (mylife™ YpsoPump® Reservoir) o el cartucho precargado de 1,6 ml (NovoRapid® PumpCart®) compatible con la bomba mylife™ YpsoPump®. Si utiliza otro cartucho cuya compatibilidad con la bomba mylife™ YpsoPump® no esté corroborada por el fabricante, la insulina podría dosificarse incorrectamente, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). En ese caso, cambie el cartucho.
- ⚠ Tenga en cuenta que las alarmas activadas de forma simultánea se muestran por orden de prioridad. Aunque se haya ocupado de una alarma, puede que aún queden otras alarmas pendientes. Las alarmas ignoradas pueden perjudicar la administración preajustada de insulina, con el consiguiente riesgo de hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ En entornos ruidosos puede resultar difícil oír las alarmas (p. ej., al cortar el césped, en conciertos, etc.). En estos entornos, esté pendiente de las alarmas y compruebe la pantalla de la bomba de insulina con más frecuencia. Las alarmas ignoradas pueden perjudicar la administración preajustada de insulina, con el consiguiente riesgo de hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).

- ⚠ Por la noche, puede no advertir las alarmas si la bomba de insulina no está bien colocada (p. ej., si está acostado sobre la bomba). Asegúrese de que la bomba de insulina esté bien colocada mientras duerme, para poder advertir cualquier alarma. Las alarmas ignoradas pueden perjudicar la administración preajustada de insulina, con el consiguiente riesgo de hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).
- ⚠ Asegúrese siempre de desconectarse el kit de infusión inmediatamente del cuerpo si se produce una alarma de oclusión, para evitar que se administre insulina al organismo al eliminarse la oclusión de repente. De no desconectarse el kit de infusión, la insulina podría dosificarse incorrectamente, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7).

8.1 Incidencias

Agua en el compartimento de la batería	Compruebe su glucemia. Desconéctese el kit de infusión del cuerpo. Extraiga la batería del compartimento de la batería. Seque después el compartimento de la batería con un paño de algodón seco. Si la bomba de insulina no ha sufrido daños aparentes, puede continuar el tratamiento con la bomba de insulina; en caso contrario, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.
Agua en el compartimento del cartucho	Compruebe su glucemia. Ajuste la bomba de insulina al modo de parada. Desconéctese el kit de infusión del cuerpo. Extraiga el cartucho del compartimento del cartucho. Seque después el compartimento del cartucho con un paño de algodón seco. Si la bomba de insulina no ha sufrido daños aparentes, puede continuar el tratamiento con la bomba de insulina; en caso contrario, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.
Burbujas de aire en el cartucho o en el kit de infusión	Compruebe su glucemia. Desconecte el kit de infusión del cuerpo y cebe el kit de infusión sin burbujas de aire de acuerdo con el procedimiento indicado en la página 95.

Caída de la bomba de insulina	Compruebe su glucemia. Ajuste la bomba de insulina al modo de parada. Desconéctese el kit de infusión del cuerpo. Extraiga el cartucho y el kit de infusión y sustitúyalos. La bomba de insulina (y el cartucho) puede presentar microgrietas no detectadas, invisibles al ojo humano, que podrían alterar la precisión de administración. Compruebe si el exterior de la bomba de insulina presenta grietas u otros daños. Después de retirar la varilla roscada tras un cambio de cartucho, preste especial atención a la autocomprobación. Si la bomba de insulina no ha sufrido daños aparentes, puede continuar el tratamiento con la bomba de insulina. Mídase siempre la glucemia regularmente. Si la bomba de insulina está dañada, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.
El icono “Bolo” no está disponible (aparece en gris)	Asegúrese de que la bomba mylife™ YpsoPump® se encuentre en el modo operativo, ya que la función de bolo no está disponible en el modo de parada. La función de bolo tampoco se puede ejecutar si el cartucho está vacío. La función de bolo no se podrá ejecutar si la varilla roscada se ha retraído sin un cebado posterior o si la función de cebado no ha finalizado correctamente.
El icono “Cambiar perfil de tasa basal” no está disponible (aparece en gris)	Si está activada la función de tasa basal temporal, no está disponible la función de cambio de perfil de tasa basal.

El icono “Cambio de cartucho” no está disponible (aparece en gris)	Si está activada la función de tasa basal temporal o si está activo un bolo extendido o combinado, no estará disponible la función de cambio de cartucho.
El icono “Cebiar cánula” no está disponible (aparece en gris)	El tubo del kit de infusión todavía no se ha cebado.
El icono “Cebiar kit de infusión” no está disponible (aparece en gris)	Si está activada la función de tasa basal temporal o si está activo un bolo extendido o combinado, no estará disponible la función de cebado de kit de infusión. La función de cebado de kit de infusión no se puede ejecutar si el cartucho está vacío o si todavía no ha finalizado correctamente una retracción previa de la varilla roscada.
El icono “Emparejamiento Bluetooth®” no está disponible (aparece en gris)	Si no está activada la función Bluetooth®, no se puede activar la función de emparejamiento Bluetooth®.
El icono “Perfil de tasa basal A” no está disponible (aparece en gris)	Si está activada la función de tasa basal temporal, no estará disponible la función de perfil de tasa basal A y no se podrá cambiar el perfil de tasa basal.
El icono “Perfil de tasa basal B” no está disponible (aparece en gris)	Si está activada la función de tasa basal temporal, no estará disponible la función de perfil de tasa basal B y no se podrá cambiar el perfil de tasa basal.

Insulina en el compartimento del cartucho	Compruebe su glucemia. Ajuste la bomba de insulina al modo de parada. Desconéctese el kit de infusión del cuerpo. Extraiga el cartucho del compartimento del cartucho y compruebe si presenta grietas u otros daños. En caso necesario, sustituya el cartucho y limpie el compartimento del cartucho con un paño de algodón húmedo. Seque después el compartimento del cartucho con un paño de algodón seco. Si la bomba de insulina no ha sufrido daños aparentes, puede continuar el tratamiento con la bomba de insulina; en caso contrario, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.
Kit de infusión bloqueado (oclusión)	Compruebe su glucemia y desconéctese el kit de infusión del cuerpo. Elimine la oclusión de acuerdo con el procedimiento indicado en la página 162.
La mayoría de los iconos no está disponible (aparecen en gris)	Si está activada la función de bloqueo de acceso, ninguna de las funciones relacionadas con la terapia estará disponible.
No está disponible la función de bolo ciego	Asegúrese de que esté activada la función de bolo ciego y de que la bomba de insulina esté en modo operativo. En el modo de parada no está disponible la función de bolo ciego. Si el cartucho está vacío, tampoco estará disponible la función. La función de bolo ciego no se podrá ejecutar si la varilla roscada se ha retraído sin un cebado posterior o si la función de cebado no ha finalizado correctamente.

Suciedad en el compartimento del cartucho

Ajuste la bomba de insulina al modo de parada. Desconéctese el kit de infusión del cuerpo. Extraiga el cartucho del compartimento del cartucho. Elimine la suciedad (migas, granos de arena, partículas de polvo, etc.) del compartimento del cartucho golpeando la bomba de insulina suavemente contra la palma de la mano (con el orificio para el cartucho dirigido hacia la palma). No golpee nunca la bomba de insulina contra una superficie sólida (mesa, encimera, lavabo, etc.). Limpie el compartimento del cartucho con un paño de algodón húmedo. Seque después el compartimento del cartucho con un paño de algodón seco. Si la bomba de insulina no ha sufrido daños aparentes, puede continuar el tratamiento con la bomba de insulina; en caso contrario, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.

Suciedad en la superficie

Limpie la bomba de insulina con un paño de algodón húmedo. Seque después la superficie con un paño de algodón seco. Si no pudiera eliminar la suciedad, puede limpiar la superficie con una pequeña cantidad de detergente líquido y un paño de algodón húmedo. No utilice nunca objetos afilados (cuchillo, destornillador, lana de acero, etc.), productos químicos, disolventes o detergentes agresivos para limpiar la bomba. Si la suciedad se resiste, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10. Limpie la bomba de insulina con regularidad.

8.2 Advertencias mostradas

La bomba mylife™ YpsoPump® lleva un sistema de seguridad que supervisa constantemente todas las funciones. Si hay una desviación del estado operativo definido, la bomba de insulina emitirá, según la situación, una advertencia o una alarma. Encontrará una descripción de las alarmas en la página 156. Las advertencias mostradas no se guardan en el historial de alarmas.

Todas las alarmas mostradas se describen en las páginas siguientes. Las advertencias están clasificadas por prioridad. Es decir:

- Si se producen varios acontecimientos a la vez, la advertencia “Nivel de cartucho bajo” siempre aparece prioritariamente sobre todas las advertencias inferiores.
- La advertencia “Queda poca batería” siempre tiene prioridad sobre todas las advertencias inferiores, excepto si coincide con la advertencia “Nivel de cartucho bajo”.
- Las alarmas no confirmadas siempre tienen prioridad sobre las advertencias.

Las advertencias emitidas son principalmente táctiles y acústicas, con 4 niveles de incremento. Los niveles se incrementan en intervalos de 30 minutos. Las advertencias aparecen en la pantalla de estado y deben confirmarse. Para ello, la pantalla se puede encender con el botón de función. Las advertencias no cancelan la administración de insulina. Una vez confirmadas todas las advertencias, vuelve a aparecer la pantalla de estado original.



Niveles de incremento de las advertencias:

Nivel 1: Táctil

Nivel 2: Táctil y señal acústica baja

Nivel 3: Táctil y señal acústica alta

Nivel 4: Táctil y señal acústica mayor

Nivel de cartucho bajo




La advertencia “Nivel de cartucho bajo” se activará si la tasa basal programada (incluida la función de tasa basal temporal) para las siguientes 12 horas, junto con la cantidad restante de cualquier bolo en curso, es igual o mayor al contenido restante del cartucho. Confirme tocando  y sustituya el cartucho lo antes posible de acuerdo con el procedimiento indicado en la página 91. Si no se cambia entretanto el cartucho, la advertencia “Nivel de cartucho bajo” pasará a la alarma “Cartucho vacío”.

Queda poca batería



Si aparece la advertencia “Queda poca batería”, la bomba mylife™ YpsoPump® aún se puede seguir utilizando durante al menos dos días. Confirme tocando  e inserte una nueva batería alcalina AAA (LR03) lo antes posible. Siga el procedimiento indicado en la página 136. Tras confirmar la advertencia, seguirá viendo el indicador de carga baja de la batería en la pantalla. La advertencia “Queda poca batería” pasará a la alarma “Batería vacía” si no se ha cambiado entretanto la batería.


Retracción de la varilla roscada no finalizada

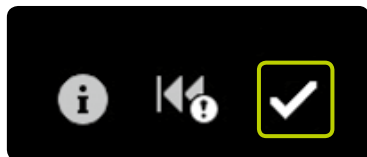

La advertencia “Retracción de la varilla roscada no finalizada” aparecerá si todavía no se ha podido realizar correctamente la función de retracción de la varilla roscada. La advertencia puede deberse a la presencia de suciedad (arena, insulina seca, etc.) en el compartimento del cartucho o, en general, a un fallo mecánico del accionamiento. Este fallo también puede producirse si, al retraer la varilla roscada, la toca algún objeto.

Confirme tocando  y repita la función de retracción de la varilla roscada. Asegúrese de extraer primero el cartucho del compartimento del cartucho y compruebe que no haya suciedad en el compartimento del cartucho; no toque la varilla roscada con ningún objeto. Encontrará más información sobre la función de retracción de la varilla roscada en la página 91.

Cebado no finalizado

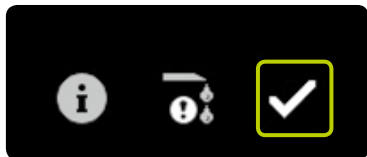


La advertencia “Cebado no finalizado” aparecerá si:

- el accionamiento está completamente extendido (cartucho vacío) sin que se haya detectado un émbolo.
- el usuario cancela el procedimiento de cebado durante la detección del émbolo.
- una alarma cancela el procedimiento de cebado.
- la fuerza aplicada al soporte del émbolo se reduce durante el procedimiento de cebado, por ejemplo, porque se ha extraído el cartucho o se ha insertado un cartucho equivocado.

Confirme tocando  y repita la función de cebado. Asegúrese de que el cartucho se haya insertado correctamente y de que el adaptador esté correctamente conectado a la bomba de insulina. Siga el procedimiento indicado en la página 95.


Bolo cancelado

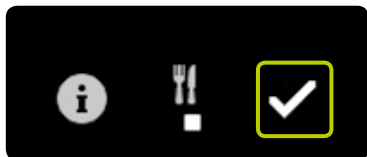

La advertencia “Bolo cancelado” aparecerá si se cancela un bolo antes de tiempo. La cancelación prematura ocurre si hay una alarma o al poner la bomba de insulina en modo de parada. Confirme tocando .

Si el bolo en curso se cancela antes de tiempo, en los datos de terapia o en la última pantalla del bolo constarán la duración real y la cantidad de insulina administrada. Si desea continuar el bolo, deberá reprogramarlo. Siga el procedimiento indicado en la página 55.


Función de tasa basal temporal finalizada o cancelada

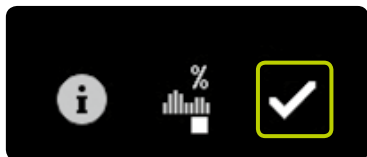

La advertencia “Función de tasa basal temporal finalizada o cancelada” aparecerá si se ha finalizado o si se ha cancelado antes de tiempo la función de tasa basal temporal. La cancelación prematura ocurre si hay una alarma o al poner la bomba de insulina en modo de parada. Confirme tocando .

Si la función de tasa basal temporal se ha cancelado antes de tiempo, la duración real y el ajuste porcentual constarán en los datos de terapia. Si desea proseguir la función de tasa basal temporal, deberá reprogramarla. Siga el procedimiento indicado en la página 50.

Bomba de insulina parada

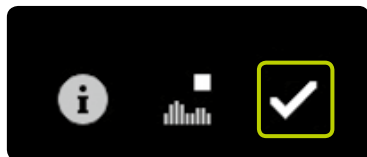

Aparecerá la advertencia “Bomba de insulina parada” si la bomba de insulina lleva más de un hora en modo de parada. Confirme tocando . La advertencia ya no aparecerá, salvo que la bomba de insulina se vuelva a ajustar al modo operativo y después de vuelta al modo de parada. Para reiniciar la bomba de insulina, siga los pasos indicados en la página 25.



La pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® mostrará una advertencia si la bomba de insulina lleva más de una hora en modo de parada. La advertencia de parada se puede activar antes de tiempo, tras ajustar la bomba de insulina al modo de parada, pulsando el botón de función de forma prolongada y confirmando después.



Error de la conexión Bluetooth®



La advertencia “Error de la conexión Bluetooth®” aparecerá si:

- durante el proceso de emparejamiento se supera el límite de 30 segundos para introducir el código de identificación.
- durante el proceso de emparejamiento se introduce un código de identificación incorrecto.
- se desconecta accidentalmente una conexión Bluetooth® activa.

Confirme tocando ☒. Empareje de nuevo la bomba de insulina con el dispositivo deseado de acuerdo con el procedimiento indicado en página 130.

8.3 Alarmas

La bomba mylife™ YpsoPump® lleva un sistema de seguridad que supervisa constantemente todas las funciones. Si hay una desviación del estado operativo definido, la bomba de insulina emitirá, según la situación, una alarma. Encontrará una descripción de las advertencias en la página 147. Todas las alarmas se registran en el historial de alarmas, desde donde se pueden abrir.

Todas las alarmas se describen en las páginas siguientes. Las alarmas están clasificadas por prioridad. Es decir:

- Si se producen varios acontecimientos a la vez, la alarma “No hay batería” siempre aparece prioritariamente sobre todas las alarmas inferiores.
- La alarma “Batería vacía” siempre tiene prioridad sobre todas las alarmas inferiores, excepto si coincide con la alarma “No hay batería”.
- Las alarmas no confirmadas siempre tienen prioridad sobre las advertencias.



Las alarmas siempre cancelan la administración de insulina.

Las alarmas emitidas son principalmente táctiles y acústicas, con 4 niveles de incremento. Los niveles se incrementan en intervalos de 5 minutos. Si una alarma se confirma pero no se soluciona, se volverá a emitir de forma acústica y táctil al cabo de 30 minutos. Los errores electrónicos constituyen una excepción. Estos se indican directa y continuamente de forma acústica y táctil.

Las alarmas que no implican un error electrónico aparecen en la pantalla de estado y deben confirmarse. Para ello, deberá encender primero la pantalla con el botón de función. Las alarmas siempre cancelan la administración de insulina. La alarma permanecerá en la pantalla de estado hasta que haya aplicado en la bomba las acciones necesarias para solucionar la alarma. Los errores electrónicos constituyen una excepción. Se solucionan siguiendo el procedimiento indicado en la página 167.



Niveles de incremento de las alarmas:

Nivel 1: Táctil

Nivel 2: Táctil y señal acústica baja

Nivel 3: Táctil y señal acústica alta

Nivel 4: Táctil y señal acústica mayor

No hay batería



La alarma “No hay batería” aparece al extraer la batería alcalina del compartimento de la batería durante más de 5 minutos, con la bomba de insulina en modo operativo. Confirme tocando  e inserte una nueva batería alcalina AAA (LR03). Siga el procedimiento indicado en la página 136. La alarma “No hay batería” solo aparece si se ha extraído la batería con la bomba de insulina en modo operativo. Si se extrae la batería en el modo de parada, al cabo de 5 minutos la bomba de insulina pasará al estado de almacenamiento.

Batería vacía




La alarma “Batería vacía” aparecerá si la batería ya no tiene la potencia suficiente y se debe sustituir. Confirme tocando  e inserte una nueva batería alcalina AAA (LR03). Siga el procedimiento indicado en la página 136.

Batería no apta




La alarma “Batería no apta” aparece al insertar una batería de excesivo voltaje. Confirme tocando . Extraiga la batería no apta del compartimento de la batería e inserte una nueva batería alcalina AAA (LR03). Siga el procedimiento indicado en la página 136.

Cargar batería interna recargable

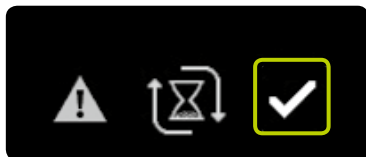

La alarma “Cargar batería interna recargable” aparece si la batería interna recargable de la bomba mylife™ YpsoPump® está descargada debido a un uso intenso. Todas las administraciones en curso se cancelan: bolos, tasa basal temporal y tasa basal. Confirme tocando . La batería interna recargable se carga ahora por medio de la pila alcalina insertada. Se indica mediante unas flechas que giran alrededor del reloj de arena. La carga puede tardar unos 20 minutos. Cuando haya confirmado la alarma, se indicarán todos los bolos cancelados y la función de tasa basal temporal cancelada mediante las advertencias correspondientes. A continuación se mostrará la pantalla de estado, salvo si ha aparecido la alarma “Cargar batería interna recargable” tras la retracción de la varilla roscada o durante una autocomprobación, al iniciar la bomba de insulina en estado de almacenamiento. En estos casos aparecerá la pantalla de bienvenida.

Oclusión

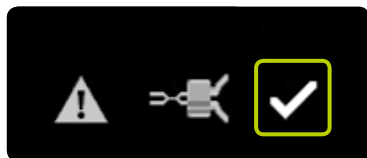

La alarma “Oclusión” aparece si está bloqueada la vía de infusión (p. ej., adaptador, kit de infusión, cánula). Confirme tocando  y desconéctese el kit de infusión del cuerpo. A continuación, haga lo siguiente:

- Cambie el kit de infusión de acuerdo con el procedimiento indicado en la página 90.
- Ceba el tubo con el volumen de cebado especificado para el tubo, de acuerdo con las instrucciones de uso del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®.
- Si puede finalizar el cebado del nuevo kit de infusión sin una alarma de oclusión, podrá continuar el tratamiento.
- Si se repite la alarma de oclusión durante el cebado del nuevo kit de infusión, deberá sustituir el cartucho de acuerdo con el procedimiento indicado en la página 91. Si se puede finalizar el cebado siguiente sin una alarma de oclusión, podrá continuar el tratamiento.
- Si durante el cebado se repite la alarma de oclusión habiendo cambiado el cartucho, la bomba de insulina es defectuosa. Deberá consultar al Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.

No hay insulina




Aparecerá la alarma “No hay insulina” si tras la retracción de la varilla roscada no se realiza ningún procedimiento de cebado en el plazo de 5 minutos o si ha fallado el procedimiento de cebado. La alarma “No hay insulina” solo aparece si la bomba de insulina está en modo operativo. Confirme tocando . Inserte un cartucho y realice un cebado. Siga el procedimiento indicado en la página 91.

Cartucho vacío



La alarma “Cartucho vacío” aparecerá si el cartucho contiene 0,0U de insulina. Confirme tocando ☒. Cambie el cartucho según el procedimiento indicado en la página 91.

Parada automática

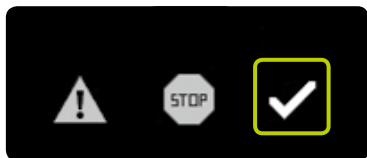

La alarma “Parada automática” aparecerá si la bomba mylife™ YpsoPump® se encuentra en modo operativo y no se ha utilizado en 24 horas. La bomba de insulina se ajustará automáticamente al modo de parada y se cancelarán todas las administraciones de insulina en curso. Confirme la alarma tocando . Para reiniciar la bomba, siga el procedimiento indicado en la página 25.

Error electrónico

Si la bomba mylife™ YpsoPump® detecta un fallo de funcionamiento interno, se indicará un error electrónico. Todas las funciones de la bomba de insulina se cancelarán. Si se produce un error electrónico, la bomba de insulina mostrará dos pantallas diferentes alternativamente, donde verá cómo reiniciar la bomba de insulina en unos pocos pasos.



Desconecte el kit de infusión del cuerpo y extraiga la batería alcalina del compartimento de la batería.



A continuación, pulse el botón de función durante 2 segundos. Ahora, la bomba de insulina no contiene ninguna batería y se encuentra en estado de almacenamiento. Para volver a poner en marcha la bomba de insulina, siga los pasos indicados en la página 31 y compruebe los ajustes de terapia. Cambie el cartucho y el kit de infusión de acuerdo con los pasos indicados en la página 90.



Si el error electrónico sigue apareciendo después de volver a poner en marcha la bomba de insulina o si reaparece al cabo de un tiempo, deje de usar la bomba, extraiga la batería alcalina y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10.

9 Situaciones cotidianas

Advertencias

- ⚠ El deporte y la actividad física pueden modificar sus necesidades de insulina y provocar hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). En caso de duda, consulte a su médico, asesor de diabetes o al Servicio de atención al cliente.
- ⚠ Asegúrese de que el kit de infusión no se le desprenda del cuerpo al hacer deporte o actividades físicas. Si el kit de infusión se desprende, la insulina podría dosificarse incorrectamente, con el consiguiente riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia (lea la advertencia en el recuadro de la página 7). Si el kit de infusión se desprende, sustitúyalo por uno nuevo.

9.1 Generalidades

- Lleve la bomba mylife™ YpsoPump® en el bolsillo de los pantalones o utilice un sistema de transporte de Ypsomed. Coloque el tubo de forma que no haya posibilidad de estrangulación, sobre todo de noche. Evite que la bomba de insulina sufra sacudidas, golpes fuertes u otras interferencias mecánicas. Asegúrese de que la bomba de insulina no se ensucie (partículas de polvo, arena, etc.).
- La bomba mylife™ YpsoPump®, el kit de infusión y el punto de conexión de la bomba mylife™ YpsoPump® no deben entrar en contacto con medicamentos ni productos de higiene personal como antisépticos, pomadas antibióticas, jabones, desodorantes, lociones corporales u otros cosméticos: se podría decolorar la bomba mylife™ YpsoPump® u opacificarse la pantalla táctil. El sudor y la saliva no perjudican la bomba mylife™ YpsoPump®. No obstante, existe riesgo de que se dañe la carcasa de la bomba de insulina si la bomba mylife™ YpsoPump® entra en contacto con otros líquidos o productos químicos como detergentes, alcohol, bebidas, aceite o grasa.
- No exponga nunca la bomba mylife™ YpsoPump® ni el kit de infusión a fuentes directas de luz, radiación o calor (p. ej., radiadores, llamas abiertas). Lo mismo es aplicable a la insulina que utilice. Tenga en cuenta que el intervalo de temperaturas de funcionamiento del sistema mylife™ YpsoPump® es de +5 °C a +37 °C. Mantenga la bomba de insulina alejada de la humedad condensada (p. ej., atomizador de agua, agua hirviendo).
- Compruebe periódicamente si la bomba de insulina presenta grietas y daños. Si descubre un defecto (visual o acústico) en la bomba, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Encontrará los datos de contacto en el dorso de esta guía del usuario, así como en la página 10. No intente nunca reparar la bomba usted mismo.

9.2 Estanqueidad al agua

- La bomba mylife™ YpsoPump® es estanca al agua (grado de protección IPX8), de acuerdo con la norma EN 60529 (inmersión a una profundidad de 1 m durante un máximo de 60 minutos). No obstante, si la bomba mylife™ YpsoPump® se ha caído, es posible que ya no sea estanca al agua, debido a microfisuras no detectadas.
- Dado que el kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit® se puede desconectar del cuerpo, la bomba mylife™ YpsoPump® es fácil de quitar antes de bañarse, ducharse o nadar.
- No utilice la bomba mylife™ YpsoPump® en lugares muy húmedos o donde la temperatura sea muy elevada (p. ej., sauna); podría dañarse. El sistema se puede utilizar en un intervalo de humedad del 20 % al 95 % de humedad relativa.

9.3 Viajes

- Consulte a su médico o asesor de diabetes los preparativos necesarios para viajar con la bomba mylife™ YpsoPump®. Cuando viaje, asegúrese de llevar consigo suficientes suministros para la bomba mylife™ YpsoPump®, así como un medidor de la glucemia. Asegúrese de poder continuar su tratamiento en casos de emergencia (pluma de insulina, glucosa, etc.).
- Si va a viajar por distintas zonas horarias, consulte a su médico o asesor de diabetes sobre la mejor forma de adaptar el tratamiento a los cambios de horario.
- La bomba mylife™ YpsoPump® solo se ha probado para el uso a alturas de hasta 5500 metros sobre el nivel del mar. Si piensa viajar a una región situada a más de 5500 metros sobre el nivel del mar, se recomienda que pare la bomba mylife™ YpsoPump® y se la quite.
- No es necesario que apague la bomba mylife™ YpsoPump® en aviones con cabinas presurizadas, pero en el despegue y el aterrizaje deberá desconectarse el kit de infusión del cuerpo.

9.4 Fuentes de interferencia

- La bomba mylife™ YpsoPump® cumple los requisitos necesarios de inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Los sistemas de seguridad aeroportuarios o los sistemas antirrobo de las tiendas no alteran las funciones de la bomba mylife™ YpsoPump®.
- No obstante, no se pueden descartar completamente los fallos de funcionamiento, porque muchos equipos eléctricos, p. ej., los teléfonos móviles, emiten ondas electromagnéticas. Por este motivo, se recomienda mantener una distancia mínima de 25 cm entre la bomba mylife™ YpsoPump® y estos equipos eléctricos.
- La bomba mylife™ YpsoPump® no se debe utilizar cerca de campos electromagnéticos de sistemas de radar y de antenas, fuentes de alta tensión, fuentes de rayos X, equipos médicos de diagnóstico por imagen, como equipos para tomografía por resonancia magnética (RMN), para tomografía computarizada (TC), para tomografía por emisión de positrones (TEP), ni ninguna otra fuente de corrientes eléctricas intensas. Estas zonas de riesgo pueden interrumpir la administración de insulina de la bomba mylife™ YpsoPump® o dañar la bomba de insulina.
- Ejemplos de otras zonas de riesgo son cámaras hiperbáricas y zonas expuestas a gases o vapores inflamables. Antes de acceder a estas zonas, deberá parar la bomba mylife™ YpsoPump® y quitársela.

9.5 Deportes

- Consulte a su médico o asesor de diabetes los preparativos necesarios para hacer deporte con la bomba mylife™ YpsoPump®. Asegúrese de llevar consigo suficientes suministros para la bomba mylife™ YpsoPump® y un medidor de la glucemia. Asegúrese de poder continuar su tratamiento en casos de emergencia (pluma de insulina, glucosa, etc.).
- Puede practicar deportes que no impliquen contacto físico ni golpes fuertes (p. ej., jogging, caminata, ciclismo, etc.) usando la bomba mylife™ YpsoPump®. En este caso, utilice el sistema de transporte en venta para la bomba de insulina. Le permitirá llevar la bomba de insulina de forma segura.
- Los deportes que impliquen contacto físico y golpes fuertes (p. ej., hockey, fútbol, baloncesto, voleibol, etc.) pueden dañar la bomba mylife™ YpsoPump®. No practique deportes extremos (p. ej., paracaidismo, buceo, aviación amateur, etc.) con la bomba mylife™ YpsoPump®. El trabajo pesado (p. ej., construcción, derribos, etc.) también puede dañar la bomba.
- Según la norma EN 60529, la bomba mylife™ YpsoPump® tiene un grado de protección IPX8 contra la penetración de agua. No obstante, con la bomba mylife™ YpsoPump® no se deben practicar deportes que impliquen contacto con el agua (p. ej., natación, aquafit, saltos acuáticos de gran altura, etc.). No se puede garantizar la estanqueidad al agua de la bomba de insulina en el uso diario en tales circunstancias. Para deportes acuáticos, desconéctese la bomba de insulina del cuerpo y mídase periódicamente la glucemia.

10 Anexo

10.1 Especificaciones del producto

Dimensiones de la bomba de insulina:	7,8 × 4,6 × 1,6 cm
Dimensiones de la pantalla táctil:	4,1 × 1,6 cm
Peso:	83 gramos (incluidos la batería y un cartucho lleno)
Intervalo de temperatura:	Funcionamiento: de + 5 °C a + 37 °C Almacenamiento: de 0 °C a + 40 °C
Humedad:	Funcionamiento: del 20 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación Almacenamiento: del 20 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación
Intervalo de presión atmosférica:	Funcionamiento: de 500 hPa a 1060 hPa Almacenamiento: de 700 hPa a 1060 hPa
Batería:	Batería alcalina de 1,5 V (LR03), tamaño AAA
Vida útil de la batería:	Normalmente 30 días de uso normal (54 U/día; temperatura 23 °C ± 2 °C) con función Bluetooth® activada
Tiempo de almacenamiento de los datos:	360 (trescientos sesenta) meses
No pirógeno:	Solo vía de líquidos
Protección contra descargas eléctricas:	Pieza aplicada de tipo BF (EN 60601-1), dispositivo EM con alimentación interna
Generación de alarmas:	Acústicas, táctiles y visuales
Capacidad del cartucho:	1,6 ml (160 U)
Concentración de insulina:	100 U/ml
Clase de protección contra la penetración de agua:	IPX8 de acuerdo con la norma EN 60529 (inmersión a una profundidad de 1 m durante un máximo de 60 minutos)
Tasa basal:	2 perfiles (A y B), libremente programables por el usuario
Intervalo de ajuste de la tasa basal:	De 0,00 U/h a 40,0 U/h

Tasa basal mínima superior a 0,0 U/h:	0,2 U/h
Incrementos de la tasa basal:	Intervalo de 0,02 U/h a 1,00 U/h: incremento 0,01 U/h Intervalo de 1,00 U/h a 2,00 U/h: incremento 0,02 U/h Intervalo de 2,00 U/h a 15,0 U/h: incremento 0,1 U/h Intervalo de 15,0 U/h a 40,0 U/h: incremento 0,5 U/h
Tipos de bolos:	Bolo estándar, bolo extendido, bolo combinado y bolo ciego
Bolo mínimo:	0,1 U
Intervalo de ajuste del bolo:	de 0,1 U a 30,0 U
Incrementos de bolo:	0,1 U, 0,5 U, 1,0 U y 2,0 U
Precisión de la tasa basal a 0,02 U/h:	$\pm 75\%$ a $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Precisión de la tasa basal a 1,00 U/h:	$\pm 5\%$ a $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Precisión de administración del bolo para 0,1 U:	$\pm 30\%$ a $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Precisión de administración del bolo para 6,0 U:	$\pm 5\%$ a $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Precisión de administración del bolo para 30,0 U:	$\pm 5\%$ a $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Interfaz de comunicación:	Bluetooth® 4,0 Low Energy de 2400 a 2483,5 MHz
Umbral de la alarma de oclusión:	$\leq 3,0$ bar
Presión máx. de infusión:	3,0 bar
Volumen de bolo de oclusión a 1,00 U/h:	máx. 5,0 U
Tiempo habitual hasta la alarma de oclusión a 1,00 U/h:	4 horas
Tiempo habitual hasta la alarma de oclusión a 0,02 U/h:	350 horas
Velocidad de administración durante la administración del bolo:	0,555 U/segundo
Volumen de administración máximo en caso de un fallo único:	5,0 U

10.2 Distancias de seguridad CEM de acuerdo con la tabla 6 de la norma EN 60601-1-2

Para proteger correctamente la bomba mylife™ YpsoPump® de los campos electromagnéticos, se deben adoptar las siguientes precauciones con respecto a la compatibilidad electromagnética:

- La bomba mylife™ YpsoPump® se debe poner en marcha de acuerdo con las instrucciones de esta guía del usuario.
- La emisión de ondas electromagnéticas procedentes de dispositivos de comunicación inalámbricos, como dispositivos informáticos inalámbricos (Wi-Fi), teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus bases, walkie-talkies, etc. puede influir en la bomba mylife™ YpsoPump®. En consecuencia, se debe mantener una distancia adecuada entre la bomba mylife™ YpsoPump® y los dispositivos de este tipo.

Potencia nominal del transmisor en vatios	Distancia de seguridad en metros		
	De 150 kHz a 800 MHz	De 800 MHz a 2,5 GHz	Teléfonos móviles ¹ De 800 a 900 MHz y de 1700 a 1990 MHz
0,01	0,04	0,07	0,03
0,1	0,11	0,22	0,08
1	0,35	0,70	0,25
2	0,49	0,99	0,35
10	1,11	2,21	0,79
100	3,50	7,00	2,50


¹ Debido al uso generalizado de teléfonos móviles, la inmunidad a las interferencias de la bomba mylife™ YpsoPump® se midió a estas frecuencias con una mayor intensidad de campo (28 V/m).

Ejemplos:

- Un enrutador Wi-Fi tiene una potencia de transmisión de 0,1 W limitada por ley y funciona en el intervalo de frecuencias de 2400 MHz. De acuerdo con la tabla, la distancia de seguridad recomendada será de 22 cm.
- Un teléfono inalámbrico DECT tiene una potencia pico de 0,25 W y funciona en el intervalo de frecuencias de 1 880 a 1 900 MHz. De acuerdo con la tabla, la distancia de seguridad recomendada será de aprox. 13 cm.
- Un teléfono móvil tiene una potencia pico de 2 W y funciona en el intervalo de frecuencias de 900 MHz (GSM900). De acuerdo con la tabla, la distancia de seguridad recomendada será de aprox. 35 cm.
- Un teléfono móvil tiene una potencia pico de 1 W y funciona en el intervalo de frecuencias de 1 880 a 1 900 MHz. De acuerdo con la tabla, la distancia de seguridad recomendada será de aprox. 25 cm.

10.3 Precisión de administración de acuerdo con la norma EN 60601-2-24


Curva de arranque

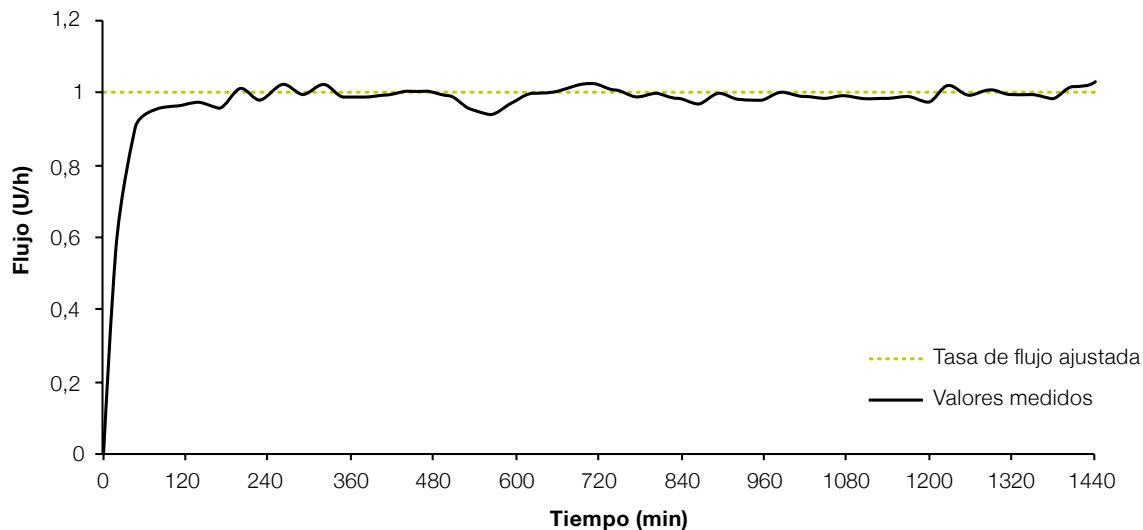

Material y condiciones

- mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, longitud del tubo 110 cm
- Condiciones ambientales 22 °C (± 2 °C), humedad no controlada (del 25 al 75 %)


Curva de trompeta

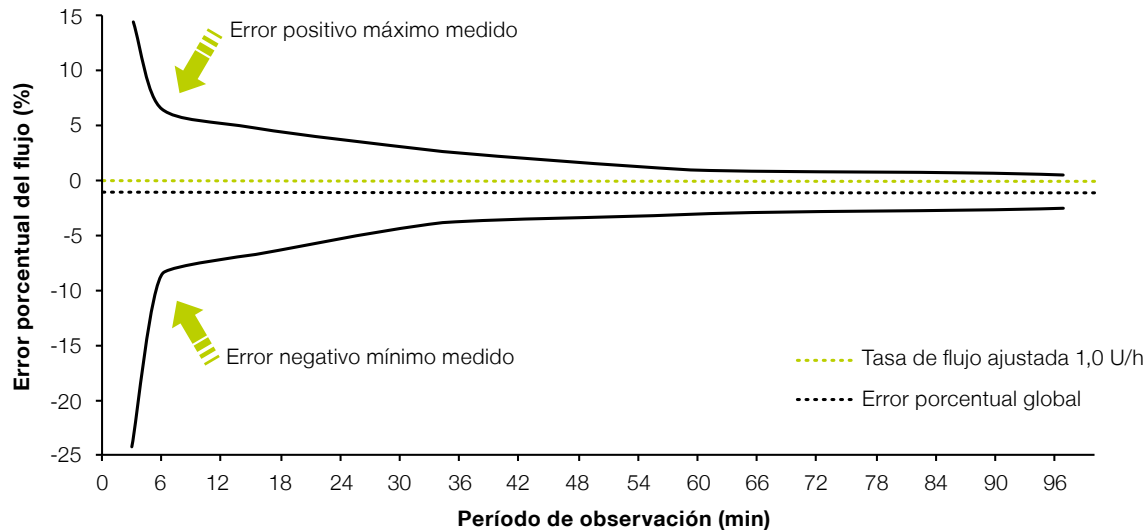


Material y condiciones

- mylife™ YpsoPump® Orbit®soft, longitud del tubo 110 cm
- Condiciones ambientales 22 °C (± 2 °C), humedad no controlada (del 25 al 75 %)

10.4 Mapa de menús

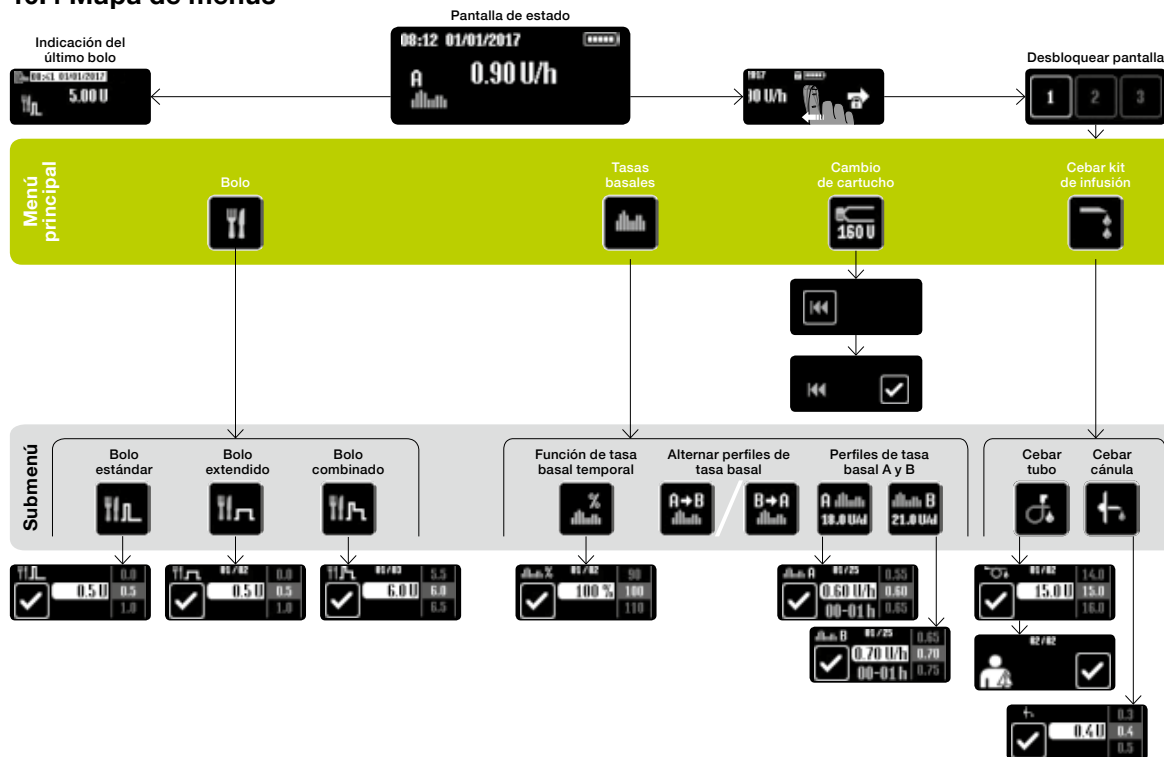

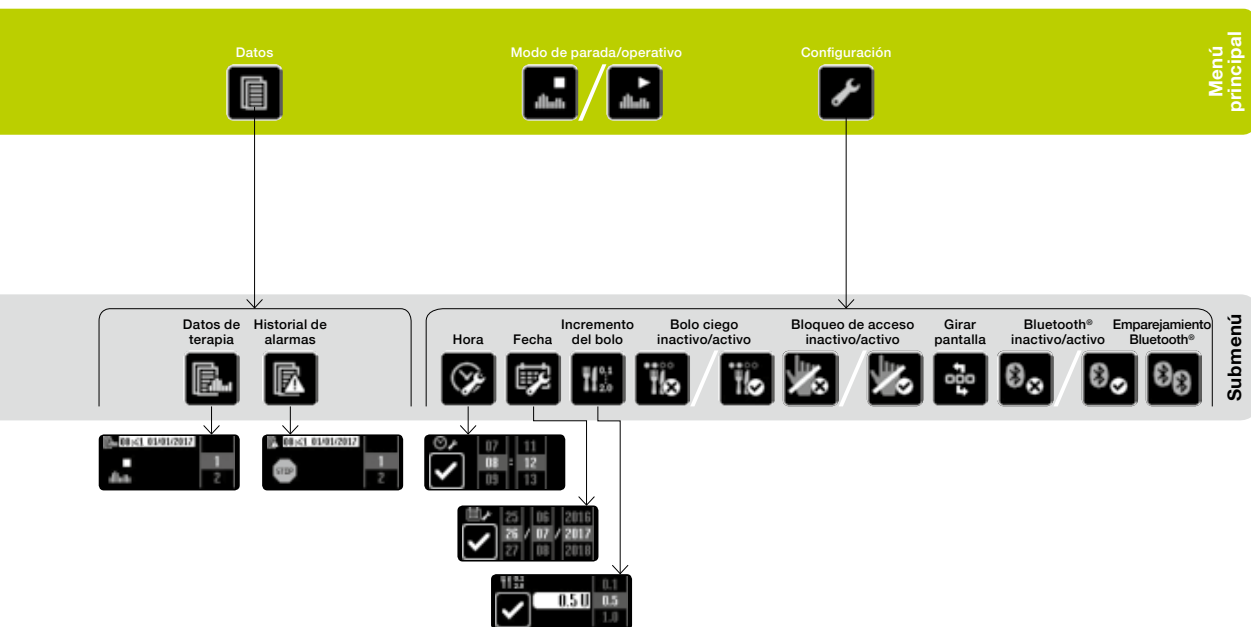

10.5 Vista general de los iconos

Ayudas de navegación



Cancelar



Confirmar



Hacia delante para desbloquear



Hacia delante



Subir un nivel de menú



Un paso atrás

Iconos generales



Advertencia



Alarma



Señal acústica



Señal vibratoria



Nivel de carga de la batería



Batería extraída



Extraer batería



La varilla roscada se está retrayendo

Iconos del menú principal y los submenús



Cebado del tubo en curso



Cebado de la cánula en curso



Desconectar el kit de infusión del cuerpo



Listo para el emparejamiento Bluetooth®



Emparejamiento Bluetooth® en curso



Pulsar el botón de función durante 2 segundos



Cantidad total de insulina diaria (basal y bolo)



Bolo



Bolo estándar



Bolo extendido



Bolo combinado



Tasas basales



Perfil de tasa basal A



Perfil de tasa basal B



Pasar a perfil de tasa basal A



Pasar a perfil de tasa basal B



Función de tasa basal temporal



Función de tasa basal temporal activada/cancelar



Cambio del cartucho y nivel actual del cartucho



Retraer la varilla roscada



Cebiar kit de infusión



Cebiar tubo



Cebiar cánula



Datos



Datos de terapia



Historial de alarmas



Modo operativo/pasar al modo de parada



Modo de parada/pasar al modo operativo



Configuración



Hora



Fecha



Ajustar incremento del bolo



Bolo ciego activo/desactivar



Bolo ciego inactivo/activar



Bloqueo de acceso activo/desactivar



Bloqueo de acceso inactivo/activar



Girar pantalla



Bluetooth® activo/desactivar



Bluetooth® inactivo/activar



Emparejamiento Bluetooth®

Iconos de alarma



No hay batería



Batería vacía



Batería no apta



Cargar batería interna recargable



Oclusión



No hay insulina



Cartucho vacío



Parada automática



Error electrónico

Iconos de advertencia



Nivel de cartucho bajo



Queda poca batería



Retracción de la varilla roscada no finalizada



Cebado no finalizado



Bolo cancelado



Función de tasa basal temporal finalizada o cancelada



Bomba de insulina parada



Error de la conexión Bluetooth®

10.6 Explicación de los símbolos

Símbolos de mylife™ YpsoPump®



Producto diseñado y fabricado de acuerdo con las normas/directivas pertinentes. Venta autorizada en los países de la UE (Unión Europea) y del AELC.



¡Precaución! Consulte el documento adjunto.



Consulte la guía del usuario



Restricción de venta y prescripción médica (EE.UU.)




IPX8 de acuerdo con la norma EN 60529 (inmersión a una profundidad de 1 m durante un máximo de 60 minutos)



Pieza aplicada del tipo BF de acuerdo con la norma EN 60601-1 (protección contra descargas eléctricas)



Símbolo para la recogida separada de baterías/dispositivos con batería integrada

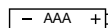

Batería alcalina de 1,5 V (LR03), tamaño AAA y polaridad



Número del Servicio de atención al cliente



Dispositivo con tecnología Bluetooth® integrada

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Ypsomed AG está sujeto a licencia. El resto de marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



El dispositivo emite energía de RF electromagnética



Fabricante



Número de catálogo



Número de serie



Número internacional de artículo comercial



Fecha de fabricación



Iniciar uso en



Límite de temperatura



Mantener seco



Proteger de la luz solar

Símbolos de mylife™ YpsoPump® Orbit® y del mylife™ YpsoPump® Reservoir

CE 1250

Producto diseñado y fabricado de acuerdo con las normas/directivas pertinentes. Venta autorizada en los países de la UE (Unión Europea) y del AELC.



Consulte las instrucciones de uso

Rx Only

Restricción de venta y prescripción médica (EE.UU.)

STERILE EO

Esterilizado con óxido de etileno



No pirógeno



No reutilizar



Fabricante

/EXP

Fecha de caducidad

REF

Número de catálogo

LOT

Código de lote

GTIN

Número internacional de artículo comercial



Fecha de fabricación



Mantener seco



Proteger de la luz solar



Distribuidor

10.7 Glosario

Adaptador

El adaptador fija el cartucho en la posición correcta en la bomba mylife™ YpsoPump® y al mismo tiempo perfora el tapón perforable del cartucho.

Autocomprobación

La autocomprobación es el procedimiento que se realiza automáticamente al poner por primera vez en marcha el dispositivo y tras cada retracción de la varilla roscada. La bomba de insulina comprueba las funciones y la capacidad funcional de la señal visual (pantalla), la señal vibratoria y la señal acústica.

Base de la cánula

La base de la cánula es un elemento del kit de infusión mylife™ YpsoPump® Orbit®. Consta de la cánula, la cinta adhesiva y el tapón perforable. Se puede desconectar del tubo del kit de infusión. Está situada en el lado del paciente del kit de infusión.

Batería interna recargable

La bomba mylife™ YpsoPump® lleva una batería interna recargable que se carga por medio de la batería alcalina insertada. Aunque se extraiga la batería alcalina, las funciones siguen activas.

Bolo

Un bolo es una cantidad de insulina programada que se administra de forma complementaria a la tasa basal administrada de forma continua (durante un período de 24 horas). Se utiliza para corregir una glucemia aumentada o para compensar los hidratos de carbono de una comida.

Bolo extendido

La bomba mylife™ YpsoPump® administra un bolo extendido durante el periodo temporal que usted haya seleccionado.

Bolo ciego

El bolo ciego es un método de administración de bolo que solo se puede programar y activar pulsando el botón de función. Para hacerlo no es necesario ver la pantalla táctil.

Bolo combinado

El bolo combinado es un tipo de bolo en el que la cantidad de bolo total introducida se divide en una porción inmediata y una porción ampliada.

Bolo estándar

El bolo estándar es un tipo de bolo en el que la cantidad de bolo introducida se administra inmediatamente.

Cánula

La cánula está situada en la base de la cánula. Introduce la insulina en el tejido subcutáneo del cuerpo.

Cartucho

El cartucho contiene la insulina. El cartucho de la bomba mylife™ YpsoPump® tiene una capacidad de 1,6 ml (160 U) de insulina con una concentración de 100 U/ml.

Deslizar el dedo

Deslizar el dedo es la acción que se lleva a cabo en la pantalla de la bomba mylife™ YpsoPump® para ajustar los valores. Ajuste un valor deslizando el dedo hacia arriba o abajo hasta que el valor deseado se encuentre en el centro de la pantalla. También puede tocar directamente el valor superior o inferior para aumentarlo o reducirlo una unidad cada vez.

Función de tasa basal temporal

Se ajusta una tasa basal temporal para reducir o aumentar la tasa basal durante un período temporal limitado. Cuando haya finalizado una tasa basal temporal ajustada, seguirá administrándose el perfil de tasa basal programado (A o B).

Icono

Un icono es un símbolo gráfico en la pantalla táctil de la bomba mylife™ YpsoPump®. El sistema de control completo de la bomba mylife™ YpsoPump® se basa en iconos independientes del idioma.

Incremento del bolo

El incremento del bolo se aplica a los cuatro tipos de bolo. Indica en cuántas unidades se aumenta/reduce la cantidad de bolo al pulsar los mandos correspondientes de la pantalla táctil o el botón de función.

Insulina

La insulina es una hormona elaborada por las células beta del páncreas en seres humanos sanos. La insulina es una hormona clave para el metabolismo de los hidratos de carbono.

Kit de infusión

El kit de infusión es la conexión entre la bomba mylife™ YpsoPump® y el cuerpo del paciente.

Kit de infusión desconectable

El kit de infusión desconectable permite desconectar el kit de infusión para tomar una ducha, un baño o hacer deporte.

Lugar de infusión

Un lugar de infusión es la parte del cuerpo en la que se aplica el kit de infusión y se inserta la cánula a través de la piel.

Modo de parada

En el modo de parada no se administra insulina. En el modo de parada, determinadas funciones (administración del bolo, tasa basal temporal, cambiar perfil de tasa basal) están inactivas. Los iconos relevantes se muestran en gris y están desactivados.

Modo operativo

En el modo operativo, la insulina se administra de acuerdo con los ajustes. Normalmente, se pueden ejecutar todas las funciones de la bomba mylife™ YpsoPump®. Todos los iconos seleccionables están activos.

Pantalla de estado

La pantalla de estado indica el estado operativo actual de la bomba mylife™ YpsoPump® (hora actual, fecha actual, carga de la batería, función actual y administración actual de insulina). Para acceder a la pantalla de estado, pulse brevemente una vez el botón de función.

Pantalla táctil

La pantalla táctil es una pantalla sensible al tacto. La pantalla táctil de la bomba mylife™ YpsoPump® reacciona al tacto y se controla tocándola y deslizando el dedo sobre ella.

Perfil de tasa basal

La bomba mylife™ YpsoPump® dispone de 2 perfiles de tasa basal programables A y B. Un perfil de tasa basal consta de 24 tasas basales horarias programables. Por consiguiente, la administración de insulina se puede adaptar óptimamente a su metabolismo.

Procedimiento de cebado

El procedimiento de cebado es el procedimiento por el que el kit de infusión se carga de insulina.

Retracción de la varilla roscada

La retracción de la varilla roscada es el procedimiento por el que la varilla roscada de la bomba mylife™ YpsoPump® vuelve a la posición de inicio, para permitir la inserción de un nuevo cartucho.

Tasa basal

La tasa basal es una cantidad básica de insulina que se administra continuamente por vía subcutánea para mantener la glucemia dentro de un intervalo deseado. La tasa basal se determina según sus necesidades junto con el médico, para luego programarse consecuentemente en la bomba mylife™ YpsoPump®.

Varilla roscada

La varilla roscada es un componente de accionamiento mecánico de la bomba mylife™ YpsoPump® que empuja el émbolo del cartucho hacia delante para administrar la insulina.

100 U/ml

100 U/ml indica la concentración de insulina. 100 unidades de insulina en cada mililitro de líquido. El cartucho precargado de 1,6-ml NovoRapid® PumpCart® contiene 160 U.

10.8 Mis ajustes de bomba

Perfil de tasa basal A		Total diario _____ U/día
De las 00:00 a las 01:00 h _____ U/h	De las 12:00 a las 13:00 h _____ U/h	
De las 01:00 a las 02:00 h _____ U/h	De las 13:00 a las 14:00 h _____ U/h	
De las 02:00 a las 03:00 h _____ U/h	De las 14:00 a las 15:00 h _____ U/h	
De las 03:00 a las 04:00 h _____ U/h	De las 15:00 a las 16:00 h _____ U/h	
De las 04:00 a las 05:00 h _____ U/h	De las 16:00 a las 17:00 h _____ U/h	
De las 05:00 a las 06:00 h _____ U/h	De las 17:00 a las 18:00 h _____ U/h	
De las 06:00 a las 07:00 h _____ U/h	De las 18:00 a las 19:00 h _____ U/h	
De las 07:00 a las 08:00 h _____ U/h	De las 19:00 a las 20:00 h _____ U/h	
De las 08:00 a las 09:00 h _____ U/h	De las 20:00 a las 21:00 h _____ U/h	
De las 09:00 a las 10:00 h _____ U/h	De las 21:00 a las 22:00 h _____ U/h	
De las 10:00 a las 11:00 h _____ U/h	De las 22:00 a las 23:00 h _____ U/h	
De las 11:00 a las 12:00 h _____ U/h	De las 23:00 a las 24:00 h _____ U/h	

Perfil de tasa basal B		Total diario _____ U/día	
De las 00:00 a las 01:00 h	_____ U/h	De las 12:00 a las 13:00 h	_____ U/h
De las 01:00 a las 02:00 h	_____ U/h	De las 13:00 a las 14:00 h	_____ U/h
De las 02:00 a las 03:00 h	_____ U/h	De las 14:00 a las 15:00 h	_____ U/h
De las 03:00 a las 04:00 h	_____ U/h	De las 15:00 a las 16:00 h	_____ U/h
De las 04:00 a las 05:00 h	_____ U/h	De las 16:00 a las 17:00 h	_____ U/h
De las 05:00 a las 06:00 h	_____ U/h	De las 17:00 a las 18:00 h	_____ U/h
De las 06:00 a las 07:00 h	_____ U/h	De las 18:00 a las 19:00 h	_____ U/h
De las 07:00 a las 08:00 h	_____ U/h	De las 19:00 a las 20:00 h	_____ U/h
De las 08:00 a las 09:00 h	_____ U/h	De las 20:00 a las 21:00 h	_____ U/h
De las 09:00 a las 10:00 h	_____ U/h	De las 21:00 a las 22:00 h	_____ U/h
De las 10:00 a las 11:00 h	_____ U/h	De las 22:00 a las 23:00 h	_____ U/h
De las 11:00 a las 12:00 h	_____ U/h	De las 23:00 a las 24:00 h	_____ U/h

Función de tasa basal temporal	Valor	Duración
p. ej., entrenamiento de fútbol	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas
_____	_____ por ciento	_____ horas

Notas

[illegible]



Diabetescare

Más **libertad.**
Más **confianza.**
Con **mylife™**.



Sistemas de
monitorización de
la glucosa



Agujas para plumas y
agujas de seguridad para
plumas



Sistemas de infusión



Accesorios y servicios

mylife™ es una gama de productos y servicios para diabéticos.
Cubre todas sus necesidades para un autotratamiento cómodo
y seguro, además de brindarles mayor libertad y confianza para
disfrutar de la vida que desean.



Ypsomed Diabetes, S.L // Avda Madrid, 95, 5º 1ª // 08.028 Barcelona //
info@ypsomed.es // www.mylife-diabetescare.es // Tlf +(34) 93707003 // Atención al Cliente: 900373955

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS

Otros proyectos de ManualsLib



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ idiomas